

PHILIPS

Фотоэпилятор IPL для
удаления волос

Lumea Prestige

4 эргономичные насадки

Подмышки, зона бикини, тело, лицо

С датчиком SmartSkin

Проводной и беспроводной
режимы работы



BRI956/00



Гладкая кожа на срок до 6 месяцев*

Эргономичные насадки для эффективных результатов

Наш самый мощный фотоэпилятор IPL Philips Lumea Prestige был разработан с учетом изгибов тела для максимально комфортного использования в домашних условиях. Интеллектуальные насадки уникальной обтекаемой формы повторяют изгибы тела и изменяют интенсивность света в зависимости от зоны.

Гладкая кожа надолго благодаря технологии Lumea IPL

- Профессиональная IPL-технология, адаптированная для комфортного домашнего использования, разработанная совместно с дерматологами
- Доказанная безопасность и эффективность процедур
- Подходит для большинства типов волос и кожи
- Использование в проводном и беспроводном режимах

Специально для обработки различных участков тела

- Интеллектуальные насадки изменяют интенсивность света в зависимости от участка тела
- Насадка для подмышек среднего размера с изогнутым дизайном
- Изогнутая насадка для зоны бикини с дополнительным фильтром
- Большая изогнутая насадка для тела
- Насадка для лица с дополнительным фильтром для точечной обработки

Максимум свободы, минимум проблем


- С датчиком SmartSkin
- БЕСПЛАТНОЕ приложение Lumea для персональных рекомендаций
- Мобильное приложение Philips Lumea IPL



asimpleswitch.com


Особенности

Lumea предотвращает повторный рост волос*

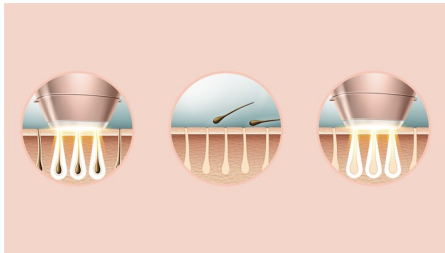

Сокращение IPL означает Intense Pulsed Light — интенсивный световой импульс. Philips Lumea направляет мягкий пульсирующий свет на корень волоса, стимулируя переход волосяного фолликула в фазу покоя. В результате рост волос на теле постепенно сокращается. При регулярном проведении процедур кожа сохраняет превосходную гладкость надолго. Процедура предотвращения повторного роста волос безопасна и не вызывает болевых ощущений даже в чувствительных областях. Устройство Philips Lumea разработано совместно с дерматологами и протестировано в клинических условиях, чтобы вы в удобное для себя время могли легко и эффективно выполнять эту процедуру дома.

Доказанная эффективность

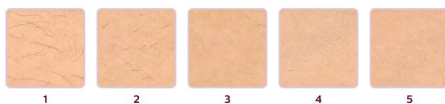

Независимые исследования показали, что уже после 3 сеансов** волосков становится до 92 % меньше. После первых 4 сеансов раз в 2 недели вы увидите желанные результаты. Для поддержания гладкости кожи просто повторяйте процедуру каждые 4 недели. После 8 таких процедур вы уже сможете наслаждаться идеально гладкой кожей до 6 месяцев*.

Типы волос и кожи



Прибор Philips Lumea Prestige прост в использовании, эффективно и безопасно воздействует на разные типы волос и кожи. Подходит для натуральных

русых, каштановых и черных волос и для кожи от очень светлого до смуглого тона. Как и другие решения на основе технологии IPL, Philips Lumea не подходит для удаления седых, светло-русых и рыжих волос, а также для очень темной кожи. Эти ограничения связаны с большой разницей между пигментами, содержащимися в волосах, и пигментами, содержащимися в коже.

Обработка разных участков тела



Эффективность обработки зависит от количества и типа волос, а также от наличия изгибов тела, поэтому каждый участок требует особого подхода. В комплект Philips Lumea Prestige входят интеллектуальные насадки уникальной обтекаемой формы для тела (ног, рук, живота) и лица (верхней губы, подбородка). Интеллектуальные насадки различаются формой, размером окошек и фильтрами. При установке насадки на устройство автоматически включаются настройки для конкретного участка тела. Это сочетание продуманной конструкции и уникального подхода к удалению волос позволяет эффективно и безопасно обрабатывать чувствительные участки.

Насадка для области подмышек



Насадка с размером светового окошка 3 см² имеет изогнутую форму, что позволяет обрабатывать труднодоступную область подмышек. Оптимальные настройки для области подмышек автоматически включаются при установке интеллектуальной насадки на устройство. 86 % женщин остались довольны уменьшением роста волос в области подмышек***.

Насадка для линии бикини



Изогнутая насадка имеет световое окошко размером 3 см² и оснащена дополнительным прозрачным фильтром. Оптимальные настройки интенсивности света для зоны бикини автоматически включаются при установке интеллектуальной насадки на устройство. 78 % женщин остались довольны уменьшением роста волос в зоне бикини***.

Насадка для тела



Насадка для тела имеет самое большое световое окошко (4,1 см²) и идеально подходит для быстрой обработки крупных участков тела, например ног, рук и живота. Изогнутый дизайн повторяет контуры тела и обеспечивает оптимальный контакт с кожей. Оптимальные настройки для этих участков тела автоматически включаются при установке интеллектуальной насадки на устройство. 83 % женщин остались довольны уменьшением роста волос на ногах***.



asimpleswitch.com

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO₂. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

Характеристики

Области применения

Участки тела: Руки, Ноги, Живот

Лицо: Подбородок, Верхняя губа, Подбородок

Чувствительные области: Область подмышек,

Область бикини

Технические характеристики (насадки)

Насадка для тела: Форма: выпуклая и изогнутая, Размер окошка: 4,1 см2, Особые настройки для обработки тела

Насадка для лица: Форма: плоская, Размер окошка — 2 см2, дополнительный фильтр, Особые настройки для обработки лица

Насадка для области подмышек: Форма: вогнутая, Размер окошка: 3 см2, Индивидуальные настройки для обработки подмышек

Насадка для линии бикини: Форма: вогнутая, Размер окошка — 3 см2, дополнительный фильтр, Индивидуальные настройки для обработки зоны бикини

Режим работы

Режим "Slide and Flash": Для быстрого результата

Режим "Stamp and Flash": Для обработки небольших участков

Проводной/беспроводной режим: Проводной и беспроводной режимы работы

Безопасные регулируемые настройки

Встроенный УФ-фильтр: Защищает кожу от ультрафиолетовых лучей

5 настроек интенсивности вспышки: Выбор настройки в зависимости от типа кожи

Встроенная система безопасности: Предотвращает случайные вспышки

Датчик цвета кожи: Определяет оттенок кожи

Датчик SmartSkin: Подсказки по выбору правильной настройки

Время воздействия

Голени: 8,5 мин

Подмышка: 2,5 мин.

Линия бикини: 2 мин.

Лицо: 1,5 мин.

Технические характеристики

Высококачественная лампа: Обеспечивает > 250 000 вспышек

Питание

напряжение: 100–240 В

В комплекте

Инструкции по эксплуатации: Инструкция по эксплуатации

Карта памяти: Роскошный футляр

Адаптер: 19,5 В / 4000 мА

Обслуживание

Гарантия: Международная гарантия сроком на 2 года



* Внутреннее исследование Philips, Эйнховен, январь 2017.

Результат зависит от индивидуальных особенностей темпов роста волос и может отличаться на разных участках тела

** Сокращение роста волос до 92 % после проведения 3 процедур на ногах; при соблюдении рекомендуемой частоты использования; на результат влияют индивидуальные особенности

*** Исследования проводились в Нидерландах и Австрии с участием 46 женщин; результаты после проведения 3 процедур в области подмышек, зоне бикини, на ногах; после проведения 2 процедур на лице