

PHILIPS

Portables
Schlaftherapiegerät


DreamStation Go

Uneingeschränkte Leistung für unterwegs

Einfache Bedienung

Mit einem Gewicht von nur gut 840 g

HH1477/00

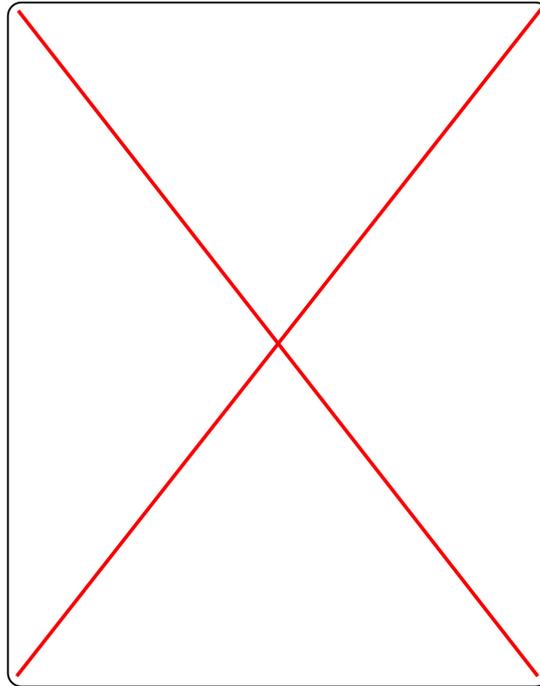

Innovative Schlaftherapie für unterwegs

Dank des schlanken Designs müssen 1/3 weniger Komponenten transportiert werden als bei anderen Schlaftherapie-Reisegeräten*. Dabei bietet die DreamStation Go dieselben Therapie- und Komfortfunktionen, denen bereits mehr als 5 Millionen Schlaftherapie-Patienten weltweit vertrauen.

Entspricht den Vorschriften der FAA*

- Für Flugreisen*

Mit nur gut 840 g das leichteste Schlaftherapiegerät von Philips

- Reise-Akku (separat erhältlich)

Der dünnste und leichteste Schlauch von Philips**

- Micro-Flex Schlauch

Das kleinste Schlaftherapiegerät von Philips

- Kompaktes Design
- Mit integriertem USB-Ladeanschluss
- Schnelle, einfache Einrichtung und intuitive Navigation

Speicherung von Daten für Ärzte und Klinikteam

- Mit Philips DreamMapper kompatibel
- MicroSD-Karte separat erhältlich.
- Bluetooth ist bei allen Geräten Standard

Besonderheiten

Integriertes Netzteil

Die integrierte Stromversorgung erleichtert den Transport. Mit den Abmessungen von 15 cm x 15 cm x 5,8 cm (L x B x H) kann das leichte und kompakte Gerät sogar in einer kleinen Tasche untergebracht und so überall mitgeführt werden.

Mit integriertem USB-Ladeanschluss

Zum einfachen Aufladen von Mobiltelefonen oder anderen Geräten, damit Sie die Steckdose für Lampen, Wecker usw. nutzen können. Ideal auf Reisen.

Entspricht den Vorschriften der FAA

Um Sicherheitskontrollen an Flughäfen möglichst reibungslos verlaufen zu lassen, befindet sich auf der Unterseite der DreamStation Go ein Vermerk, dass es sich um ein medizinisches Gerät handelt, das für die Nutzung im Flugzeug geeignet ist. Das Gerät ist flugtauglich, sofern es über eine Netzsteckdose oder einen Akku betrieben wird. Für Informationen zur Art der Stromversorgung an Bord wenden Sie sich bitte vor dem Abflug an die jeweilige Fluggesellschaft. Dieses Gerät bietet einen automatischen Höhenausgleich bis zu 2.286 Metern. Eine manuelle Einstellung ist nicht erforderlich.

Intuitiver Touchscreen mit Farbdisplay

Über den intuitiven Farb-Touchscreen der DreamStation Go lassen sich die Geräteeinstellungen anpassen und Therapieinformationen anzeigen. Nutzen Sie unsere MyStart Funktion, mit der Sie den für Sie angenehmsten Anfangsdruck für die Auto-CPAP-Therapie einstellen können. Sollte sich der voreingestellte Luftdruck beim Schlafengehen zu hoch oder zu niedrig anfühlen, können Sie die MyStart Druckeinstellung nach oben oder unten korrigieren, um entspannt einschlafen zu können.

Micro-Flex Schlauch

Der im Lieferumfang der DreamStation Go enthaltene neue 12-mm Micro-Flex Schlauch ist der kleinste und leichteste Schlauch, den

Philips je angeboten hat. Er kann platzsparend verpackt werden, zeichnet sich durch mehr Flexibilität und Bewegungsfreiheit aus und erhöht damit Ihren Schlafkomfort. Schneller und einfacher Anschluss am Gerät durch Klickverbindung und eine schlanke Verbindung zu unserer DreamWear Maske. Im Lieferumfang ist zudem ein 22-mm-ISO-Adapter für andere gängige Masken enthalten.

Reise-Akku

Wenn Sie eine Reise planen, bei der die Stromversorgung nicht gesichert ist, erleichtert Ihnen der Reise-Akku der DreamStation Go die Einhaltung Ihrer Therapie. Die DreamStation Go lässt sich bei einer Druckeinstellung von 10 cm H₂O ca. 13 Stunden*** lang über den Reise-Akku versorgen. Die Akkulaufzeit kann bei höheren CPAP-Druckeinstellungen, nicht richtig sitzender Maske, in Abhängigkeit von Höhe und Temperatur oder bei Ladegeräten mit USB-Anschluss oder anderen Umständen abweichen.

Bluetooth

Damit können Sie Ihre Fortschritte am Heimtherapiegerät und dem tragbaren Schlaftherapiegerät verfolgen und überwachen.

Kompatibilität

Dank der Kompatibilität mit dem Philips DreamMapper Selbstmanagement-Tool können Sie als Patient Ihre Therapie auch dann überwachen, wenn Sie gerade unterwegs sind. Sie verwenden die DreamMapper App bereits mit einem anderen Philips Schlaftherapiegerät? Kein Problem. DreamMapper ermöglicht Nutzern nun die Synchronisierung mehrerer Philips Schlaftherapiegeräte mit einem Konto mit gemeinsamer Ansicht.

MicroSD-Karte separat erhältlich.

Möglichkeit zur Speicherung wichtiger Daten für Ärzte und Kliniken.

Daten

Service

Gewährleistung: 2 years

Technical information

Filters: Reusable pollen

Technische Daten

Pressure range: 4 to 20 cm H₂O

Pressure mode(s): CPAP, APAP

Flex pressure relief: 1 to 3

Flex modes: C-Flex, C-Flex+, A-Flex

Ramp time: 0 to 45 min (5-min increments)

Starting ramp pressure: Patient adjustable, Smart Ramp

Dimensions: 15 cm L x 15 cm W x 5.8 cm H

Weight: 844 g (1.86 lb)

Device setup: Touchscreen color display

Data storage capacity: MicroSD card (optional), On-board: <gt;/> 1 year

Compliance meter: Breathing detection

Altitude compensation: Automatic

Electrical requirements: 100-240 VAC, 50/60 Hz



* Im Vergleich zu HDM Z1 und Somnedics Transcend Geräten (2016).

** Im Vergleich zum Philips 22-mm Performance-Schlauch.

*** Laufzeit des DreamStation Go Reise-Akkus: CPAP-Modus, Druck 10 cm H₂O, 12-mm-Schlauch, 37 l/min Verlust, 23 °C Raumtemperatur und Höhe von 500 m über NN.