

PHILIPS

Ultra draagbare
autoCPAP

DreamStation Go

Dezelfde CPAP-prestaties
onderweg

Gebruiksvriendelijk

Weegt ongeveer 854gr

12-mm micro-flexibele slang

HH1511



De ultra draagbare-CPAP opnieuw uitgevonden

Dankzij het strakke ontwerp heeft DreamStation Go een derde minder onderdelen dan andere ultra draagbare-CPAP's*. Het biedt echter wel dezelfde therapie- en comfortfuncties waar ruim 5 miljoen CPAP-gebruikers al van profiteren.

Voldoet aan FAA-vereisten*

- Voor reizen met het vliegtuig*

Het lichtste CPAP-apparaat van Philips (minder dan 1 kilo)

- Batterij (afzonderlijk verkrijgbaar)

De kleinste en lichtste slang van Philips**

- Micro-flexibele slang

Het kleinste CPAP-apparaat van Philips

- Heeft weinig ruimte nodig
- Ingebouwde USB-oplaadpoort
- Snelle, eenvoudige installatie en eenvoudige navigatie

Gegevens opslaan voor uw artsen en klinici

- Compatibel met Philips DreamMapper
- MicroSD-kaart afzonderlijk verkrijgbaar.
- Elk apparaat wordt standaard geleverd met Bluetooth-ondersteuning


Kenmerken

Ingebouwde voedingsbron



Dankzij de ingebouwde voedingsbron hoeft u minder onderdelen mee te nemen. Met afmetingen van 15 cm (L) x 15 cm (B) x 5,8 cm (H) past het apparaat zelfs makkelijk in een kleine tas, licht en discreet. U kunt het overal mee naartoe nemen. Een etui voor het masker en de slang is meegeleverd in de kit.

Ingebouwde USB-oplaadpoort

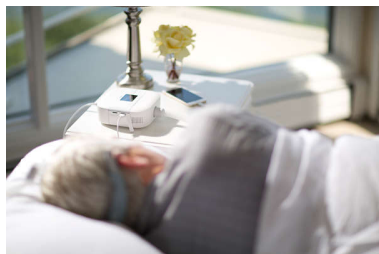

Om mobiele telefoons of andere apparaten eenvoudig op te laden, waarbij uitgangen beschikbaar blijven voor lampen, een wekker, enz. Ideaal voor op reis.

Voldoet aan FAA-vereisten



Om het u gemakkelijk te maken wanneer u op een luchthaven door de veiligheidscontrole gaat, staat er aan de onderkant van het apparaat een verklaring dat het een medisch hulpmiddel is en geschikt voor gebruik in een vliegtuig. Het apparaat is geschikt voor gebruik in een vliegtuig wanneer het is aangesloten op een stopcontact of batterij. Neem voor vertrek contact op met de luchtvaartmaatschappij voor informatie over de voedingsbronnen die tijdens de vlucht beschikbaar zijn. Dit apparaat

compenseert automatisch voor een hoogte tot 2300 meter. Handmatige aanpassing is niet nodig.

Intuïtief kleurenaanraakscherm



Pas de instellingen van het apparaat aan en bekijk therapie-informatie met het kleurrijke en intuïtieve aanraakscherm van DreamStation Go. Maak gebruik van onze MyStart-functie, waarmee u de begindruk voor de autoCPAP-therapie kunt instellen die voor u het meest comfortabel is. Als de standaard luchtdruk te hoog of te laag voelt terwijl u in slaap probeert te vallen, kunt u de MyStart-drukinstelling naar boven of naar beneden aanpassen, zodat u gemakkelijker in slaap kunt vallen.

Micro-flexibele slang



Bij uw DreamStation Go is de nieuwe micro-flexibele slang van 12 mm meegeleverd. Deze slang, de kleinste en lichtste die we ooit hebben aangeboden, is makkelijker in te pakken en biedt meer flexibiliteit en bewegingsvrijheid terwijl u slaapt. Snelle en eenvoudige klikaansluitingen op elk uiteinde van de slang. Kan via een klein verbindingstuk aan ons DreamWear-masker worden gekoppeld en bevat een ISO-adaptor van 22 mm voor andere maskers.

Batterij




Als u tijdens uw reis niet over stroom beschikt, kunt u dankzij de batterij van DreamStation Go toch trouw uw therapie volgen, gemiddeld zo'n 13 uur*** bij een instelling van 10 cm druk. De gebruiksduur van de batterij kan variëren door hogere CPAP-drukinstellingen, extreme lekkage van het masker, hoogte, temperatuur, het opladen van apparatuur via de USB-poort en andere variabelen.

Bluetooth



U kunt uw voortgang op zowel uw CPAP-apparaat thuis als uw CPAP-reisapparaat volgen en monitoren.

Compatibiliteit

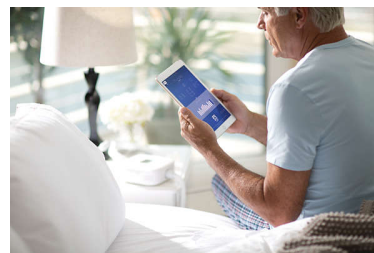

Compatibel met Philips DreamMapper, ons zelfhulpmiddel voor patiënten, zodat u uw therapie zelfs onderweg kunt monitoren. Gebruikt u DreamMapper al met een ander CPAP-apparaat van Philips? Geen probleem. DreamMapper biedt gebruikers nu de mogelijkheid meerdere CPAP-apparaten van Philips te synchroniseren met één account en één gecombineerde weergave.

Specificaties

Technische gegevens

Drukbereik: 4 to 20 cm H₂O

Drukmodus/-modi: CPAP, APAP

Flex-drukontlasting: 1 to 3

Flex-modi: C-Flex, C-Flex+, A-Flex

Drukaanpassingstijd: 0 to 45 min (5-min increments)

Druk geleidelijk ophogen: Patient adjustable, Smart Ramp

Afmetingen: 15 cm L x 15 cm W x 5.8 cm H

Gewicht: 844 g (1.86 lb)

Filters: Reusable pollen

Apparaatinstellingen: Touchscreen color display

Opslagcapaciteit: MicroSD card (optional), On-board: > 1 year

Meting therapietrouw: Breathing detection

Hoogtecompensatie: Automatic

Elektrische vereisten: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Service

Garantie: 2 jaar



* Vergeleken met HDM Z1- en Somnetics Transcend-apparaten (2016).

* **Vergeleken met Philips Performance-slang van 22 mm.

* ***Testomstandigheden PAP-gebruiksduur: CPAP-modus, druk: 10 cm H₂O, slang van 12 mm, 37LPM lekkage, temperatuur: circa 23 °C, hoogte: 4442 m.