

PHILIPS

Pædiatrisk næsemaske
med minimal kontakt

Wisp

Pakke

Hovedtøj i børnestørrelse
og 3 puder

HH1038



Unikt design til unikke patientbehov

En maske specielt skabt til børn – fra formen på rammen til hældningen på puden. Børn kan bære masken komfortabelt under deres normale daglige aktiviteter.

Design

- Modificeret pudekrumning, så den passer til et spædbarns ansigt og næse
- For at gøre maskejustering mindre forstyrrende

Ydeevne og komfort

- Maske specielt designet til børn

Børnevenligt print

- Sjovt og børnevenligt print og bløde stofmaterialer

Åbent synsfelt

- Læs, se TV eller bær briller


Vigtigste nyheder

Stof med girafmønster




Det legesyge tema gør det lettere at behandle barnet og gør ham eller hende mere tryk ved masken.

Højere grad af uafhængighed

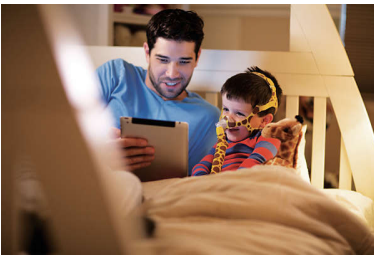

Wisps slanke design eliminerer behovet for en pandepude, så børn bekvemt kan bruge masken under deres normale daglige aktiviteter.

Innovativ afhjælpning af lækage

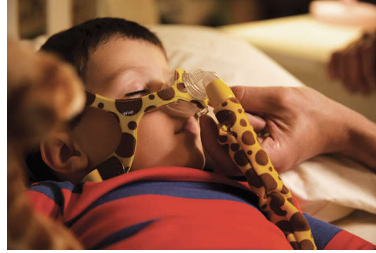

Drejeknappen til afhjælpning af lækage lader dig justere masken uden at fjerne den eller vække barnet.

Minimal kontakt, maksimal komfort



Puden, rammen og hovedtøjet er designet, så de passer til størrelsen og knoglestrukturen på pædiatriske patienter.

Blød og behagelig



Alle tre pudestørrelser passer til den samme ramme

Specifikationer

Service

Garanti: 90-days

Design

Kompakt: Performance and comfort

Specifications

Lydtryksniveau: 22,1 dBA

Antal dele: Fem

Driftstryk: 4 - 20 cmH2O

Slangeovertræk: Nylon/spandex

Specifikationer

Pudemateriale: Silikone

Hovedtøjsmateriale:

UBL/polyuretanskum/nylon/spandex

Slangemateriale: Termoplastisk polyester-elastomer

Rammemateriale:

Nylon/spandex/polyurethan/skum/polyester/acryl

Rengøringsinstruktioner: **maske:** Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

Cleaning: headgear, tubing: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Knæstykke-/drejeledsmateriale:: Amorf nylon

Hovedtøjsspændemateriale: Amorf nylon

Intent of use

patienter <gt;/> 5 kg med CPAP; behandling med to niveauer, eller receptpligtig ikke-invasiv ventilation

