

PHILIPS

Rejse-CPAP-
apparat

DreamStation Go

Samme PAP-ydeevne på farten

Nem at anvende

Vejer mindre end 1 kg

12 mm mikro-fleksibel slange

HH1510



En nyfortolkning af rejse-CPAP- apparater

Vores slanke design har 1/3 færre komponenter at pakke end andre PAP-enheder til rejsebrug,* og DreamStation Go tilbyder samme behandling og komfort, som over 5 millioner PAP-brugere har nydt godt af.

Overholder FAA-kravene*

- for flyrejser *

Philips' letteste PAP på mindre end 1 kg

- Natbatteri (sælges separat)

Philips' mindste og letteste slangesystem**

- Mikro-fleksibel slange

Philips' mindste PAP-apparat

- Kompakt størrelse
- Indbygget USB-port til opladning
- Hurtig og nem opsætning og nem navigation

Gem data til dine læger og klinikere

- MicroSD-kort sælges separat.


Vigtigste nyheder

Indbygget strømforsyning



Indbygget strømforsyning reducerer antallet af dele, der skal bæres. Med disse mål på 15 cm l x 15 cm b x 5,8 cm h, passer den nemt i selv en lille pose, let og diskret. Kan bæres med overalt. Et etui til maske og slanger er inkluderet i sættet.

Indbygget USB-port til opladning

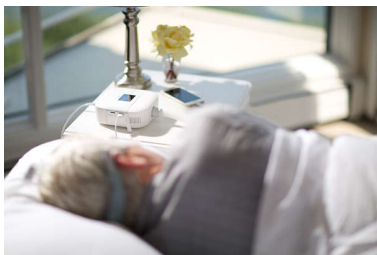

Gør det nemt at oplade mobiltelefoner eller andre enheder, og efterlader ledige stik til lamper, vækkeure osv. Praktisk til rejsebrug.

Overholder FAA-kravene



For at gøre det nemmere for dig ved sikkerhedskontrollen i lufthavne er der et notat på undersiden af enheden, der angiver, at enheden er medicinsk udstyr og er egnet til brug i fly. Enheden er egnet til brug i fly, når det

strømforsynes fra en vekselstrømsstrømkilde eller batterisættet. Tag kontakt til flyselskabet inden afgang for at få oplysninger om, hvilke strømkilder der er til rådighed under flyvningen. Denne enhed kompensere automatisk for højder op til 2286 meter. Det er ikke nødvendigt at justere manuelt.

Intuitiv touchskærm i farver



Justér enhedsindstillinger og få vist behandlingsoplysninger med DreamStation Go's farverige og intuitive touchskærm. Benyt dig af vores MyStart-funktion, der giver dig mulighed for at indstille starttrykket på automatisk CPAP-behandling, så det er mest behageligt for dig. Hvis standardluftrykket føles for højt eller for lavt til at falde i søvn, kan du nemt justere MyStart-trykindstillingen op eller ned, så du kan falde i søvn på mere behagelig vis.

Mikro-fleksibel slange



Med dit DreamStation Go-køb fulgte den nye 12 mm mikro-fleksible slange, som er den mindste og letteste, vi hos Philips nogensinde har kunnet tilbyde, hvilket gør dit apparat nemmere at pakke, giver dig mere fleksibilitet

samt bevægelsesfrihed mens du sover. Hurtige og nemme klik-tilslutninger findes på hver ende af slangerne. Indeholder en slank forbindelse til vores DreamWear-maske, og omfatter en 22 mm ISO-adapter til andre masker.

Natbatteri



Hvis du planlægger en rejse, hvor du ikke har adgang til elnettet, kan natbatteriet til DreamStation Go hjælpe dig med at holde fokus på din behandling. DreamStation Go, med et indstillet tryk på 10 cm, viste en gennemsnitlig driftstid på 13 timer* ved at køre på natbatteriet til DreamStation Go. Batteriets driftstider kan variere pga. højere CPAP-trykindstillinger, kraftig maskeutæthed, højde, temperatur og opladning af enheder via USB-porten og andre variabler.

MicroSD-kort sælges separat.



Kan gemme vigtige data til dine læger og klinikere.

Specifikationer

Tekniske oplysninger

Trykområde: 4 til 20 cm H₂O

Tryktilstand(e): CPAP, APAP

Flex trykaflastning: 1 til 3

Flex-tilstande: C-Flex, C-Flex+, A-Flex

Aktiveringstid: 0 til 45 min (5-minutstrin)

Opstart af aktiveringstryk: Justerbar for patienten, Smart-aktivering

Mål: 15 cm l x 15 cm b x 5,8 cm h

Vægt: 844 g (1,86 lb)

Filtre: Genanvendelige pollen

Enhedsopsætning: Farvetouchskærm

Datalagringskapacitet: MicroSD-kort (valgfrit),

Indbygget: <gt/> 1 år

Compliancemåler: Vejtrækningsregistrering

Kompensation for højder: Automatisk

Elektriske krav: 100-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz

Service

Garanti: 2 years

