

# PHILIPS

IPL - langvarig hårfjerning  
for hele kroppen

Lumea Essential

Hårfri hud i opptil 8 uker

Unngå irritert hud

10 min behandlingstid for begge  
bena

BRI863/00



## Lumea IPL Essential – glatt og hårfri hud i opptil 8 uker!

Philips Lumea IPL Essential er en liten og brukervennlig IPL-løsning for ansikt og kropp. IPL (Intense Pulsed Light) reduserer hårveksten opptil 75 % allerede etter 4 behandlinger. For langvarig resultat bør behandlingen gjentas hver fjerde til åttende uke. Denne modellen har en sensor som tilpasser lysintensiteten etter din hudtone, for ekstra sikkerhet.

### Langvarig hårfjerning med IPL-teknologi

- Tilpasset for sikker bruk i ditt eget hjem
- Gled deg over glatt hud hver dag
- Effektiv uten problemer
- Egnet for forskjellige hår- og hudtyper

### Trygg og effektiv i ansiktet og på kroppen

- Trygg og effektiv, selv på sensitive områder
- Hudtonesensor
- For enkel og mer behagelig bruk
- 50% raskere for kortere behandlingstid\*
- Skånsom behandling
- Fem justerbare innstillinger for lysenergi

### Maksimal frihet, svært enkelt

- Modus for glidende lysglimt for en mer praktisk påføring
- Ingen ekstradeler, ingen skjulte kostnader

# Høydepunkter

## IPL-teknologi




Philips Lumea bruker en nyskapende lysbasert teknologi kalt IPL (Intense Pulsed Light), som bygger på teknologien brukt av profesjonelle skjønnhetssalonger. Philips har tilpasset denne teknologien for sikker og effektiv bruk i hjemmet. Philips samarbeidet tett med ledende hudspesialister for å utvikle denne teknologien. I over 10 år har Philips gjennomført omfattende forbrukerundersøkelser på IPL-teknologien med over 2000 kvinner.

## Gled deg over glatt hud hver dag



Philips Lumea bruker forsiktige lyspulser på hårrøttene. Dette gjør at hårvæksten gradvis reduseres. Hvis du gjentar behandlingen, blir huden din hårfri og silkemyk å ta på.

## Effektiv uten problemer

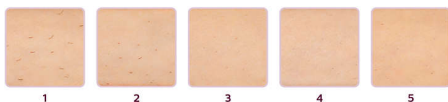

Våre kliniske studier viser betydelig hårreduksjon etter så lite som fire behandlinger annenhver uke, med glatt og hårfri hud som resultat. For å opprettholde disse resultatene gjentar du ganske enkelt behandlingen ved behov. Tiden mellom behandlingene kan variere basert på gjenveksten av hår hos den enkelte. Hvis du vil forstørre dette bildet, klikker du på bildet i bildegalleriet øverst på denne siden

## Passende hår- og hudtyper




Philips Lumea fungerer effektivt på (naturlig) mørkeblondt, brunt og svart hår. I likhet med andre lysbaserte behandlinger fungerer Philips Lumea IKKE effektivt på rødt, lyseblondt eller hvitt/grått hår. Dette produktet passer heller IKKE for mørk hud.

## Bruksområder



Du kan trygt bruke produktet for å fjerne hår i ansiktet (overleppen, haken) og kroppsdeler som bena, armhulene, bikinilinjene, magen og armene.

## Hudtonesensor

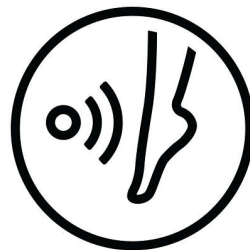


Den integrerte hudtonesensoren måler den behandlede hudtypen i begynnelsen av hver økt og av og til i løpet av økten for ekstra sikkerhet. Hvis den oppdager en hudtone som er for mørk for dette produktet, vil den automatisk stoppe å sende ut lyspulser.

## Fem lysenergiinnstillinger



Philips Lumea har fem justerbare innstillinger for lysenergi som sørger for en behagelig, men effektiv behandling. Når den brukes på riktig måte, er IPL-behandlingen til Philips Lumea sikker og skånsom å bruke selv på sensitiv hud og sensitive områder på kroppen.

## SmartSkin-sensor

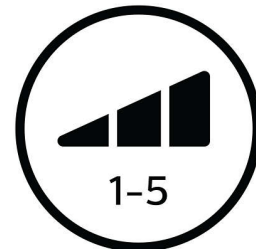

Philips Lumea Essential registrerer hudfargen din og gir deg råd om egnet lysinnstilling

## 50% raskere\*



Større vindu med optimalisert design for raskere behandling og bedre sikt\*

## Skånsom behandling



Skånsom mot huden.

# Spesifikasjoner

## Drift

Spenning: 100–240 V

## Service

Garanti: 2 years global warranty

## Technical specifications

Lampe med høy ytelse: Leverer <gt/> 200 000 lysglimt

## Application areas

Områder på kroppen: Armer, Ben, Mage,

Bikininlje, Armhulene

Ansiktsområder: Hake, Kinnsjegg, Overleppe

## Items included

Brukerveiledning: Brukerhåndbok

Lagring: Veske

Adapter: 12 V / 550 mA, 400 V / 60 W

## Safety and adjustable settings

Integrert UV-filer: Beskytter huden mot UV-stråler

Fem lysenergiinnstillinger: Kan tilpasses til hudtypen din

Integrert sikkerhetssystem: Forhindrer utilsiktede lysglimt

Hudtonesensor: Gjenkjenner hudtypen

## Application time

Legg: 5 min

Armhule: 1 min

Bikininlje: 1 min

Ansiktsområder: 1 min

## Application mode

Glidende lysglimt: For enkel bevegelsespåføring

Kan brukes med og uten ledning: Med ledning

Trykk og flash: For behandling på kurvede områder

