

PHILIPS

 Product Picture

Épilateur à lumière
pulsée

Lumea Essential

Pour le corps et le visage

10 minutes pour les demi-jambes

<gt/> 200 000 flashes + pochette

Avec capteur SmartSkin

BRI863/00

Réduction facile de la pilosité à long terme

L'épilateur Philips Lumea Essential fait des merveilles pour éviter la repousse des poils sur le corps et le visage. De légères impulsions lumineuses, en applications régulières, vous garantissent une peau douce et nette, jour après jour.

Épilation longue durée grâce à la technologie de lumière pulsée

- Adapté pour une utilisation à domicile en toute sécurité
- Une peau douce et nette jour après jour
- L'efficacité sans effort
- Différents types de peaux et de poils adaptés

Sûr et efficace sur le visage et le corps

- Sûr et efficace, même sur les zones sensibles
- Capteur de teint de peau
- Pour une utilisation simple et agréable
- 50 % plus rapide, pour des séances plus courtes*
- Utilisation tout en douceur
- Cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables

Liberté absolue, contraintes minimales

- Mode flash Continu & Manuel pour un flashage facilité
- Aucune pièce de rechange, aucun coût supplémentaire

Points forts

Technologie de lumière intense pulsée




Philips Lumea utilise la technologie dite de lumière intense pulsée ou IPL, dérivée de celle utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des experts pour développer cette technologie. Pendant plus de 10 ans, Philips a mené des tests consommateurs poussés sur la technologie de lumière pulsée auprès de 2 000 femmes.

Une peau douce et nette jour après jour



Philips Lumea envoie de légers flashes à la racine du poil réduisant graduellement votre pilosité naturelle. Répétez les séances pour garder une peau lisse et exempte de poils.

L'efficacité sans effort

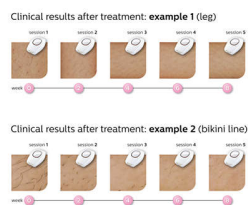

Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité, avec une peau parfaitement lisse dès quatre séances bi-hebdomadaires. Pour maintenir ces résultats, répétez simplement la séance lorsque cela est nécessaire. L'intervalle entre les séances dépend de votre repousse. - Pour agrandir cette image, cliquez dessus dans la galerie en haut de cette page.

Types de peaux et de poils adaptés



Philips Lumea est particulièrement efficace sur les poils blond foncé, bruns ou noirs. Comme toute épilation par la lumière, Philips Lumea n'est PAS efficace sur les poils roux, blond clair, gris ou blancs. De plus, ce produit n'est PAS adapté aux peaux très foncées.

Zones d'application


Vous pouvez l'utiliser en toute confiance pour épiler votre visage (lèvre supérieure, menton) et votre corps, notamment les aisselles, le maillot, le ventre et les bras.

Capteur de teint de peau



Pour une sécurité renforcée, le capteur de type de peau intégré mesure le teint de la peau à flasher au début de chaque séance, puis ponctuellement en cours de séance. S'il détecte une teinte trop foncée pour ce produit, il arrête automatiquement d'émettre des flashes.

5 réglages d'intensité lumineuse

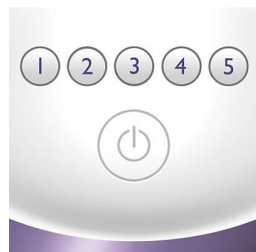

Philips Lumea a cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables pour garantir une épilation à la fois douce et efficace. Utilisée correctement,

l'épilation à la lumière pulsée du Philips Lumea est douce et sans danger, même pour les peaux délicates ou les zones sensibles.

Capteur SmartSkin

Philips Lumea Essential détecte votre couleur de peau et vous conseille le réglage d'intensité à utiliser.


50 % plus rapide*

Grande fenêtre avec design optimisé pour un flashage plus rapide et une meilleure visibilité*

Utilisation tout en douceur

Respecte la peau.

Mode flash Continu & Manuel

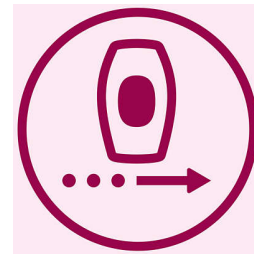

Le mode principal de flashage permet de faire glisser l'appareil sur la peau, pour une épilation plus confortable en continu.

Aucune pièce de rechange nécessaire



Philips Lumea est une solution complète, vendue prête à l'emploi. Plus important encore, il ne nécessite ni lampe de remplacement, ni gel.

Trousse de rangement

Ce Philips Lumea Essential est fourni avec une pochette de luxe pour un rangement facilité.

Caractéristiques

Sites d'application

Zones corporelles: Bras, Jambes, Ventre, Maillot, Aisselles

Zones du visage: Menton, Joues, Lèvre supérieure

Sécurité et paramètres réglables

Filtre UV intégré: Protège votre peau des rayons UV

5 réglages d'intensité lumineuse: S'adapte à votre teint de peau

Système de sécurité intégré: Évite les flashes accidentels

Capteur de teint de peau: Détecte votre teint de peau

Mode d'application

Flash Continu & Manuel: Pour des gestes fluides

Flash & Manuel: Pour une utilisation sur les courbes

Utilisation avec ou sans fil: Sur secteur

Alimentation

Tension: 100-240 V

Spécificités techniques

Lampe haute performance: Produit <gt/> 200 000 flashes

Entretien

Garantie: Garantie mondiale de 2 ans

Accessoires inclus

Conditions d'utilisation: Mode d'emploi

Rangement: Étui

Adaptateur: 12 V / 550 mA, 400 V / 60 W

Durée d'utilisation

Demi-jambe: 5 min

Aisselle: 1 min

Maillot: 1 min

Parties du visage: 1 min

