

PHILIPS

Wisp CPAP-nesemaske
med hodestropp

Pakke

3 puter (S/M, L, XL)

HH1023



Ytelse har fått en ny stil

Den smarte rilleforseglingsteknologien fra Wisp tilpasser seg alle bevegelsene dine. Slik oppnår du førsteklasses forsegling og god nattesøvn.

Magnetiske klemmer

- Hodestroppklemmene og maskeputen inneholder magneter

Uhindret synsfelt

- Les, se på TV eller bruk briller

Kompakt design

- Wisp passer komfortabelt til over 98 % av brukerne*

God ytelse og komfort

- Rask og enkel montering og justering.


Høydepunkter

Kompakt utforming, naturlig passform



Nesetipp-puten er designet til å ligge under neseryggen, noe som gjør at kontakten med ansiktet er minimal, samtidig som det gir førsteklasses forsegling. * Bekreftes via den antropometriske databasen

Større frihet

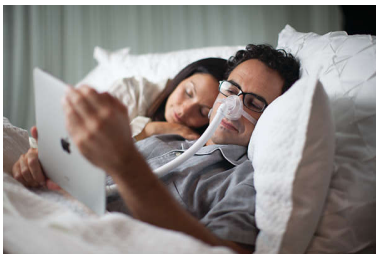

Wisp har et stilrent design som fjerner behovet for pannepute, noe som gir deg bedre synsfelt.

Minimalt design, optimal forsegling



Designet og hodedelklemmene gjør den enklere å bruke og rengjøre.

Magnetiske klemmer

Ta kontakt med helsepersonell før du bruker denne masken. Enkelte medisinske apparater kan bli påvirket av magnetiske felt. De magnetiske klemmene i denne masken må holdes minst 50 mm (2 tommer) unna alle aktive medisinske apparater, spesielt implanterte enheter som pacemakere, defibrillatorer og cochleaimplantater. Les brukerhåndbøkene i pakken for mer informasjon.

Spesifikasjoner

Advarsel: Magnetisk interferens

Beware with pacemakers: Read IFU's before use.

Service

Garanti: 90-days

Utforming

Compact: Easy fitting and adjustment

Komfort: Elastisk hodestropp

Patentert design: Utforming med nesetipp-pute

Stille ekshalasjon: 360 graders roterende vinkelrør

Design

Silikonkonstruksjon: Klar, diskret konstruksjon

Specifications

Sound pressure level: 19 DBA

Rørmateriale: Termoplast polyester elastomer

Materiale i svingfeste: silikon/polykarbonat

Driftstrykk: 4–20 cmH₂O

Beskrivelser

N° of parts: seks

Cushion material: silikon/polykarbonat

Headgear material:

UBL/uretanskum/nylon/spandex/nylon-termoplast

Frame material: silikon/polykarbonat

Cleaning instructions: mask: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

Cleaning: headgear, tubing: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Materiale i vinkelrør/svingfeste::

Polykarbonat

Materiale i hodeklemmer: Acetalkopolymer

Tiltenkt bruk

To be used on patients <gt;/>30kg: with CPAP prescription

Compact

Enkel montering og justering: Stille ekshalasjon

