

# PHILIPS

## Masque nasal

### DreamWisp

Tube situé au sommet de la tête

Coussin avec joint d'étanchéité

Harnais facile à fixer

Coussin existe en 5 tailles

HH1142/00



## Dormez confortablement à chaque instant

DreamWisp est uniquement disponible chez votre prestataire de soins ou votre laboratoire de sommeil. Le masque DreamWisp a été conçu pour vous aider à dormir confortablement à chaque instant. En associant le tube situé au sommet de la tête DreamWear avec le coussin nasal à contact minimal Wisp, le masque DreamWisp vous offre la liberté de dormir dans la position de votre choix tout au long de la nuit.

### Très peu de pièces

- Un ajustement optimal avec très peu de pièces
- Facile à fixer et à ajuster

### Clips magnétiques

- Les clips de fixation du harnais et le coussin du masque incluent des aimants

### Champ de vision dégagé

- Lire, regarder la télévision ou porter des lunettes

### Liberté de mouvement


- Vous permet de dormir dans la position de votre choix

### Confort et facilité d'utilisation

- Un coussin qui allie confort et fiabilité

# Points forts

## Clips magnétiques

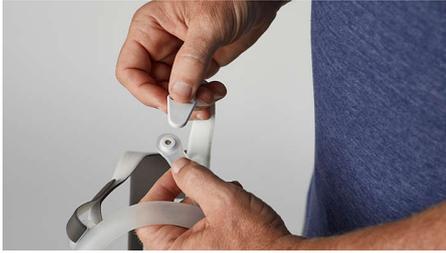

Contactez votre professionnel de santé avant d'utiliser ce masque. Certains appareils médicaux peuvent être affectés par les champs magnétiques. Les clips magnétiques présents dans ce masque doivent être maintenus à une distance d'au moins 50 mm (2") de tout appareil médical actif, avec une attention particulière pour les appareils implantés tels que les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs et les implants cochléaires. Consultez le manuel d'utilisation fourni avec le masque pour plus d'informations.

## Dormez dans la position de votre choix



Grâce à son tube révolutionnaire situé au sommet de la tête, le masque DreamWisp offre une plus grande liberté de mouvement en maintenant le tube là où il ne vous gênera pas. Vous pouvez changer de position tout au long de la nuit (sur le côté, le dos ou le ventre). Les

utilisateurs ont déclaré qu'ils étaient satisfaits de la façon dont le masque restait en place pendant le sommeil.

## Conçu avec un nombre réduit de pièces



Le harnais du masque DreamWisp est conçu pour offrir un confort exceptionnel. En outre, ce harnais à quatre points est conçu pour offrir une stabilité optimale avec un nombre réduit de pièces. L'armature légère et douce fait quant à elle office de canal de débit d'air du DreamWisp. Cela signifie qu'un nombre réduit de pièces entre en contact avec vous pendant votre sommeil. Vous pouvez ainsi bénéficier d'un traitement confortable tous les jours.

## Clips magnétiques



Pour vous aider à poursuivre votre traitement des troubles du sommeil, ce dernier doit être aussi confortable que possible. Le masque DreamWisp est doté de clips magnétiques rapides et faciles à fixer ou à détacher. Vous

pouvez ainsi mettre ou enlever votre masque en toute simplicité, à tout moment. Les utilisateurs ont déclaré qu'ils étaient plus satisfaits de la facilité d'utilisation du masque DreamWisp.

## Coussin Wisp



DreamWisp associe les performances d'un masque nasal à une conception peu invasive, une étanchéité exceptionnelle et le confort de la technologie du coussin Wisp. Les patients sont plus satisfaits de l'étanchéité du masque pendant son utilisation.

## Vision dégagée



La conception unique du tube situé au sommet de la tête vous permet d'avoir un champ de vision dégagé. Avec DreamWisp, vous pouvez lire, surfer sur le Web ou regarder la télévision pendant que vous vous endormez.

# Caractéristiques

## Informations sur le produit

**Matériaux:** Silicone

**Matériaux:** Polycarbonate

**Matériaux:** Mousse de polyuréthane

**Matériaux:** Nylon

**Matériaux:** Spandex

**Matériaux:** Polyester

**Matériaux:** Aimant (acétal)

**Garantie:** 90 jours

**Pression de fonctionnement:** 4 à 30 cmH<sub>2</sub>O

**Niveau sonore:** 18,7 dBA

## Utilisation prévue

À utiliser sur des patients (<gt/> 30 kg): pour lesquels un traitement par PPC a été prescrit

## Avertissement : interférences magnétiques

Attention en cas de port de stimulateur cardiaque: Consulter le manuel d'utilisation avant toute utilisation

## Nettoyage

Laver à la main avec un détergent doux: Rincer abondamment et suspendre ou laisser sécher à l'air libre

