

PHILIPS

Dispositivo di
epilazione IPL

Lumea Prestige

Per il corpo e per il viso

15 minuti per parte inferiore
gambe

<gt/> 250.000 impulsi luminosi

Design cordless

SC2007/00



Pelle sempre liscia*

Philips Lumea Prestige è la soluzione cordless IPL più efficace e risulta perfetta nel prevenire la ricrescita dei peli su viso e corpo. Delicati impulsi di luce, applicati regolarmente, mantengono la pelle liscia come la seta ogni giorno.

Epilazione duratura con la tecnologia IPL

- Pelle liscia ogni giorno
- Efficacia senza sforzo
- Adatta ad un uso sicuro ed efficace nel comfort di casa tua
- Adatto per numerosi tipi di peli e di pelle

Delicato ed efficace sul viso e sul corpo

- Sicuro ed efficace anche sulle zone delicate
- Include un accessorio di precisione per un trattamento sicuro del viso
- Ampia finestra di trattamento, per un'applicazione più veloce
- Trattamento delicato

Massima libertà, minimo sforzo

- Comodità senza fili
- 5 impostazioni di intensità della luce
- Nessuna parte di ricambio, nessun costo aggiuntivo
- Modalità Slide & Flash per un'applicazione più pratica


In evidenza

Tecnologia IPL



Il funzionamento di Philips Lumea è basato sull'innovativa tecnologia IPL (Intense Pulsed Light), che deriva da quella utilizzata nei centri estetici. Philips ha adattato questa tecnologia per un utilizzo sicuro ed efficace nel comfort di casa tua. Questo innovativo sistema di rimozione dei peli superflui è stato sviluppato in collaborazione con dermatologi esperti ed è il frutto di oltre 10 anni di approfondite ricerche con oltre 2000 volontari.

Pelle liscia ogni giorno

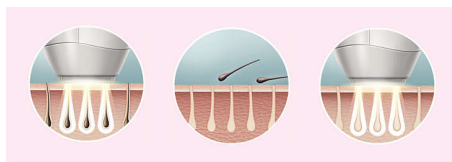

Philips Lumea emette dei delicati impulsi luminosi direttamente alla radice del pelo per una diminuzione graduale della ricrescita. La ripetizione del trattamento ti garantisce una pelle liscia al tatto.

Efficacia senza sforzo

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



I nostri studi hanno dimostrato una significativa riduzione dei peli dopo quattro soli trattamenti eseguiti a distanza di due settimane, con pelle liscia e priva di peli. Per mantenere questi risultati è sufficiente ripetere i trattamenti quando è necessario. L'intervallo tra i trattamenti può variare in base alla ricrescita

individuale. - Per ingrandire l'immagine, fai clic su di essa nella galleria nella parte superiore di questa pagina

Tipi di pelle e di peli compatibili



Philips Lumea è efficace sui peli di colore (naturale) biondo scuro, castano e nero. Come altri trattamenti basati sulla luce, Philips Lumea NON è efficace sui peli di colore rosso, biondo chiaro e grigio. Inoltre Philips Lumea NON è adatto alla pelle molto scura.

Zone di applicazione

Può essere utilizzato in tutta tranquillità sul viso (labbro superiore, mento e basette) e su varie parti del corpo, comprese gambe, ascelle, zona bikini, addome e braccia.

Trattamento veloce sulle gambe



Ampia finestra di trattamento per l'applicazione rapida sulle aree più grandi come le gambe.

Maggiore sicurezza per il viso




L'accessorio di precisione è dotato di un filtro della luce aggiuntivo integrato e consente un'applicazione sicura e pratica su labbro superiore, mento e basette. Può essere utilizzato anche su altre aree sensibili del corpo, come le ascelle, la zona bikini e i punti più difficili da raggiungere.

Trattamento delicato



Delicato sulla pelle.

Comodità senza fili

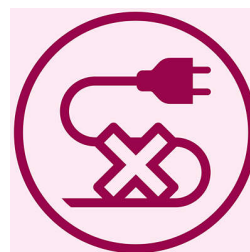

L'esclusivo design senza fili di Lumea è perfetto per raggiungere facilmente tutti i punti e per la massima facilità di uso.

Specifiche

Zone di applicazione

Zone del corpo: Braccia, Gambe, Addome, Zona bikini, Ascelle

Zone del viso: Mento, Basette, Labbro superiore

Impostazioni di sicurezza regolabili

Filtro UV integrato: Protegge la pelle dai raggi UV

5 impostazioni di intensità della luce:

Regolabile in base al tipo di pelle

Sistema di sicurezza integrato: Impedisce l'attivazione accidentale del flash

Modalità di applicazione

Scorrimento e flash: Per una pratica applicazione

Con filo/cordless: Cordless

Pressione e flash: Per il trattamento sulle zone curve

Assorbimento

Tempo di carica: 100 min

Tensione: 100-240 V

Tempo di funzionamento: Minimo 370 flash

Specifiche tecniche

Lampada ad alte prestazioni: Assicura più di 250.000 impulsi di luce

Consumer Trade Item

Height: 19

Width: 26.6

Length: 12

Net Weight: 0.849

Gross Weight: 1.247

GTIN: 8710103753797

Country of origin: HU

Harmonized system code: 85437090

Scatola esterna

Height: 28

Width: 19.7

Length: 24.8

Net Weight: 1.698

Gross Weight: 2.652

GTIN: 18710103753794

Accessori

Accessorio di precisione (2 cm²): Per un'applicazione sicura sul viso

Accessorio per il corpo (4 cm²): Per l'uso al di sotto della nuca

Assistenza

Garanzia: 2 anni di garanzia

Accessori inclusi

Istruzioni d'uso: Manuale utente

Caricabatterie: Caricatore multitemperatura

A magazzino: Custodia elegante

Accessorio: Panno per la pulizia

Tempo di applicazione

Parte inferiore della gamba: 8 min

Ascella: 1 minuto

Zona bikini: 1 minuto

Zone del viso: 1 minuto

