

# PHILIPS

CPAP-matkalaite

DreamStation Go

Tehokas matkalait

Helppokäyttöinen

Painaa alle kilon

Erittäin joustava 12 mm:n letku

HH1510



## CPAP-laitteen uusi matkamalli

Pienessä laitteessa on 1/3 vähemmän mukaan otettavia osia kuin muissa matkakäyttöön tarkoitetuissa PAP-laitteissa.\* DreamStation Go -laitteella saat saman hoidon yhtä miellyttävästi kuin 5 miljoonaa muuta PAP-laitteen käyttäjää.

### FAA-vaatimusten mukainen\*

- Lentomatkustamiseen\*

### Philipsin kevyin PAP-laite painaa alle kilon

- Yliönakku (myydään erikseen)

### Philipsin ohuin ja kevyin letku\*\*

- Erittäin joustava letku

### Philipsin pienin PAP-laite

- Kompakti muotoilu
- Kiinteä USB-latausportti
- Yksinkertainen ja nopea aloitus ja helpot valikot

### Tallenna tiedot lääkäriä varten

- MicroSD-kortti myydään erikseen.


# Kohokohdat

## Kiinteä virtalähde



Kiinteän virtalähteen ansiosta laitteessa on vähemmän mukaan otettavia osia. Se on vain 15 cm leveä, 15 cm pitkä ja 5,8 cm korkea, joten se sujuu helposti pieneenkin laukkuun mukaan otettavaksi minne vain. Pussi maskia ja letkua varten kuuluu pakkaukseen.

## Kiinteä USB-latausportti

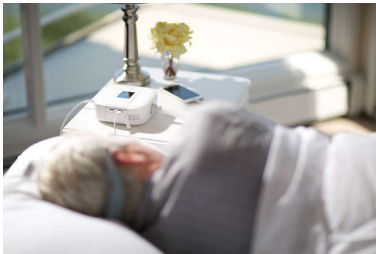

Matkapuhelinten ja muiden laitteiden lataus on helppoa. Liitäntöjä riittää myös valaisimille, herätyskellolle ja muille laitteille. Kätevä matkalla.

## FAA-vaatimusten mukainen



Jotta asioiminen lentokenttien turvatarkastuksessa olisi mahdollisimman sujuvaa, laitteen pohjassa lukee, että laite on

lääkintälaite ja soveltuu käytettäväksi lentokoneessa. Laite sopii käytettäväksi lennoilla sekä verkkovirralla että akulla. Kysy tietoja lennon aikana saatavilla olevista virtalähteistä lentoyhtiöltä ennen matkaa. Laite kompensoi korkeuserot automaattisesti 2 286 metriin asti. Manuaalisia säätöjä ei tarvita.

## Intuitiivinen kosketusvärinäyttö



Voit muuttaa laitteen asetuksia ja tarkastella hoitotietoja DreamStation Go -laitteen intuitiivisessa kosketusvärinäytössä. MyStart-toiminnolla voit määrittää Auto CPAP -hoidon alkupaineen itsellesi sopivaksi. Jos oletusarvoinen ilmanpaine tuntuu liian kovalta tai heikolta nukkumaan mennessä, voit säätää MyStart-paineasetusta, jolloin nukahtaminen on helpompaa.

## Erittäin joustava letku



DreamStation Go -laitteen mukana toimitettava uusi 12 mm:n erittäin joustava letku on Philipsin kaikkien aikojen ohuin ja kevyin. Entistä joustavampi letku antaa lisää liikkumavapautta nukkuessa ja on aiempia

malleja helpompi pakata mukaan. Letkun molemmat päät on helppo napsauttaa paikoilleen. DreamWear-maskin liitäntä ja 22 mm:n ISO-sovitin muita maskeja varten.

## Yliönakku



Jos matkasi suuntautuu paikkaan, jossa verkkovirtaa ei ole saatavilla, voit varmistaa hoitosi DreamStation Go -laitteen yön yli kestäväällä akulla. DreamStation Go kesti 10 cm:n paineasetuksella käytössä keskimäärin 13 tuntia\*\*\* Dreamstation Go -yliönakulla. Akun kestoon voivat vaikuttaa korkeammat CPAP-paineasetukset, maskin liiallinen vuoto, korkeus merenpinnasta, lämpötila, USB-portista ladattavat laitteet ja muut tekijät.

## MicroSD-kortti myydään erikseen.



Voit tallentaa tärkeitä tietoja lääkäriä varten.

# Tekniset tiedot

**Tekniset tiedot**

**Painealue:** 4–20 cmH<sub>2</sub>O

**Painetila(t):** CPAP, APAP

**Flex-paineenlennus:** 1–3

**Flex-tilat:** C-Flex, C-Flex+, A-Flex

**Nousuaika:** 0–45 min (5 minuutin lisäyksiin)

**Aloituspaine:** Potilaan säädettävissä, Smart Ramp

**Mitat:** 15 cm x 15 cm x 5,8 cm (L x P x K)

**Paino:** 844 g (1,86 lb)

**Suodattimet:** Kestokäyttöinen

**Laitteen käyttöönotto:** Kosketusvärinäyttö

**Tallennuskapasiteetti:** MicroSD-kortti

(lisävaruste), Levyllä: <gt/> 1 vuoden

**Potilasmittari:** Hengityksentunnistin

**Korkeuserojen kompensointi:** Automaattinen

**Sähkönkulutus:** 100–240 VAC, 50/60 Hz

**Huolto**

**Takuu:** 2 years

