

# PHILIPS

Épilateur à lumière  
intense pulsée


Lumea

Precision Plus

Utilisation sur le corps et le  
visage

100 000 flashes

SC2003/12

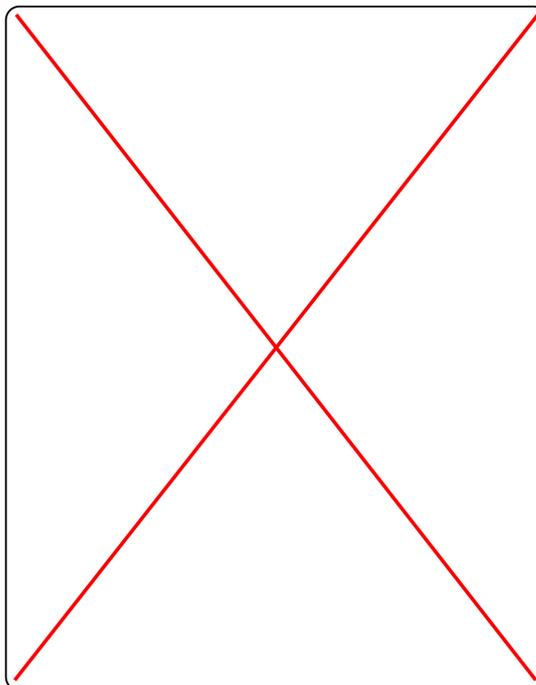

## Prévient la repousse des poils

### Mode Slide & Flash pour une épilation plus rapide

L'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea fait des merveilles pour éviter la repousse des poils, sur le visage et le corps. De légères impulsions lumineuses, en applications régulières, vous garantissent une peau douce et nette, jour après jour. Le mode Slide & Flash vous permet de flasher en continu pour une utilisation plus rapide et plus confortable.

#### **Douceur longue durée**

- L'efficacité sans effort
- Une peau douce et nette jour après jour

#### **Épilation grâce à la technologie de lumière pulsée**

- Adapté pour une utilisation à domicile en toute sécurité
- Convient à de nombreux types de peau et de poils

#### **Application douce et efficace sur le corps comme sur le visage**

- Mode flash Continu & Manuel pour un flashage facilité
- Accessoire de précision pour flasher le visage en toute sécurité
- Grand accessoire corps pour un flashage rapide
- Cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables
- Sûr et efficace, même sur les zones sensibles

#### **Liberté absolue, contraintes minimales**

- Sans fil, ultra-pratique
- Aucune pièce de rechange, aucun coût supplémentaire

## Points forts

### Technologie de lumière intense pulsée

Philips Lumea utilise une technologie innovante basée sur la lumière, la technologie de lumière pulsée, dérivée de celle utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des dermatologues de renom pour développer cet épilateur révolutionnaire. Pendant plus de 10 ans, nous avons mené des tests consommateurs poussés avec plus de 2 000 femmes.

### Mode flash Continu & Manuel

Le mode principal de flashage permet de faire glisser l'appareil sur la peau, pour une épilation plus confortable en continu.

### L'efficacité sans effort

Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité, avec une peau parfaitement lisse dès quatre séances toutes les 2 semaines. Pour maintenir ces résultats, répétez simplement les séances lorsque cela est nécessaire. L'intervalle entre les séances dépend de votre repousse.

### Douceur longue durée

Philips Lumea émet des impulsions lumineuses légères et douces jusqu'à la racine du poil, ce qui fait tomber le poil naturellement et freine sa repousse. Répétée régulièrement, cette épilation vous garantit une peau douce, jour après jour.

### Une sécurité accrue sur le visage

L'accessoire de précision est doté d'un filtre UV supplémentaire intégré et permet une utilisation pratique et en toute sécurité sur la lèvre supérieure, le menton et les joues.

### Flashage rapide des jambes

Grand accessoire pour flasher plus rapidement les zones étendues telles que les jambes.

### Cinq niveaux d'intensité lumineuse

Philips Lumea a cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables pour garantir une épilation à la fois douce et efficace. Utilisée correctement, l'épilation à la lumière pulsée du Philips Lumea est douce et sans danger, même pour les peaux délicates ou les zones sensibles.

### Zones d'application

Vous pouvez l'utiliser en toute confiance pour épiler votre visage (lèvre supérieure, menton et joues) et le corps, notamment les aisselles, le maillot, le ventre et les bras.

### Sans fil, ultra-pratique

La conception sans fil exclusive de Lumea permet d'atteindre tous les recoins du corps, pour une utilisation ultra-pratique.

### Aucune pièce de rechange nécessaire

Philips Lumea est une solution complète, vendue prête à l'emploi. Plus important encore, il ne nécessite ni lampe de remplacement, ni gel.

### Types de peaux et de poils adaptés

Philips Lumea est particulièrement efficace sur les poils blond foncé, bruns ou noirs. Comme toute épilation par la lumière, Philips Lumea n'est PAS efficace sur les poils roux, blond clair, gris ou blanc. De plus, Philips Lumea n'est PAS adapté aux peaux très foncées.

## Caractéristiques

### Alimentation

Tension: 100-240 V

### Entretien

Garantie: Garantie mondiale de 2 ans

### Spécificités techniques

Lampe haute performance: Produit <gt/> 100 000 flashes

### Zones d'application

Zones corporelles: Bras, Jambes, Ventre, Maillot, Aisselles

Zones du visage: Menton, Joues, Lèvre supérieure

### Accessoires

Embout de précision (2 cm<sup>2</sup>): Pour une utilisation en toute sécurité sur le visage

Embout pour le corps (4 cm<sup>2</sup>): Pour l'utilisation sur les zones en dessous du cou

### Accessoires inclus

Chargeur: Chargeur multi-tension

Instructions d'utilisation: Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi

Stockage: Étui

### Power

Temps de charge: 100 min

Autonomie: 370 flashes minimum

### Sécurité et paramètres réglables

Filtre UV intégré: Protège votre peau des rayons UV

5 réglages d'intensité lumineuse: S'adapte à votre teint de peau

Système de sécurité intégré: Évite les flashes accidentels

### Durée d'utilisation

Demi-jambe: 8 min

Zones du visage: 1 min

### Application time

Aisselle: 1 min

Maillot: 1 min

### Application mode

Flashes ponctuels: Pour une utilisation sur les courbes

### Mode d'application

Glisser et flasher: Pour une application pratique

Utilisation avec ou sans fil: Sans fil

