

PHILIPS

Спейсер

OptiChamber Diamond

В комплекте со средней маской LiteTouch

Для детей в возрасте 1–5 лет

Для препаратов назначаемых для терапии

Компактная конструкция объемом 140 мл

НН1331



Помогает в терапии и контроле заболевания

Создано для более комфортной доставки препарата в легкие

Спейсер OptiChamber Diamond обеспечивает подачу лекарственного препарата непосредственно в легкие пациента. Благодаря антистатическому материалу внутренней поверхности камеры аэрозоль дольше находится в ней, увеличивая время для вдоха*.

Комфорт

- Маска повторяет контуры лица и имеет удобную форму
- Универсальный мундштук

Повышение эффективности терапия

- Подача препарата в легкие пациента**

Создано для эффективной работы

- Специальные функции облегчают процесс использования и обслуживания
- Клапаны с низким сопротивлением облегчают дыхание
- Использование антистатического материала в спейсере увеличивает время для вдоха


Для часто назначаемых препаратов

- Для часто назначаемых препаратов

Особенности

Позволяет дышать свободнее

Low resistance valves

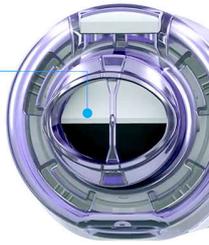

Спейсер оснащен клапанами с низким сопротивлением, которые беспрепятственно открываются, даже при низкой скорости вдоха у детей, облегчая дыхание*.

Комфортная терапия



Сменная маска LiteTouch имеет мягкое покрытие, удобно прилегающее к лицу, обеспечивая комфорт при проведении терапии. А вставка SoftTouch гарантирует герметичность и уменьшает объем утечек лекарства***.

Совместимость



Спейсер OptiChamber Diamond предназначен для распыления часто назначаемых ингаляционных препаратов.

Простота использования и обслуживания



Адаптер надежно фиксирует ингалятор, а встроенный свисток сигнализирует о слишком быстром вдохе. Мундштук и адаптер легко снимаются для очистки.

Для взрослых и детей



Благодаря специальному дизайну мундштука спейсер OptiChamber Diamond может использоваться как детьми, так и взрослыми.

Подача препарата непосредственно в легкие пациента



Спейсер OptiChamber Diamond создан для улучшенной подачи аэрозольного препарата в легкие пациента, а также обеспечения максимальной эффективности применяемой ингаляционной терапии.

Время для вдоха



Устройство OptiChamber Diamond обеспечивает подачу медицинского препарата в легкие пациента. Благодаря антистатическому материалу внутренней поверхности спейсера аэрозоль дольше находится в камере, увеличивая время для вдоха*.

Характеристики

Содержимое упаковки

Включает: Средняя маска LiteTouch, OptiChamber Diamond

Дизайн

Легко использовать: Достижение результата в терапии

Материал

Камера: АБС-пластик

Маска LiteTouch: Полиэтилентерефталат (ПЭТ), силикон

Клапаны: Силикон

Обслуживание

Очистка: Раствор теплой воды и жидкого мыла

Данные срока службы: Требуется замена через год

Сведения о продукте

Длина: 14,2 см

Загубник: Работа с разрезами 22 мм

Громкость: 140 мл

Используется с небулайзером: Дети в возрасте 1–

5 лет



* *Slator L., von Hollen D., Sandell D., Hatley R.H.M. In vitro comparison of the Effect of Inhalation Delay and flow rate on the emitted dose from three valved holding chambers. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2014, 27(S1): 37-43.

* **Hatley R.H.M., von Hollen D., Sandell D., Slator L. In-vitro Characterization of the OptiChamber Diamond valved holding chamber. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2014, 27(S1): 24-36.

* ***Tong, K. et al. An instrumented Valved Holding Chamber with facemask to measure application forces and flow in young asthmatic children. Journal of Aerosol Med and Pulm Drug Del. 2014; 27 (Suppl 1): S55-62.

* ***Tong, K. et al. An instrumented Valved Holding Chamber with facemask to measure application forces and flow in young asthmatic children. Journal of Aerosol Med and Pulm Drug Del. 2014; 27 (Suppl 1): S55-62.

* Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом

* РУ №ПЗН 2013/769 от 10.02.2017