

# PHILIPS

 Product Picture

Portables  
Schlaftherapiegerät

DreamStation Go

Uneingeschränkte Leistung für unterwegs

Einfache Anwendung

Mit einem Gewicht von nur gut 840 g

12-mm Micro Flex Schlauch

HH1507

## Innovative Schlaftherapie für unterwegs.

Dank des schlanken Designs müssen 1/3 weniger Komponenten mitgenommen werden als bei anderen Schlaftherapie-Reisegeräten\*. Dabei bietet die DreamStation Go dieselben Therapie- und Komfortfunktionen, denen bereits mehr als 5 Millionen Schlaftherapiepatienten weltweit vertrauen.

### **Entspricht den Vorschriften der FAA\***

- Für Flugreisen\*

### **Mit nur gut 840 g das leichteste Schlaftherapiegerät von Philips**

- Reise-Akku (separat erhältlich)

### **Der dünnste und leichteste Schlauch von Philips\*\***

- Micro-Flex Schlauch

### **Das kleinste Schlaftherapiegerät von Philips**

- Kompaktes Design
- Mit integriertem USB-Ladeanschluss
- Schnelle, einfache Einrichtung und intuitive Navigation

### **Speicherung von Daten für Ärzte und Klinikteam**

- Mit Philips DreamMapper kompatibel
- MicroSD-Karte separat erhältlich.
- Bluetooth ist bei allen Geräten Standard


# Besonderheiten

## Integriertes Netzteil



Die integrierte Stromversorgung erleichtert den Transport. Mit den Abmessungen von 15 cm x 15 cm x 5,8 cm (L x B x H) kann das leichte und kompakte Gerät sogar in einer kleinen Tasche untergebracht und so überall mitgeführt werden.

## Mit integriertem USB-Ladeanschluss

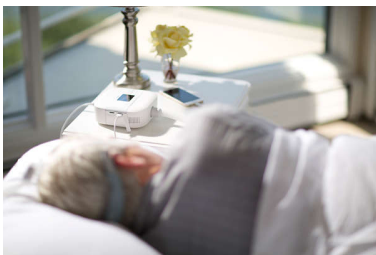

Zum einfachen Aufladen von Mobiltelefonen oder anderen Geräten, damit Sie die Steckdose für Lampen, Wecker usw. nutzen können. Ideal auf Reisen.

## Entspricht den Vorschriften der FAA



Um Sicherheitskontrollen an Flughäfen möglichst reibungslos verlaufen zu lassen, befindet sich auf der Unterseite der DreamStation Go ein Vermerk, dass es sich um ein medizinisches Gerät handelt, das für die Nutzung im Flugzeug geeignet ist. Das Gerät ist

flugtauglich, sofern es über eine Netzsteckdose oder einen Akku betrieben wird. Für Informationen zur Art der Stromversorgung an Bord wenden Sie sich bitte vor dem Abflug an die jeweilige Fluggesellschaft. Dieses Gerät bietet einen automatischen Höhenausgleich bis zu 2.286 Metern. Eine manuelle Einstellung ist nicht erforderlich.

## Intuitiver Touchscreen mit Farbdisplay



Über den intuitiven Farb-Touchscreen der DreamStation Go lassen sich die Geräteeinstellungen anpassen und Therapieinformationen anzeigen. Nutzen Sie unsere MyStart Funktion, mit der Sie den für Sie angenehmsten Anfangsdruck für die Auto-CPAP-Therapie einstellen können. Sollte sich der voreingestellte Luftdruck beim Schlafengehen zu hoch oder zu niedrig anfühlen, können Sie die MyStart Druckeinstellung nach oben oder unten korrigieren, um entspannt einschlafen zu können.

## Micro-Flex Schlauch



Der im Lieferumfang der DreamStation Go enthaltene neue 12-mm Micro-Flex Schlauch ist der kleinste und leichteste Schlauch, den Philips je angeboten hat. Er kann platzsparend verpackt werden, zeichnet sich durch mehr

Flexibilität und Bewegungsfreiheit aus und erhöht damit Ihren Schlafkomfort. Schneller und einfacher Anschluss am Gerät durch Klickverbindung und eine schlanke Verbindung zu unserer DreamWear Maske. Im Lieferumfang ist zudem ein 22-mm-ISO-Adapter für andere gängige Masken enthalten.

## Reise-Akku



Wenn Sie eine Reise planen, bei der die Stromversorgung nicht gesichert ist, erleichtert Ihnen der Reise-Akku der DreamStation Go die Einhaltung Ihrer Therapie. Die DreamStation Go lässt sich bei einer Druckeinstellung von 10 cm H<sub>2</sub>O ca. 13 Stunden\*\*\* lang über den Reise-Akku versorgen. Die Akkulaufzeit kann bei höheren CPAP-Druckeinstellungen, nicht richtig sitzender Maske, in Abhängigkeit von Höhe und Temperatur oder bei Ladegeräten mit USB-Anschluss oder anderen Umständen abweichen.

## Bluetooth



Damit können Sie Ihre Fortschritte am Heimtherapiegerät und dem tragbaren Schlaftherapiegerät verfolgen und überwachen.

# Daten

## Technische Daten

**Pressure range:** 4 to 20 cm H<sub>2</sub>O

**Pressure mode(s):** CPAP, APAP

**Flex pressure relief:** 1 to 3

**Flex modes:** C-Flex, C-Flex+, A-Flex

**Ramp time:** 0 to 45 min (5-min increments)

**Starting ramp pressure:** Patient adjustable,  
Smart Ramp

**Dimensions:** 15 cm L x 15 cm W x 5.8 cm H

**Weight:** 844 g (1.86 lb)

**Filters:** Reusable pollen

**Device setup:** Touchscreen color display

**Data storage capacity:** MicroSD card (optional),

On-board: <gt/> 1 year

**Compliance meter:** Breathing detection

**Altitude compensation:** Automatic

**Electrical requirements:** 100-240 VAC, 50/60  
Hz

## Bedienung

**Gewährleistung:** 2 years

