

PHILIPS

CPAP-maskin for
reise

DreamStation Go

Samme PAP-ytelse på farten

Lett å bruke

Veier mindre enn 1 kilo

HH1510




Høydepunkter

Innebygd strømforsyning



Innebygd strømforsyning reduserer antallet deler å bære. Med målene 15 cm L x 15 cm B x 5,8 cm H passer den lett og diskret i en liten pose, og den kan bæres hvor som helst. En lomme til maske og slange er inkludert i pakken.

Innebygd USB-ladeport

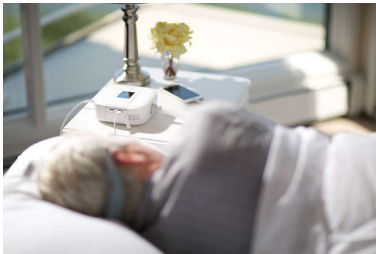

Gir enkel lading av mobiltelefoner eller andre enheter og har strømuttak tilgjengelig for lamper, alarmklokker osv. Passer for reiser.

Overholder FAA krav



For å gjøre det enkelt i sikkerhetssjekken på flyplasser er det en merknad på undersiden av enheten om at dette er medisinsk utstyr og

egnet for bruk ombord i fly. Enheten er egnet for bruk ombord i fly når det er i bruk med nettstrøm eller batteripakken. Ta kontakt med flyselskapet før avgang hvis du vil ha informasjon om strømkilden som er tilgjengelig på flyet. Denne enheten kompenseres automatisk for høyde opp til 7 500 fot. Ingen manuell justering er nødvendig.

Intuitiv berøringsskjerm i farger



Juster enhetsinnstillinger og vis lokal varmeterapiinformasjon med DreamStation Gos fargerike og intuitive berøringsskjerm. Dra nytte av vår MyStart-funksjon, som gir deg mulighet til å angi starttrykket for Auto CPAP-behandling som er mest komfortabelt for deg. Hvis standard luftrykk føles for høyt eller for lavt når du skal sove, kan du enkelt justere MyStart-trykket opp eller ned, slik at du kan sove mer komfortabelt.

Mikroflexibel slange



Inkludert med DreamStation Go er den nye 12 mm mikroflexible slangen Philips' minste og letteste vi noen gang har tilbudt. Den er enda

enkler å pakke og gir større fleksibilitet og bevegelsesfrihet mens du sover. Raske og enkle klikkoblinger på hver ende av slangen. Har en slank tilkobling til vår DreamWear-maske og omfatter en 22 mm ISO-adapter for andre masker.

Batteri som varer hele natten



Hvis du har tenkt å reise utenfor strømmettet, kan nattbatteriet til DreamStation Go bidra til at du fortsetter behandlingen din. DreamStation Go satt til 10 cm med trykk har vist seg å ha en gjennomsnittlig driftstid på 13 timer*** med nattbatteriet. Batteriets levetid kan variere på grunn av høyere CPAP-trykkinnstillinger, overdreven maskelekkasje, høyde over havet, temperatur, ladeenheter med USB-port og annet.

MicroSD-kort selges separat.



Mulighet til å lagre viktig data for leger og helsepersonell.

Spesifikasjoner

Service

Garanti: 2 years

Technical information

Flex-trykkavlastning: 1 til 3

Mål: 15 cm L x 15 cm B x 5,8 cm H

Filtre: Gjenbrukbar pollen

Datalagringskapasitet: MicroSD-kort (valgfritt),

Innebygd: <gt/> 1 år

Teknisk informasjon

Trykkområde: 4–20 cm H₂O

Trykkmodus/-modi: CPAP, APAP

Flex-modi: C-Flex, C-Flex+, A-Flex

Opptoppingstid: 0 til 45 min (5 min intervaller)

Starter opptoppingstrykk: Pasienten kan justere, smart opptopping

Vekt: 844 g (1,86 pund)

Enhetsoppsett: Berøringsskjerm med farger

Samsvarsmål: Pusteproblemer

Kompensasjon for høyde over havet: Automatisk

Krav til strøm: 100–240 V AC, 50/60 Hz



* Sammenlignet med HDM Z1- og Somnetics Transcend-enheter (2016).

** Sammenlignet med Philips 22 mm ytelsesslange.

*** Testbetingelser for PAP-driftstid: CPAP-modus, trykk 10 cm H₂O, 12 mm slange, 37 L/MIN lekkasje, 73,4 F rom i en høyde av 1650 meter.