

PHILIPS

Спейсер

OptiChamber Diamond

Адаптер надежно фиксирует ингалятор

Для детей в возрасте 0–18 месяцев

Для препаратов назначаемых при терапии

Компактная конструкция объемом 140 мл

НН1330



Создано для эффективной подачи препарата

Создано для эффективной подачи препарата

Спейсер OptiChamber Diamond обеспечивает подачу лекарственного препарата непосредственно в легкие пациента. Благодаря антистатическому материалу внутренней поверхности камеры аэрозоль дольше находится в ней, увеличивая время для вдоха*.

Комфорт

- Маска повторяет контуры лица и имеет удобную форму
- Универсальный мундштук

Повышение эффективности терапия

- Подача препарата в легкие пациента**

Создано для эффективной работы

- Специальные функции облегчают процесс использования и обслуживания
- Клапаны с низким сопротивлением облегчают дыхание
- Использование антистатического материала в спейсере увеличивает время для вдоха

Для часто назначаемых препаратов

- Для часто назначаемых препаратов

Особенности

Позволяет дышать свободнее

Low resistance valves



Спейсер оснащен клапанами с низким сопротивлением, которые беспрепятственно открываются, даже при низкой скорости вдоха у детей, облегчая дыхание ребенка или взрослого человека*.

Комфортная терапия




Сменная маска LiteTouch имеет мягкое покрытие, удобно прилегающее к лицу, обеспечивая комфорт при проведении терапии. А вставка SoftTouch гарантирует герметичность и уменьшает объем утечек лекарства***.

Совместимость



Спейсер OptiChamber Diamond предназначен для распыления часто назначаемых ингаляционных препаратов.

Простота использования и обслуживания

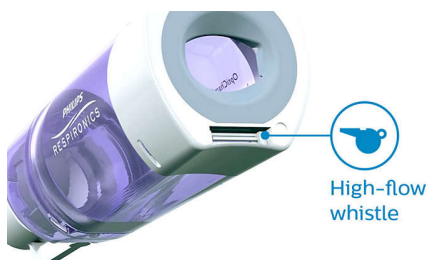

Адаптер надежно фиксирует ингалятор, а встроенный свисток сигнализирует о слишком быстром дыхании. Мундштук и адаптер легко снимаются для выполнения чистки.

Для взрослых и детей



Благодаря многоступенчатому дизайну мундштука спейсер OptiChamber Diamond может использоваться как детьми, так и взрослыми.

Подача препарата непосредственно в легкие пациента



Спейсер OptiChamber Diamond создан для улучшенной подачи аэрозольного препарата в легкие пациента, а также обеспечения максимальной эффективности применяемой ингаляционной терапии.

Время для вдоха



Устройство OptiChamber Diamond обеспечивает подачу медицинского препарата в легкие пациента. Благодаря антистатическому материалу внутренней поверхности спейсера аэрозоль дольше находится в камере, увеличивая время для вдоха*.

Характеристики

Дизайн

Легко использовать: Achieve an effective treatment

Обслуживание

Очистка: Warm water and liquid soap

Данные срока службы: Replace after one year

Содержимое упаковки

Включает: Small LiteTouch Mask, OptiChamber Diamond

Сведения о продукте

Длина: 14.2 cm (5.6")

Загубник: Interfaces w 22 mm connectors

Громкость: 140 ml

Используется с небулайзером: Children aged 1-5yr

Материал

Камера: АБС-пластик

Маска LiteTouch: Полиэтилентерефталат (ПЭТ), силикон

Клапаны: Silicone

