

# PHILIPS

 Product Picture

Warmluftbefeuchter

DreamStation Go

Einer der kompaktesten  
Reisebefeuchter<sup>1</sup>

Mit Leitungs- oder abgefülltem  
Wasser<sup>3</sup>

Wassersparende Technologie

Mit allen beliebigen Masken  
kompatibel<sup>2</sup>

HH1531/04

## Intelligente Warmluftbefeuchtung für die ganze Nacht

Sie müssen unterwegs nicht auf den Komfort der Warmluft-Befeuchtung verzichten. Mit wassersparender Technologie, der praktischen Möglichkeit zur Verwendung von Leitungswasser und einem kompakten Design können Sie die Warmluft-Befeuchtung auch auf Ihren Reisen genießen.

### **Warmluftbefeuchter**


- Verwenden Sie Ihre Lieblingsmaske
- Verwendung auch mit Leitungswasser<sup>3</sup>
- Gleichmäßiger Wasserverbrauch für komfortablen Schlaf
- Intelligent gesteuerte Warmluftbefeuchtung
- Einfacher Transport durch leichtes und kompaktes Design

# Besonderheiten

## Leichtes Design

Mit dem DreamStation Go Warmluftbefeuchter ist das Koffer packen ein Kinderspiel. Als einer der kompaktesten Reise-Warmluftbefeuchter unter den führenden PAP-Marken<sup>5</sup> kann er problemlos auf Reisen zu Land, Wasser oder in der Luft mitgenommen werden.

## Verwendung auch mit Leitungswasser<sup>3</sup>

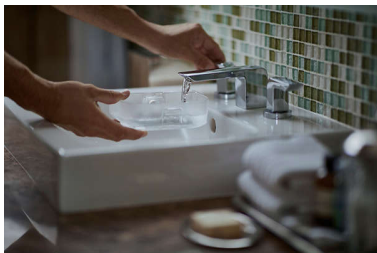

Dank der Möglichkeit zur Nutzung von Leitungs-, abgefülltem oder destilliertem Wasser<sup>3</sup> ist es mit dem DreamStation Go Warmluftbefeuchter nicht mehr notwendig, sperrige und schwere Wasserkanister mitzunehmen oder am Reiseziel destilliertes Wasser zu besorgen. So können Sie ohne schweres Gepäck verreisen und dennoch den gleichen Komfort wie bei der Warmluftbefeuchtung zuhause genießen.

## Intelligent gesteuerte Warmluftbefeuchtung

Die wassersparende Technologie der DreamStation Go ermöglicht durch aktive Messung der Umgebungsdaten und Therapieeinstellungen eine automatische Anpassung der Feuchtigkeitszufuhr. Bei aktivierter Zielzeit ist die Warmluftbefeuchtung<sup>4</sup> dadurch die ganze Nacht möglich. Und falls Sie den Befeuchter einmal nicht ausreichend füllen oder das Auffüllen vergessen, verhindert die

Ausschaltfunktion unserer Heizplatten, dass Ihnen die restliche Nacht unangenehm trockene Luft zugeführt wird.

## Wassersparende Technologie



Der DreamStation Go Warmluftbefeuchter passt sich unterschiedlichen Umgebungsbedingungen an, sodass die ganze Nacht lang eine gleichmäßige Befeuchtung erfolgt.<sup>4</sup> Wohin Sie Ihre Reise auch führt – Sie können dort den gleichen erholsamen Schlaf genießen, den Sie von zuhause gewohnt sind.

## Mit allen Masken kompatibel



Wenn Sie eine Maske gefunden haben, mit der Sie sich wohl fühlen, möchten Sie auf Reisen natürlich nicht zu einer anderen Maske wechseln. Der DreamStation Go Warmluftbefeuchter kann mit allen von Ihnen bevorzugten Maskenmodellen verwendet werden, damit Sie auch unterwegs die Vorteile der Warmluftbefeuchtung mit Ihrer eigenen Maske genießen können.<sup>2</sup>

# Daten

## Befeuchter – Details

**Größe:** 14,7 cm x 5,9 cm x 15,1 cm

**Gewicht:** 344,7 g

**Kapazität:** 240 ml

**Schlauchkapazität:** Mikro-flexibler 12-mm-/15-mm-Schlauch oder Standard 22-mm-Schlauch

**Wasserkapazität:** Destilliertes, abgefülltes\* und Leitungswasser

**Humidifier usage while on Battery power:** Nein

**Garantie:** 2 Jahre



\* 1. Im Vergleich zu Transcend, HDM Z1, AirMini (bietet keinen Warmluftbefeuchter an), Devilbiss

\* 2. Die DreamStation Go ist mit einem Universaladapter ausgestattet, der für alle Standardanschlüsse mit 22 mm AD geeignet ist.

\* 3. In Regionen mit sehr hartem Wasser wird die Verwendung von destilliertem oder abgefülltem Wasser empfohlen.

\* 4. Passt die Feuchtigkeitsabgabe an, wenn die Zielzeit für die Wassereinsparung aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

\* 5. Im Vergleich zu ResMed AirSense, AirStart; Devilbiss IntelliPAP 1 und IntelliPAP 2; Fisher & Paykel – SleepStyle, Icon