

PHILIPS

Uppvärmad
luftfuktare

inklusive en vattenkammare

HH1414



Gör det bekvämare för dig

Genomtänkt innovation

Denna monterbara luftfuktare som är lätt att använda och hantera avger fukt medan du sover. En uppvärmd slang kan anslutas för att bibehålla värmen av behandlingsluften medan luften färdas genom slangen till masken

Komfort genom optimering av luftfuktighetsnivåer

- Anpassningsläge

Dry Box-teknik

- Minskar risken för vattenskador

Användarvänlig design

- Utformad för att göra daglig användning enkel

Funktioner

Dry Box-teknik



Isolerar vatten från enheten: om vatten skulle läcka från vattenbehållaren är Dry Box utformad för att fånga upp vattnet innanför enhetens väggar och förhindra att vatten tar sig igenom enheten och luftfuktaranlutningen.


Luftfuktningsoptimering



Kan ställas in på fast värme som standard – för att bibehålla en och samma uppvärmningsnivå hela natten – eller på anpassningsläge, så att

enheten kan övervaka omgivningens temperatur, luftfuktigheten och patientflödet och ställa in uppvärmningsnivån efter behov.

Enkel luftfuktare

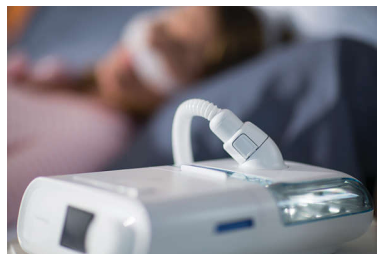

Toppmonterad vridbar slanganslutning som kan roteras 180° för att ge rörelsefrihet. Kompatibel med 22 millimeters eller 15 millimeters slang eller 15 millimeters uppvärmd slang. Enkel åtkomst till vattenbehållaren i en del för påfyllning och rengöring. Kapacitet för förvärmning.

Service

Garanti: 2 years

Compatibility

Slangalternativ: 22 eller 15 mm

Mått

Höjd: 17,78

Bredd: 14,61

Dimensions

Djup: 8,26 cm

Design

Löstagbar luftfuktare: Går att ta isär vid resa

Luftfuktare och vattenkammare: Förbättrad komfort

Förenklad design: Enkel åtkomst till vattenkammaren

Toppmonterat slangutlopp: Kan roteras 180° för fri rörlighet

