

PHILIPS

Nesemaske

DreamWisp

Slanger for plassering øverst på hodet

Pute for automatisk forsegling

Hodestopp som er enkel å feste

Stor pute, middels rammeledd

HH1144/03



Sove komfortabelt i hver sving

Ved å kombinere DreamWears rørdesign som skal sitte øverst på hodet, med Wisps nesepute med minimal kontakt, gir DreamWisp deg frihet til å sove i enhver posisjon hele natten.

Minimalt antall deler

- En ønsket tilpasning med minimalt antall deler
- Enkel å feste, enkel å justere

Magnetiske klemmer

- Hodestroppklemmene og maskeputen inneholder magneter

Uhindret synsfelt

- Les, se på TV eller bruk briller

Bevegelsesfrihet

- Sov i enhver posisjon

Behagelig og enkel å bruke

- Puten med komfort og trygghet

Høydepunkter

Sov i enhver posisjon




Med sin revolusjonerende maskedesign som sitter øverst på hodet, gir DreamWisp større bevegelsesfrihet ved å holde slangene unna. Du kan endre sovestillinger gjennom hele natten, enten du vil ligge på siden, på ryggen eller på magen. Brukere uttalte at de var fornøyd med hvor godt masken holdt seg på plass mens de sov.

Magnetiske klemmer

Ta kontakt med helsepersonell før du bruker denne masken. Enkelte medisinske apparater kan bli påvirket av magnetiske felt. De magnetiske klemmene i denne masken må holdes minst 50 mm (2 tommer) unna alle aktive medisinske apparater, spesielt implanterte enheter som pacemakere, defibrillatorer og cochleaimplantater. Les brukerhåndbøkene i pakken for mer informasjon.

Utformet med minimalt antall deler

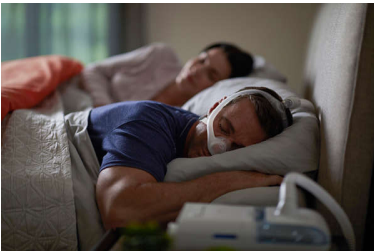

Hodestroppen til DreamWisp er utformet for å fungere med eksepsjonell komfort. Den firepunkts hodestroppen er utformet for å gi stabilitet med færre deler, mens den myke, lette rammen også fungerer som DreamWisps luftstrømkanal. Dette betyr at færre komponenter kommer i kontakt med deg mens du sover, slik at du får behagelig terapi hver natt og hele natten gjennom.

Magnetiske klemmer




Hjelper deg med å opprettholde søvnbehandlingen ved å gjøre det så praktisk som mulig. DreamWisp har magnetiske klips som er raske og enkle å sette på eller ta av. Dette gjør det enkelt å ta masken på eller av når som helst. Brukere uttalte at de er mest fornøyd med hvor lett det er å bruke DreamWisp-masken.

Wisps-puten



DreamWisp kombinerer ytelsen til en nesemaske med en minimalt invasiv design, en eksepsjonell tetning og komforten til Wisps puteteknologi. Pasienter er mer fornøyd med hvor godt masken opprettholder en tetning under bruk.

Uhindret synsfelt

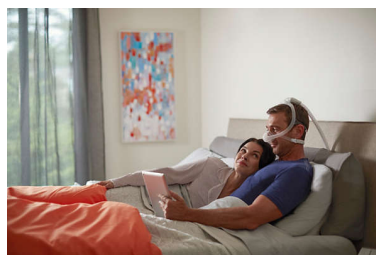

Den unike slangeutformingen som sitter øverst på hodet, gir deg et klart synsfelt. Med DreamWisp kan du lese, surfe på Internett eller se på TV mens du gjør deg klar til å sove.

Spesifikasjoner

Produktdetaljer

Materialer: Silikon
Materialer: Polykarbonat
Materialer: Polyuretanskum
Materials: Nylon
Materials: Spandex
Materials: Polyester
Materials: Magnet (Acetal)
Garanti: 90 dager
Operating pressure: 4–30 cmH₂O
Sound level: 18,7 dbA

Erstatning

Inspect for daily wear: Bytt ved første tegn til slitasje

Tiltenkt bruk

To be used on patients (<gt/>66 lbs/30kg): som har fått foreskrevet CPAP-behandling

Advarsel: Magnetisk interferens

Beware with pacemakers: Les brukerhåndbøkene før bruk

Kalibreringsdata

Vaskes for hånd med mildt rengjøringsmiddel: Skyll grundig, heng til tork eller lufttork

