

PHILIPS



IPL-
hårfjerningsenhet

Lumea IPL 7000
Series

5 innstillinger for manuell
intensitet

3 vedlegg: Kropp, ansikt, bikini

Lumea IPL-app

Bruk med ledning



SC1999/00

Flotte resultater, flott verdi

Glatt og hårfri hud i tolv måneder*

Få hårfri, glatt hud med vår Lumea IPL 7000-serie. Behandlingene er skånsomme og effektive med tilbehør for hvert kroppsområde.

Skånsom og effektiv for langvarig glatt hud

- Raske resultater med behandlinger bare annenhver uke
- Utviklet i samarbeid med dermatologer for å være enkel og effektiv
- Ekstra lang kabel for ekstra fleksibilitet under behandling

Full løsning for ansikt og kropp

- Komplett løsning for ansikt og kropp med 3 tilbehør
- Passer for et bredt spekter av hudtoner og hårfarger

Personlig tilpasset behandling med IPL-hårfjerning

- Hudtonesensor og 5 intensitetsinnstillinger
- Optimaliser behandlingen med Philips Lumea IPL-appen

Lumea IPL 7000 Series

IPL-hårfjerningsenhet

SC1999/00

Høydepunkter

2 ganger i måneden for raske resultater



Kom i gang med den første fasen med fire behandlinger annenhver uke – halvparten så mange behandlinger som med andre merker. Deretter frisker du opp månedlig for å opprettholde resultatene.

Hudtonesensor



Velg mellom 5 intensitetsinnstillinger for en behagelig opplevelse. Hudtonesensoren hindrer deg i å behandle områder av huden din som er for mørk for IPL-behandling.

Ekstra lang kabel




Den er praktisk å bruke takket være den ekstra lange kabelen, som gir enkel tilgang og forbedret manøvrerbarhet.

3 dedikerte tilbehør



Forskjellige hoder for kropp, ansikt og bikinilinen arbeider med hastighet og presisjon for skånsom bruk, selv på sensitive områder. Ansiktstilbehøret har et integrert lysfilter for nøyaktig behandling.


Utviklet sammen med hudspesialister

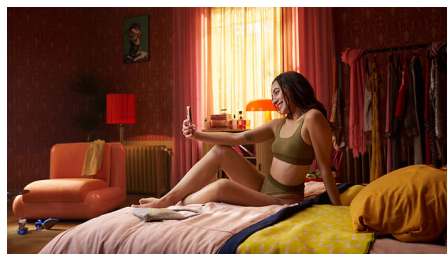

Som leder innen helseteknologi utviklet Philips Lumea IPL i samråd med dermatologer, slik at du enkelt, effektivt og trygt kan bruke den hjemme.

Lumea IPL er basert på teknologi som brukes i profesjonelle salonger, og den gir skånsom behandling selv på sensitive områder.

Philips Lumea IPL-appen

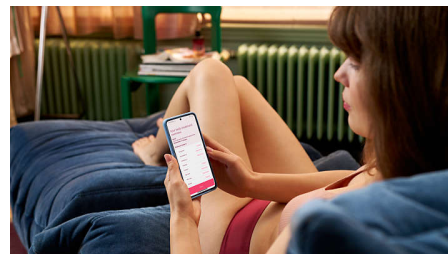

Vår gratis veiledningsapp hjelper deg med å planlegge og følge behandlingsplanen. Deretter fører den deg gjennom hvert trinn i økten. Appen har blitt lastet ned av mer enn 2,1 millioner brukere.

For mange hud- og hårtyper

Suitable skin tones



Suitable body hair colors



IPL trenger kontrast mellom pigmentet i hårfargen og pigmentet i hudtonen, og den fungerer derfor på naturlig mørkt blondt, brunt og svart hår og på hudtoner fra lys til middels brun (I-IV).

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner for tilbehøret

Tilbehør til kropp: Vindusstørrelse: 4,0 cm², Behandling for kroppen: Ben, armer, mage og armhuler

Tilbehør til ansikt: Vindusstørrelse: 2 cm², ekstra filter, Behandling for ansikt: Overleppe, hake og kjeve

Tilbehør til bikinilinen: Vindusstørrelse: 2 cm², Behandling for bikinilinen

Sikkerhet og justerbare innstillinger

Integrert UV-filter: Beskytter huden mot UV-stråler

Fem lysenergiinnstillinger: Kan tilpasses til hudtypen din

Integrert sikkerhetssystem: Forhindrer utilsiktet blinking

Programmodus

Glidende lysglimt: For rask bruk

Trykk og flash: For behandling på små områder

Kan brukes med og uten ledning: Bruk med ledning

Drift

Bruk med ledning

Tekniske spesifikasjoner

Lampe med høy ytelse: Laget for lang levetid, 250 000 lysglimt, tilsvarende 20 års levetid for lampen**

Spenning: 100–240 V

Consumer Trade Item

Height: 19 cm

Width: 26.6 cm

Length: 12 cm

Net weight: 0.781 kg

Gross weight: 1.091 kg

GTIN: 8710103835868

Country of origin: HU

Harmonized system code: 85437090

Pappkartong

Height: 28 cm

Width: 24.8 cm

Length: 19.7 cm

Net weight: 1.562 kg

Gross weight: 2.34 kg

GTIN: 18710103835865

Tilbehør

Presisjonstilbehør (2 cm²): For sikker bruk i ansiktet

Kroppstilbehør (4 cm²): For bruk nedenfor

halsen

Bikininiljetilbehør (2 cm²): Spesialbehandling bikinilinjehår

Service

Garanti: 2 års global garanti + 1 ekstra garantiår ved registrering av produktet innen 90 dager

Pallet Layer

Height: 28 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Deler som medfølger

Bruerveiledning: Brukerhåndbok

Lagring: Sminkeveske

Adapter: 24 V -/ 1500 mA

Tilbehør: Renseklut

Påføringstid

Bikininilnje: 4 min

Legg: 15 min

Armhulene: 2,5 min

Bikininilnje: 4 min

Ansiktsområder: to minutter

