

# PHILIPS

IPL - långvarig  
hårborttagning

Lumea Prestige

Hårfri hud i upp till 8 veckor

Undvik stickig utväxt och  
irriterad hud

Stort behandlingsfönster 4 cm<sup>2</sup>

SC2009/00




# Funktioner

## IPL-teknik



Philips Lumea använder en innovativ ljusbaserad teknik som kallas IPL (Intense Pulsed Light) och har utvecklats från teknik som används i professionella skönhetsalonger. Philips har anpassat tekniken för säkert och effektivt hemmabruk. Philips har haft ett nära samarbete med ledande dermatologer för att utveckla det här banbrytande hårborttagningssystemet. I över 10 år har vi gjort utförliga kundundersökningar med mer än 2 000 frivilliga.

## Len hud varje dag

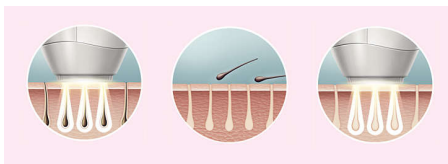

Philips Lumea avger lätta ljuspulser mot hårrötterna. Detta leder till att mängden hår som växer på kroppen gradvis minskar. Upprepa behandlingen för att göra din hud vackert hårfri och silkeslent slät.

## Effektivt utan ansträngning

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Våra kliniska studier visar en betydande hårminskning redan efter fyra behandlingar varannan vecka. Behandlingen ger dig en len och hårfri hud. För att bibehålla resultatet upprepar du bara behandlingen vid behov.

Behandlingsintervallet kan bero på hur snabb din naturliga hårväxt är. – Du kan förstora bilden genom att klicka på den i bildgalleriet längst upp på den här sidan.

## Lämpliga hår- och hudtyper



Philips Lumea fungerar effektivt på (naturligt) mörkblont, brunt och svart hår. Som med andra ljusbaserade behandlingar fungerar Philips Lumea INTE på rött, ljusblont eller vitt/grått hår. Philips Lumea lämpar sig heller INTE för mycket mörk hud.

## Tillämpningsområden



Den kan tryggt användas för hårborttagning på ansikte (överläpp, haka och polisonger) och kroppsdelar, inklusive ben, underarmar, bikinilinj, mage och armar.

## Snabb behandling på ben



Stort behandlingsfönster för snabb behandling på större områden, till exempel benen.

## Extra säkerhet för ansiktet



Ansiktstillbehör har sitt eget specialutformade inbyggda ljusfilter för säker och bekväm användning på överläppen, hakan och polisongerna. Det kan även användas på andra känsliga områden på kroppen, till exempel armhålor och andra svåråtkomliga ställen.

## Tillbehör för bikiniområdet



Tillbehör för bikiniområdet för effektiv behandling av hår i bikinilinj. Hår i det här området blir normalt kraftigare och tjockare än hår på benen.

## Skonsam behandling



Skonsam mot huden.

# Specifikationer

## Effekt

Spänning: 100–240 V

## Service

Garanti: 2 års global garanti

## Tekniska specifikationer

Lampa med höga prestanda: Producerar >250 000 ljuspulser

## Tillämpningsområden

Områden på kroppen: Armar, Ben, Mage, Bikini, Under armarna

Områden i ansiktet: Haka, Polisonger, Överläpp

## Tillbehör

Tillbehör för kroppsbehandling (4cm<sup>2</sup>): För användning nedanför halsen

Tillbehör för bikiniområdet (2 cm<sup>2</sup>): Särskild behandling hår i bikinilinjén

## Attachments

Ansiktstillbehör (2 cm<sup>2</sup>): För säker användning på ansiktet

## Medföljande tillbehör

Laddare: Flerspänningsladdare

Bruksanvisning: Användarhandbok

Förvaring: Lyxigt fodral

Tillbehör: Rengöringsduk

## Power

Laddningstid: 100 min.

Körtid: Minimum 370 ljussignaler

## Säkerhetsinställning och justerbara inställningar

Integrerat UV-filtrer: Skyddar din hud från UV-ljus

5 ljusenergiinställningar: Justerbar för din

hudtyp

Integrerat säkerhetssystem: Förhindrar oavsiktliga ljussignaler

## Användningstid

Underben: 8 min

Armhåla: 1 min

Bikinilinjé: 1 min

Områden i ansiktet: 1 min

## Programläge

Dra och skicka ljuspuls: För bekväm behandling

Användning med eller utan sladd: Trådlös

Tryck och skicka ljuspuls: För behandling på kurviga områden

