

PHILIPS

IPL Lichtontharing

Lumea Advanced

Voor lichaam, gezicht en
bikinilijn

Behandeling onderbenen in 15
minuten

> 250.000 lichtflitsen

SC1999/00




Kenmerken

IPL technologie



Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingssysteem heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande dermatologen. Ruim tien jaar lang hebben we uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met behulp van 2000 vrijwilligers.

Elke dag een zijdezachte huid

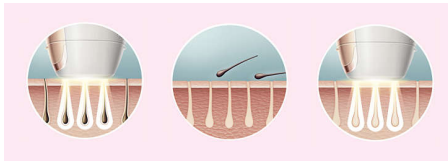


Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsjes naar de haarwortel. Als gevolg hiervan neemt de hoeveelheid haar die teruggroeit geleidelijk af. Door herhaling van de behandeling wordt uw huid prachtig haarvrij en voelbaar glad.

Moeiteloos en effectief

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)

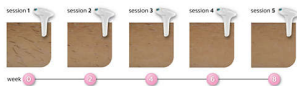

Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts vier behandelingen elke twee weken. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts wanneer nodig te

herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar teruggroeit. - U kunt deze afbeelding vergroten door boven aan deze pagina op de afbeelding te klikken in de fotogalerij

Geschikte haar- en huidtypen



Philips Lumea werkt effectief op (natuurlijk) donkerblond, bruin en zwart haar. Net als met andere behandelingen op basis van licht, is Philips Lumea NIET geschikt voor rood, lichtblond of wit/grijs haar. Ook is dit product NIET geschikt voor een donkere huid.

Toepassingsgebieden



Ideaal voor het verwijderen van haar op het gezicht (bovenlip, kin en bakkebaarden) en lichaamsdelen zoals benen, oksels, de bikinilijn, buik en armen.

Snelle behandeling van benen



Groot behandelvenster voor snelle toepassing op grote gebieden, zoals de benen.

Extra veiligheid voor het gezicht



Met het extra geïntegreerde lichtfilter kan het worden gebruikt voor veilige behandeling van gezichtshaar op de bovenlip, kin, wangen en andere gevoelige gebieden.

Hulpstuk voor bikinilijn



Bikinilijnhulpstuk voor doeltreffende behandeling van de bikinilijn. Haar in dit gebied is doorgaans sterker en dikker dan haar op de benen.

Skin Tone-sensor



De geïntegreerde huidtintsensor meet de behandelde huidskleur aan het begin van elke sessie en van tijd tot tijd tijdens de sessie. Als deze een huidtint detecteert die te donker is voor dit product, worden de pulsen automatisch gestopt.

Specificaties

Vermogen

Spanning: 100 - 240 V

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie

Technische specificaties

Lamp met hoge prestaties: Kan meer dan 250.000 pulsen afgeven

Toepassingsgebieden

Lichaamsdelen: Armen, Benen, Buik, Bikini, Oksels

Delen van het gezicht: Kin, Bakkebaarden, Bovenlip

Accessoires

Precisiehulpstuk (2 cm²): Voor veilig gebruik op het gezicht

Lichaamsopzetstuk (4 cm²): Voor gebruik onder de neklijn

Attachments

Hulpstuk voor bikinilijn (2 cm²): Speciale behandeling voor bikinilijn

Meegeleverde artikelen

Gebruiksaanwijzing: Gebruiksaanwijzing

Opbergen: Etui

Adapter: 24 V / 1500 mA

Accessoire: Schoonmaakdoekje

Vermogen

Gebruik met snoer

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Beschermt uw huid tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Huidtintsensor: Detecteert uw huidtint

Behandeltijd

Bikini: 4 minuten

Onderbeen: 8 min.

Oksel: 1 min

Delen van het gezicht: 2 min.

Toepassingsmodus

Glij- en flitsmodus: voor eenvoudig gebruik

Met of zonder snoer te gebruiken: Met snoer

Stap en Flits: Voor behandeling van lichaamscontouren

