

PHILIPS

IPL Lichtontharing

Lumea IPL 7000 Series

5 handmatige intensiteitsinstellingen

2 opzetstukken: lichaam, gezicht

Lumea IPL-app

Gebruik met snoer

SC1997/00



Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid

Geniet 12 maanden lang van een haarloze, gladde huid*

Het Philips Lumea Advanced IPL lichtontharingsapparaat voorkomt teruggroei van haar op het lichaam, gezicht en bikinilijn. Zachte lichtpulsen zorgen bij regelmatig gebruik tot wel 2 maanden lang een zijdezachte huid. Lumea Advanced biedt een handige oplossing voor langdurig ontharen van lichaam en gezicht. Bereik tot wel 75% haarvermindering na slechts 3 behandelingen. ** Philips Lumea is speciaal ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor thuisgebruik.

Zacht en effectief voor een langdurig gladde huid

- Snel resultaat met slechts 1 behandeling per 2 weken.
- Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor gemak en effectiviteit
- Extra lange kabel voor extra flexibiliteit tijdens behandelingen

Volledige oplossing voor gezicht en lichaam

- Volledige oplossing voor gezicht met 2 slimme opzetstukken
- Geschikt voor een breed scala aan huidtinten en haarkleuren

Gepersonaliseerde IPL ontharingsbehandeling

- Skin Tone-sensor en 5 intensiteitsinstellingen
- Optimaliseer uw routine met de Philips Lumea IPL-app


Kenmerken

2x per maand voor snelle resultaten




De eerste fase bestaat uit 4 behandelingen om de 2 weken – dat is de helft van het aantal dat u bij andere merken nodig hebt.

Skin Tone-sensor

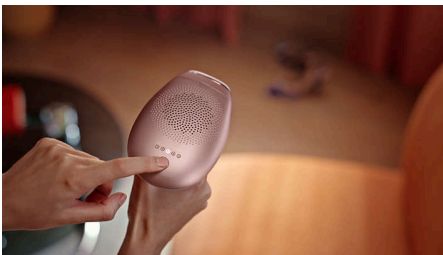

Kies uit 5 intensiteitsinstellingen voor een comfortabele ervaring. De Skin Tone-sensor zorgt dat u geen delen van uw huid behandelt die te donker zijn voor IPL-behandeling.

Extra lange kabel

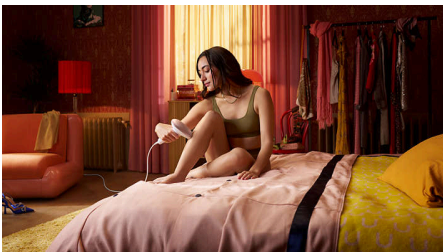


Handig in gebruik dankzij een extra lange kabel voor eenvoudige toegang en verbeterde beweegbaarheid.

2 speciale opzetstukken




Verschillende koppen voor lichaam en gezicht werken met snelheid en precisie voor zacht gebruik, zelfs op gevoelige gebieden. Het opzetstuk voor gezicht heeft een geïntegreerd lichtfilter voor nauwkeurige behandeling.

Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen

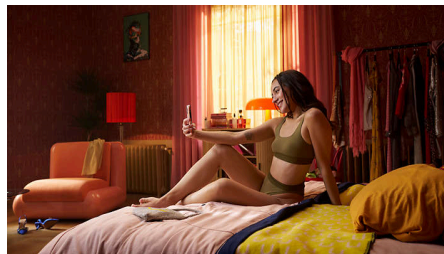

Als leider op het gebied van gezondheidstechnologie heeft Philips Lumea IPL ontwikkeld in overleg met dermatologen, voor eenvoudig en effectief gebruik in de veiligheid van uw huis. Lumea IPL is afgeleid van technologie die in professionele salons wordt gebruikt en biedt een zachte behandeling, zelfs op gevoelige gebieden.

Philips Lumea IPL-app

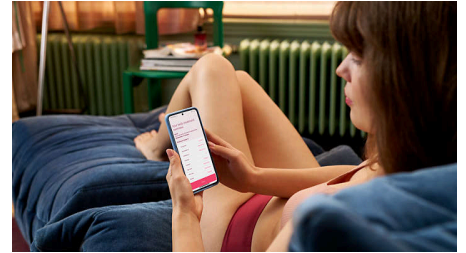

Onze gratis coaching-app helpt u met het plannen en vasthouden van uw behandelingschema, en leidt u stapsgewijs door iedere sessie. Door meer dan 2,1 miljoen gebruikers gedownload.

Voor veel huid- en haartypes



IPL heeft contrast nodig tussen de pigmenten in de haarkleur en de huidtint en werkt daardoor op natuurlijk donkerblond, bruin en zwart haar en op huidtinten van licht tot gemiddeld bruin (I-IV).

Specificaties

Technische specificaties hulpstukken

Hulpstuk voor lichaam: Venstergrootte: 4,0 cm², Behandeling voor lichaam: benen, armen, buik en onderarmen

Hulpstuk voor het gezicht: Venstergrootte: 2 cm², extra filter, Behandeling voor gezicht: bovenlip, kin en kaaklijn

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Bescherm uw huid tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Toepassingsmodus

Glij- en flitsmodus: Voor snelle toepassing

Stap en Flits: Voor behandeling op kleine zones

Met of zonder snoer te gebruiken: Gebruik met snoer

Vermogen

Gebruik met snoer

Technische specificaties

Lamp met hoge prestaties: Duurzaam, 250.000 pulsen, gelijk aan een levensduur voor de lamp van 20 jaar**

Spanning: 100-240 V

Accessoires

Precisiehulpstuk (2 cm²): Voor veilig gebruik op het gezicht

Lichaamsopzetstuk (4 cm²): Voor gebruik onder de neklijn

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie plus 1 jaar extra garantie bij productregistratie binnen 90 dagen

Meegeleverde artikelen

Instructies voor gebruik: Gebruiksaanwijzing

Opbergen: Opbergetui

Adapter: 24 V / 1500 mA

Accessoire: Schoonmaakdoekje

Behandeltijd

Onderbeen: 15 min.

Oksels: 2,5 min.

Bikinilijn: 4 min.

Delen van het gezicht: 2 min.

