

# PHILIPS

Dispositivo IPL para  
depilação

Lumea Prestige

Para utilização em rosto e  
corpo

15 minutos para tratar meia  
perna

>250 000 impulsos de luz

SC2007/00




# Destaques

## Tecnologia IPL



O sistema Philips Lumea utiliza uma tecnologia inovadora à base de luz denominada IPL (Luz Pulsada Intensa), desenvolvida a partir da tecnologia utilizada em salões de estética profissionais. A Philips adaptou esta tecnologia para ser utilizada de forma segura e eficaz, no conforto da sua casa. A Philips trabalhou em estreita colaboração com os melhores dermatologistas para desenvolver o nosso sistema de depilação inovador. Durante mais de 10 anos, efectuámos uma extensa pesquisa do consumidor com mais de 2000 voluntários.

## Tenha uma pele suave todos os dias

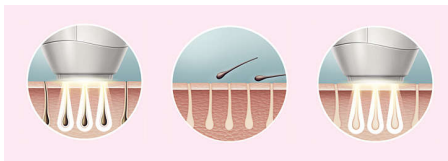

O sistema Philips Lumea aplica suaves impulsos de luz na raiz do pêlo. Consequentemente, diminui gradualmente a quantidade de pêlos que crescem no seu corpo. A repetição do tratamento deixa a sua pele sem pêlos e maravilhosamente suave.

## Eficácia sem esforço



Os nossos estudos clínicos demonstraram uma redução significativa dos pêlos com apenas quatro tratamentos quinzenais, obtendo uma pele macia sem pêlos. Para manter estes resultados, basta repetir o tratamento quando

necessário. O intervalo entre os tratamentos pode variar dependendo do crescimento dos seus pêlos. Para aumentar esta imagem, clique na mesma na galeria de imagens na parte superior desta página

## Tipos de pêlo e pele adequados




O sistema Philips Lumea tem um desempenho eficaz em pêlos louros escuros, castanhos e pretos (naturais). Tal como os outros tratamentos à base de luz, o sistema Philips Lumea NÃO é eficaz em pêlos ruivos, louros claros e brancos/grisalhos. O sistema Philips Lumea também NÃO é adequado para peles muito escuras.

## Zonas de aplicação



Utilize um método fiável para eliminar pêlos no rosto (buço, queixo, patilhas) e noutras zonas corporais, incluindo pernas, axilas, linha do biquíni, barriga e braços.

## Tratamento rápido das pernas

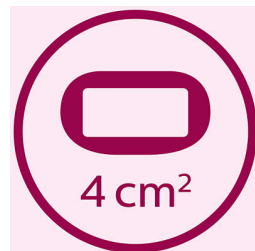

Janela de tratamento grande para aplicação rápida em zonas grandes, como as pernas.

## Maior segurança para o rosto




O acessório de precisão está equipado com um filtro de luz integrado extra e permite uma aplicação segura e cómoda no buço, queixo e patilhas. Este também pode ser utilizado noutras zonas corporais sensíveis, como as axilas, a linha do biquíni e áreas difíceis de alcançar.

## Tratamento delicado



Suave para a sua pele.

## Comodidade sem fios

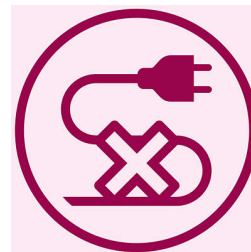

O design exclusivo sem fios do sistema Lumea é perfeito para alcance e facilidade de utilização máximos.

# Especificações

## Alimentação elétrica

Voltagem: 100-240 V

## Assistência

Garantia: 2 anos de garantia global

## Especificações técnicas

Lâmpada de alto desempenho: Proporciona <gt/> 250 000 impulsos de luz

## Zonas de aplicação

Zonas do corpo: Braços, Pernas, Barriga, Biquíni, Axilas

Zonas do rosto: Queixo, Patilhas, Buço

## Acessórios

Acessório de precisão (2 cm<sup>2</sup>): Para aplicação segura no rosto

Acessório corporal (4 cm<sup>2</sup>): Para utilizar abaixo da linha do pescoço

## Itens incluídos

Instruções de utilização: Manual do utilizador

Carregador: Carregador multitenção

Armazenamento: Bolsa de luxo

Acessório: Pano de limpeza

## Power

Tempo de carga: 100 min.

Tempo de utilização: No mínimo, 370 impulsos de luz

## Definições ajustáveis e de segurança

Filtro UV integrado: Protege a pele dos raios UV

5 definições de corrente de luz: Ajustável ao seu tipo de pele

Sistema de segurança integrado: Evitar impulsos de luz acidentais

## Tempo de aplicação

Parte inferior da perna: 8 min

Axila: 1 min.

Linha do biquíni: 1 min.

Zonas do rosto: 1 min.

## Modo de aplicação

Deslizar e pulsar: Para uma aplicação cómoda

Utilização com/sem fios: Sem fios

Marcar e pulsar: Para tratamento em áreas com contornos

