

# PHILIPS

IPL-  
ontharingsapparaat

Lumea IPL 7000  
Series

5 handmatige  
intensiteitsinstellingen

1 opzetstuk: lichaam

Lumea IPL-app

Gebruik met snoer



BRI920/00



## Geweldige resultaten, waar voor uw geld

Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid\*

Krijg een haarvrije, gladde huid met onze Lumea IPL 7000-serie. Zachte en effectieve behandelingen met een opzetstuk voor het lichaam.

### Zacht en effectief voor een langdurig gladde huid

- Behandel slechts 2x per maand voor snelle resultaten
- Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor gemak en effectiviteit
- Extra lange kabel voor extra flexibiliteit tijdens behandelingen

### Volledige oplossing voor gezicht en lichaam

- 1 opzetstuk voor lichaam
- Verkrijgbaag met Satin Compact-pentrimmer
- Geschikt voor een breed scala aan huidtinten en haarkleuren

### Gepersonaliseerde IPL ontharingsbehandeling

- Skin Tone-sensor en 5 intensiteitsinstellingen
- Optimaliseer uw routine met de Philips Lumea IPL-app

# Kenmerken

## 2x per maand voor snelle resultaten




Begin om de twee weken — dat is de helft van het aantal behandelingen met andere merken. Gevolgd door slechts één keer per maand een touch-up. Dat is het. Het behandelen van beide onderbenen duurt 15 minuten.

## Skin Tone-sensor



Kies uit 5 intensiteitsinstellingen voor een comfortabele ervaring. De Skin Tone-sensor zorgt dat u geen delen van uw huid behandelt die te donker zijn voor IPL-behandeling.

## Extra lange kabel

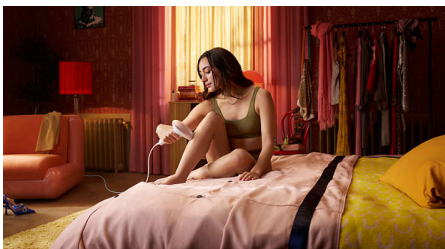


Handig in gebruik dankzij een extra lange kabel voor eenvoudige toegang en verbeterde beweegbaarheid.

## 1 opzetstuk voor lichaam




Het lichaamsopzetstuk kan worden gebruikt voor zachte en effectieve behandeling. Het brede behandelvenster is perfect voor snelle behandeling van grotere oppervlakten zoals benen, armen, en buik.

## Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen

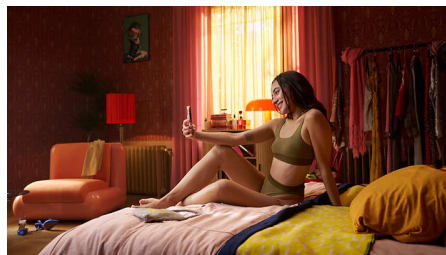

Als leider op het gebied van gezondheidstechnologie heeft Philips Lumea IPL ontwikkeld in overleg met dermatologen, voor eenvoudig en effectief gebruik in de veiligheid van uw huis. Lumea IPL is afgeleid van technologie die in professionele salons wordt gebruikt en biedt een zachte behandeling, zelfs op gevoelige gebieden.

## Philips Lumea IPL-app

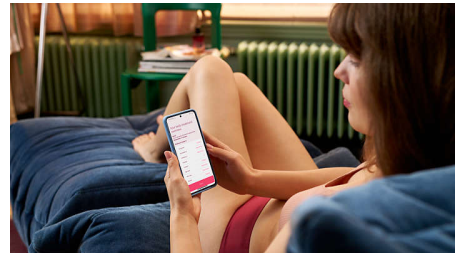

Onze gratis coaching-app helpt u met het plannen en vasthouden van uw behandelingschema, en leidt u stapsgewijs door iedere sessie. Door meer dan 2,1 miljoen gebruikers gedownload.

## Satin Compact-pentrimmer



Voltooi uw schoonheidsroutine: de Satin Compact-pentrimmer is een discreet beauty-hulpmiddel om onderweg snel en eenvoudig zelfs de fijnste gezichtsbehaaring te verwijderen.

## Voor veel huid- en haartypes



IPL heeft contrast nodig tussen de pigmenten in de haarkleur en de huidtint en werkt daardoor op natuurlijk donkerblond, bruin en zwart haar en op huidtinten van licht tot gemiddeld bruin(I- IV).

# Specificaties

## Veiligheid en aan te passen standen

**Geïntegreerd UV-filter:** Bescherm uw huid tegen UV-straling

**5 lichtsterktes:** Aanpasbaar aan uw huidtype

**Geïntegreerd veiligheidssysteem:** Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

## Toepassingsmodus

**Glij- en flitsmodus:** Voor snelle toepassing

**Met of zonder snoer te gebruiken:** Gebruik met snoer

**Stap en Flits:** Voor behandeling op kleine zones

## Pentrimmer

**Accessoires:** Reinigingsborsteltje, Wenkbrauwkam

**Gebruiksgemak:** Compact handvat

**Vermogen:** AAA-batterij

## Vermogen

**Gebruik met snoer**

## Technische specificaties

**Lamp met hoge prestaties:** Duurzaam, 250.000 pulsen, gelijk aan een levensduur voor de lamp van 20 jaar\*\*

**Spanning:** 100-240 V

## Consumer Trade Item

**GTIN:** 8720689016780

**Country of origin:** HU

**Harmonized system code:** 85437090

## Ondoos

**GTIN:** 18720689016787

## Accessoires

**Lichaamsopzetstuk (4 cm<sup>2</sup>):** Voor gebruik onder de neklijn

## Service

**Garantie:** 2 jaar algemene garantie plus 1 jaar extra garantie bij productregistratie binnen 90 dagen

## Overig

**Height:** 112.2 cm

**Width:** 80 cm

**Length:** 120 cm

**GTIN:** 68720689016782

## Meegeleverde artikelen

**Gebruiksaanwijzing:** Gebruiksaanwijzing

**Opbergen:** Opbergetui

**Adapter:** 24 V / 1500 mA

**Accessoire:** Schoonmaakdoekje

## Behandeltijd

**Bikini:** 4 minuten

**Onderbeen:** 15 min.

**Oksels:** 2,5 min.

**Bikinilijn:** 4 min.

**Delen van het gezicht:** 2 min.

## Technische specificaties hulpstukken

**Hulpstuk voor lichaam:** Venstergrootte: 4,0 cm<sup>2</sup>, Behandeling voor lichaam: benen, armen, buik en onderarmen

