

PHILIPS

IPL-
ihokarvanpoistolaite

Lumea IPL 7000
Series

5 manuaalista tehoasetusta

2 lisäosaa: vartalo, kasvot

Lumea IPL -sovellus

Johdolliseen käyttöön

SC1997/00



Mahtavia tuloksia, upea hinta-laatusuhde

Nauti sileästä ihosta jopa 12 kuukauden ajan*

Lumea IPL 7000 -sarja takaa sileän ihon tehokkaalla mutta hellävaraisella käsittelyllä. Kullekin kehonosalle on oma lisäosansa.

Hellävarainen ja tehokas käsittely, tuloksena sileä iho pitkään

- Käsittelykerrat vain 2 viikon välein: nopeat tulokset
- Kehitetty helpoksi ja tehokkaaksi yhteistyössä ihotautilääkärien kanssa
- Erittäin pitkä johto joustavaan käsittelyyn

Kattava ratkaisu kasvoille ja vartalolle

- Kattava ratkaisu kasvoille ja vartalolle – kaksi lisäosaa
- Sopii monenlaisille ihon sävyille ja monenvärisille ihokarvoille

Yksilöllistä karvanpoistoa IPL-käsittelyllä

- Ihon sävyn tunnistin ja viisi tehoasetusta
- Tehosta rutiinejasi Philips Lumea IPL -sovelluksella

Lumea IPL 7000 Series

IPL-ihokarvanpoistolaite

SC1997/00

Kohokohdat

Nopeita tuloksia – kahdesti kuussa




Aloita vain 4 käsittelykerralla 2 viikon välein – se on puolet vähemmän kuin muilla merkeillä. Tee sitten vielä tulosta parantava käsittely kerran kuussa tulosten ylläpitämiseksi.

Ihon sävyn tunnistin



Viisi tehoasetusta tekevät kokemuksestasi mahdollisimman mukavan. Ihon sävyn tunnistin estää sinua käsittelemästä ihoalueita, jotka ovat liian tummia IPL-käsittelyyn.

Erittäin pitkä johto

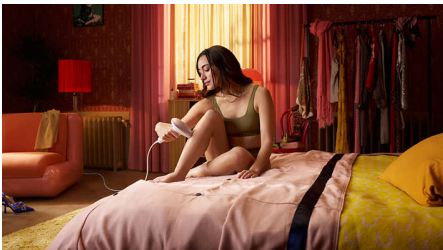


Kätevä käyttää erittäin pitkän johdon ansiosta, mikä myös helpottaa laitteen liikuttamista iholla.

Kaksi lisäosaa eri alueille




Eri ajopäät vartalolle ja kasvoille toimivat tietyllä nopeudella ja tarkkuudella ja ovat siksi hellävaraisia käyttää myös herkillä alueilla. Kasvoille tarkoitettu lisäosa on sisäänrakennettu valosuodatin tarkkaan käsittelyyn.

Kehitetty yhdessä dermatologien kanssa

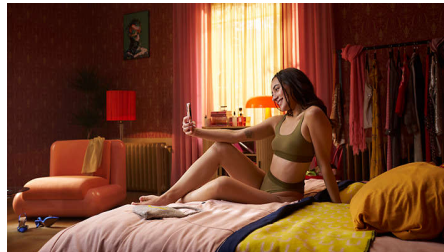

Terveysteknologian johtavana yrityksenä Philips kehitti Lumea IPL -ihokarvojenpoistojärjestelmän yhdessä ihotautilääkärien kanssa helpoksi ja tehokkaaksi kotikäytössä. Kauneushoitoloissa käytettävään teknologiaan perustuva Lumea IPL tarjoaa hellävaraisen käsittelyn herkimmillekin alueille.

Philips Lumea IPL -sovellus

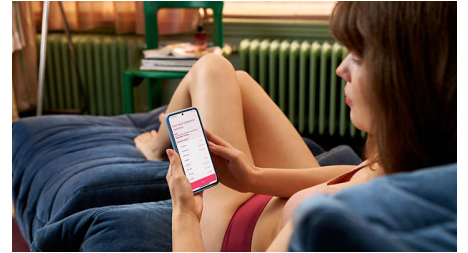

Maksuton opastussovelluksemme auttaa sinua suunnittelemaan käsittelyaikataulun ja myös pitäytymään siinä. Sovellus myös ohjaa sinut vaihe vaiheelta jokaisen käsittelyn läpi. Sovelluksen on ladannut yli 2,1 miljoonaa käyttäjää.

Useille iho- ja karvatyypeille



IPL tarvitsee ihokarvojen värin pigmentin ja ihon sävyn pigmentin välistä kontrastia, joten se toimii luonnollisen vaaleille, ruskeille tai mustille ihokarvoille ja ihon sävyille vaaleasta keskiruskeaan (I–IV).

Tekniset tiedot

Lisäosien tekniset tiedot

Vartalolisäosa: Ikkunan koko: 4,0 cm², Vartalon käsittely: jalat, käsivarret, vatsa ja kainalat

Kasvolisäosa: Ikkunan koko: 2 cm², lisäsuodatin, Kasvojen käsittely: ylähuuli, leuka ja leukalinja

Turvallisuus ja säädettävät asetukset

Integroitu UV-suodatin: Suojaa ihoa UV-valolta

5 valotehoasetusta: Säädettävissä omalle ihotyypillesi sopivaksi

Integroitu turvajärjestelmä: Estää tahattomat välähdykset

Käyttötila

Liuku ja välähdys: Nopeaan käsittelyyn

Leima ja välähdys: Pienten alueiden käsittelyyn

Johdoton / johdollinen käyttö: Johdolliseen käyttöön

Virta

Johdolliseen käyttöön

Tekniset tiedot

Tehokas lamppu: Rakennettu kestäväksi, 250 000 välähdystä, mikä vastaa 20 vuoden pituista lampun käyttöikää**

Jännite: 100–240 V

Lisäosat

Tarkkuusosa (2 cm²): Turvallinen myös kasvoille

Vartalolisäosa (4 cm²): Tarkoitettu ihokarvojen poistamiseen kaulasta alaspäin

Huolto

Takuu: 2 vuoden yleinen takuu + 1 vuoden lisätakuu, kun rekisteröit tuotteen 90 päivän sisällä

Pakkauksen sisältö

Käyttöohjeet: Käyttöopas

Tallennustila: Meikkipussi

Sovitin: 24 V / 1500 mA

Tarvike: Puhdistusliina

Käyttöaika

Sääri: 15 min

Kainalat: 2,5 min

Bikininirajat: 4 min

Kasvot: 2 min

