

# PHILIPS

Medicatievernevelaar met  
compressor voor kinderen

Sami the Seal

Tafelmodel voor gebruik in huis

Behandeling in 6-8 minuten\*

\*Bij een dosis van 2,5 ml  
vloeistof

Ontworpen voor kinderen

HH1304



## Therapie leuker maken

De Sami de zeehond- vernevelaar voor kinderen is gemaakt in de vorm van een vriendelijk dier, zodat uw kind wordt aangemoedigd om de vernevelingstherapie toe te dienen.

### **Beproefde SideStream-technologie**

- Efficiënte toediening van medicijnen
- Produceert consistent hoogwaardige aerosol

### **Speciaal ontworpen voor kinderen**

- Efficiënt, betrouwbaar en vriendelijk
- Leuk en effectief

### **Korte behandel tijden**

- Behandeling in 6-8 minuten\*

### **Geschikt voor de meest voorgeschreven soorten medicatie**

- Compatibel met de vaakst voorgeschreven medicijnen

## Kenmerken

### Meerdere configuraties



De donkerblauwe wegwerpvernevelaar van SideStream kan twee weken worden gebruikt voordat deze moet worden vervangen. De wegwerpvernevelaar zorgt elke keer voor consistente toediening van medicijnen en kan worden gebruikt in combinatie met de meeste gebruikelijke medicijnen voor luchtwegaandoeningen.

### Snelle en effectieve behandeling



De SideStream-vernevelaar is speciaal ontworpen om de behandelingstijden voor uw kind zo kort mogelijk te houden. Terwijl Sami de zeehond lucht door de buis duwt, wordt er extra lucht aangezogen via de bovenkant van de vernevelaar. Zo ontstaat er voor uw kind een


snelle flow van aerosolmedicatie om in te ademen. Een behandeling kan in slechts 6 minuten worden afgerond\*

### Therapie leuker maken



Het Sami de zeehond-compressorsysteem van de vernevelaar combineert kracht en betrouwbaarheid met een kindvriendelijk ontwerp en een leuk speelgoedfiguur om u en uw kind een gebruiksvriendelijke behandelingservaring te bieden. De compressor heeft een verzwaarde onderkant voor extra stabiliteit.

### Beproefde vernevelingstechnologie

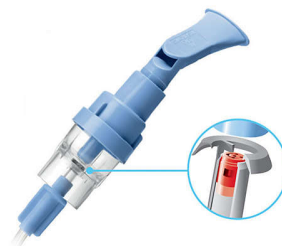

Consistente toediening van hoogwaardige aerosoltherapie. SideStream is ontworpen om bestand te zijn tegen veelvuldig en herhaald

gebruik en kan het vernevelingsmedicijn van uw kind op een efficiënte manier toedienen tot het tijd is voor vervanging.

### Masker voor kinderen Sam



Het leuke Sami de schildpad-speelgoedfiguurmasker is gemaakt van een zacht, flexibel materiaal en vormt zich naar het gezicht van uw kind voor comfort en pasvorm. Het masker bevat ook een opening die helpt om de medicatie weg te houden bij de ogen van uw kind.

### Veelzijdigheid



Sami de zeehond is ontworpen voor gebruik met de meest voorgeschreven aerosolmedicatie voor veelvoorkomende luchtwegaandoeningen.

# Specificaties

## Design

Reliable and appealing: Child-friendly

## Parameters tijdens gebruik

Maximum pressure: 29-43.5 psi

## Operating parameters

Operating mode: Continuous

Performance average flow rate: 6 LPM @ 10 psig

Thermal fuse: Functioning temp 130 degrees C

## Product details

Electrical requirements: 230VAC / 50Hz

Power: 230 VA

## Productgegevens

Size: 226mm x 155mm x 267mm

Garantie: 3 years

Treatment time (6-8 minutes\*): 5 minutes\*

## Productgegevens

Gewicht: 1.5 kg

