

PHILIPS

IPL-
Haarentfernungsgerät

Lumea IPL 7000
Series

5 manuell einstellbare
Intensitätsstufen

2 Aufsätze: Körper, Gesicht

Lumea IPL App

Verwendung mit Kabel

BRI924/00



Sanft, glatt und langanhaltend

Genießen Sie bis zu 12 Monate seidig glatte Haut*

Genießen Sie seidig glatte Haut mit unserem Lumea IPL der 7000er Serie. Sanfte und effektive Behandlungen mit Aufsätzen für jeden Körperbereich

Sanft und effizient für langanhaltend glatte Haut

- Schnelle Ergebnisse mit Behandlungen nur alle zwei Wochen
- Entwickelt in Zusammenarbeit mit Dermatologen.
- Extralanges Kabel für mehr Flexibilität während der Behandlung

Komplettlösung für Gesicht und Körper

- Komplettlösung für Gesicht und Körper mit 2 Aufsätzen
- VisaPure Mini-Gesichtsreinigungsbürste enthalten
- Geeignet für viele Haar- und Hauttypen

Individuelle IPL-Haarentfernung

- Hauttensensor und 5 Intensitätsstufen
- Optimieren Sie Ihre Behandlungsroutine mit der Philips Lumea IPL-App.

Besonderheiten

Schnelle Ergebnisse durch 2x im Monat durchgeführte Behandlung




Beginnen Sie mit 4 Behandlungsphasen nur alle zwei Wochen während der Anfangsphase – das sind nur halb so viele Behandlungen im Vergleich zu anderen Marken. Fahren Sie dann mit monatlichen Auffrischungsphasen fort, um das Ergebnis beizubehalten.

Skin Tone Sensor



Wählen Sie aus fünf Intensitätsstufen, die eine komfortable Behandlung ermöglichen. Der Hauttonsensor verhindert die Behandlung von Hautbereichen, die für eine IPL-Behandlung zu dunkel sind.

Extralanges Kabel

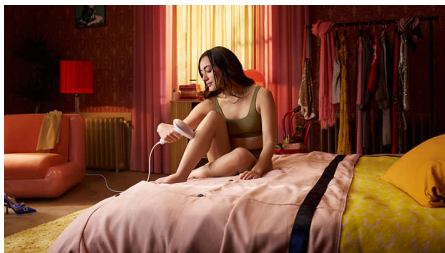


Dank besonders langem Kabel ist eine komfortable und flexible Behandlung verschiedener Körperbereiche möglich.

2 spezielle Aufsätze




Verschiedene Aufsätze für Körper und Gesicht ermöglichen selbst in empfindlichen Bereichen eine sanfte, schnelle und präzise Haarentfernung. Der Aufsatz für das Gesicht sorgt durch einen integrierten Lichtfilter für eine präzise Behandlung.

Mit Dermatologen entwickelt

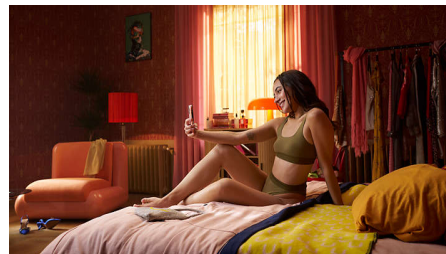


Als ein führender Anbieter in der Gesundheitstechnologie hat Philips in Zusammenarbeit mit Dermatologen Lumea IPL entwickelt – zur einfachen und effektiven Verwendung zu Hause. Dank der Technologie aus professionellen Schönheitssalons bietet Lumea IPL eine sanfte Behandlung, selbst in empfindlichen Bereichen.

Philips Lumea IPL-App

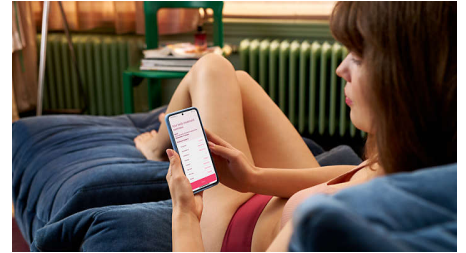


Unsere kostenlose Coaching-App hilft Ihnen, einen Behandlungsplan zu erstellen und einzuhalten und führt Sie schrittweise durch jede Sitzung. Von über 2,1 Millionen Benutzern heruntergeladen.

VisaPure Mini Gesichtsreinigungsbürste

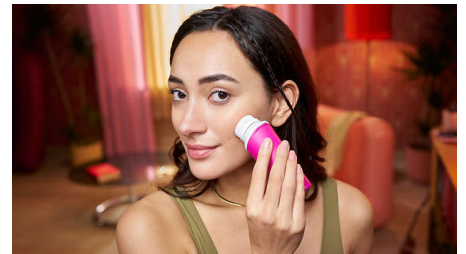

Für Ihre vollständige Beauty-Routine: Die VisaPure Mini-Gesichtsreinigungsbürste ist ein kompaktes Gerät zur einfachen Reinigung für sichtbar frische und weiche Haut.

Für viele Haut- und Haartypen

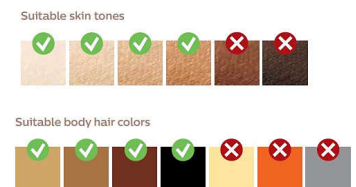

IPL benötigt einen Kontrast zwischen dem Pigment in der Haarfarbe und dem Pigment im Hutton und funktioniert daher bei natürlich dunkelblondem, braunem und schwarzem Haar und hellen bis mittelbraunen Hauttönen (I-IV).

Daten

Technische Daten der Aufsätze

Körperaufsatz: Größe des Behandlungsfensters: 4,0 cm², Behandlung folgender Körperbereiche: Beine, Arme, Bauch und Unterarme

Aufsatz für das Gesicht: Größe des Behandlungsfensters: 2 cm², zusätzlicher Filter, Behandlung des Gesichts: Oberlippe, Kinn und Kieferpartie

Sicherheit und anpassbare Einstellungen

Integrierter UV-Filter: Schützt die Haut vor UV-Licht

5 Lichtintensitätseinstellungen: An Ihren Hauttyp anpassbar

Integriertes Sicherheitssystem: Verhindert unbeabsichtigte Lichtimpulse

Anwendungsmodus

„Slide and Flash“: Für eine schnelle Anwendung

„Stamp and Flash“: Für die Behandlung kleiner Bereiche

Mit Kabel/kabellos: Verwendung mit Kabel

Leistung

Verwendung mit Kabel

Technische Daten

Hochleistungs-Lampe: Langlebiges Produkt mit 250.000 Lichtimpulsen – entspricht einer Lampen-Lebensdauer von 20 Jahren**

Stromspannung: 100 bis 240 V

Consumer Trade Item

Height: 22.8 cm

Width: 24.7 cm

Length: 12.3 cm

Net weight: 0.931 kg

Gross weight: 1.451 kg

GTIN: 8720689017244

Country of origin: HU

Harmonized system code: 85437090

Außenkarton

Height: 25.8 cm

Width: 23.8 cm

Length: 25.7 cm

Net weight: 1.862 kg

Gross weight: 3.174 kg

GTIN: 18720689017241

Palette

Height: 118.2 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 111.72 kg

Gross weight: 207.004 kg

GTIN: 68720689017246

Aufsätze

Körperaufsatz (4 cm²): Für den Gebrauch unterhalb des Halses

Aufsatz fürs Gesicht (2 cm²): Für den Gebrauch unterhalb der Augen

Service

Gewährleistung: 2 Jahre Gewährleistung und 1 weiteres Jahr Gewährleistung bei Produktregistrierung innerhalb von 90 Tagen

Pallet Layer

Height: 25.8 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Artikel enthalten

Gebrauchsanweisung: Bedienungsanleitung

Lagerung: Kosmetiktasche

Adapter: 24 V/1500 mA

Zubehör: Reinigungstuch

Anwendungszeit

Bikini: 4 Min.

Unterschenkel: 15 Min.

Unterarme: 2,5 Min.

Bikinizone: 4 Min.

Gesichtsbereiche: 2 Min.

VisaPure Mini sensitive

Anwendungsbereiche: Gesicht und Hals

Benutzerfreundlichkeit: Wasserfest, Kabellos,

Wiederaufladbar, 1 Geschwindigkeitseinstellung

Artikel enthalten: Sensitive skin brush head, Power adapter

Zubehör: Bürstenkopf für empfindliche Haut, Netzadapter

Leistung: Netzadapter

