

PHILIPS

 Product Picture

IPL-
hårborttagningsenhet

Lumea Essential

För kropp och ansikte

16 minuter för att behandla
underbenen

>200 000 ljuspulser

Kompakt design med sladd

BRI861/00

Enkel, varaktig reduktion av hårväxt

Philips Lumea Essential gör underverk när det gäller att förhindra hårväxt på kroppen och i ansiktet. Lätta ljuspulser, som tillämpas regelbundet, håller huden silkeslen varje dag.

Varaktig hårborttagning med IPL-teknologi

- Anpassad för säkert hemmabruk
- Len hud varje dag
- Effektivt utan ansträngning
- Lämplig för olika hår- och hudtyper

Säker och effektiv på ansikte och kropp

- Säker och effektiv även på känsliga områden
- Hudtonssensor
- Fem justerbara ljusenergiinställningar
- Skonsam behandling

Maximal frihet, minimalt krångel

- Slide and Flash-läge ger en bekvämare behandling
- Inga reservdelar, inga dolda kostnader


Funktioner

IPL-teknik




I Philips Lumea Comfort används en innovativ ljusbaserad teknologi kallad IPL (Intense Pulsed Light), samma teknologi som används i professionella skönhetsalonger. Philips har anammat den här teknologin för effektiv användning säkert och tryggt hemma. Philips har arbetat tätt tillsammans med hudvårdsexperten för att utveckla Lumea IPL. Philips har genomfört omfattande forskning på IPL-teknologi i över 10 år, med mer än 2 000 kvinnor för att kunna presentera IPL-teknologin för hemmabruk.

Len hud varje dag

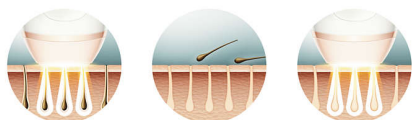

Philips Lumea avger lätta ljuspulser mot hårrötterna. Detta leder till att mängden hår som växer på kroppen gradvis minskar. Upprepa behandlingen för att göra din hud vackert hårfri och silkeslent slät.

Effektivt utan ansträngning

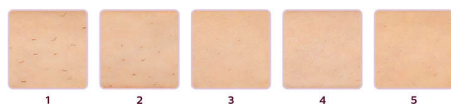

Våra kliniska studier visar en betydande hårminskning redan efter fyra behandlingar varannan vecka. Behandlingen ger dig en len och hårfri hud. För att bibehålla resultatet upprepar du bara behandlingen vid behov. Behandlingsintervallet kan variera beroende på just din takt för hårårtväxt. – Du kan förstora bilden genom att klicka på den i bildgalleriet längst upp på den här sidan.

Lämpliga hår- och hudtyper



Philips Lumea fungerar effektivt på (naturligt) mörkblont, brunt och svart hår. Som med andra ljusbaserade behandlingar fungerar Philips Lumea INTE på rött, ljusblont eller vitt/grått hår. Den här produkten lämpar sig heller INTE för mörk hud.

Tillämpningsområden



Den kan tryggt användas för hårborttagning på ansikte (överläpp, haka) och kroppsdelar, inklusive ben, armhålor, bikinilinjje, mage och armar.

Hudtonssensor



För extra säkerhet mäter den inbyggda hudtonssensorn den behandlade hyn i början av varje behandling och då och då under behandlingen. Om den upptäcker en hudton som är för mörk för den här produkten slutar den automatiskt att avge pulseringar.

5 lampenergiinställningar



Philips Lumea har fem justerbara ljusenergiinställningar för att garantera en skonsam men effektiv behandling. Vid korrekt användning är Philips Lumeas IPL-behandling säker och skonsam, även på känslig hud och känsliga kroppsdelar.

Skonsam behandling



Skonsam mot huden.

Slide and Flash-läge



Huvudläget möjliggör glidrörelser för en mer bekväm och kontinuerlig behandling.

Inga reservdelar krävs



Philips Lumea är en komplett lösning som levereras körklar. Och framförallt krävs inga reservlampor eller någon gel.

Specifikationer

Tillämpningsområden

Områden på kroppen: Armar, Ben, Mage, Bikini, Under armarna

Områden i ansiktet: Haka, Polisorger, Överläpp

Säkerhet och justerbara inställningar

Integrerat UV-filtrer: Skyddar din hud från UV-ljus

5 ljusenergiinställningar: Justerbar för din hudtyp

Integrerat säkerhetssystem: Förhindrar oavsiktliga ljussignaler

Sensor för hudton: Upptäcker hudtonen

Programläge

Dra och skicka ljuspuls: För enkelt rörelseprogram

Användning med eller utan sladd: Med sladd

Tryck och skicka ljuspuls: För behandling på kurviga områden

Effekt

Spänning: 100–240 V

Tekniska specifikationer

Lampa med höga prestanda: Producerar > 200 000 ljuspulser

Consumer Trade Item

Height: 17.5

Width: 24

Length: 6.9

Net Weight: 0.54

Gross Weight: 0.728

GTIN: 8710103761631

Country of origin: SI

Harmonized system code: 85437090

Ytterförpackning

Height: 19

Width: 14.7

Length: 24.9

Net Weight: 1.08

Gross Weight: 1.571

GTIN: 18710103761638

Service

Garanti: 2 års global garanti

Artiklar som ingår

Bruksanvisning: Användarhandbok

Adapter: 12 V/550 mA, 400 V/60 W

Appliceringstid

Underben: 8 min

Armhåla: 1,5 min.

Bikiniinje: 1,5 min.

Områden i ansiktet: 2 min

