

PHILIPS

 Product Picture

IPL – Tüy alma
cihazı

Lumea Essential

Vücutta ve yüzde kullanım için

16 dakikada alt bacak
uygulaması

200.000'den fazla ışık atışı

Kompakt kablolu tasarım

BRI861/00

Kolay ve uzun süreli tüy azaltma

Philips Lumea Essential tüylerin yüzünüzde ve vücudunuzda tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar.

IPL teknolojisiyle uzun süre kalıcı tüy azaltma

- Evinizin rahatlığında, konforlu kullanım için uyarlandı
- Her gün pürüzsüz cildin keyfini çıkarın
- Zahmetsiz ve etkili
- Farklı tüy ve cilt tiplerine uygun

Yüz ve vücut için güvenli ve etkili uygulama

- Hassas bölgelerde bile güvenli ve etkili
- Daha kısa uygulama süresi için %25 daha hızlı*
- Cilt Tonu Sensörü
- Ayarlanabilir beş ışık enerji seviyesi
- Hassas uygulama

Maksimum özgürlük, minimum uğraş

- Daha rahat uygulama için Kaydırarak Uygulama modu
- Yedek parça yok, ek masraf yok


Özellikler

IPL teknolojisi




Philips Lumea, IPL (Yoğunlaştırılmış Işık Teknolojisi) adı verilen ve profesyonel güzellik salonlarında kullanılan teknolojiyi temel alan ışık bazlı yenilikçi bir teknoloji kullanır. Philips bu teknolojiyi evinizin rahatlığında, güvenli ve etkili biçimde kullanabilmeniz için tasarladı. Philips, devrim niteliğindeki tüy alma sistemimizi geliştirmek için önde gelen dermatologlarla işbirliği yaptı. 10 yıldan uzun süredir 2000'den fazla kadınla kapsamlı tüketici araştırmaları gerçekleştirdi.

Her gün pürüzsüz cildin keyfini çıkarın

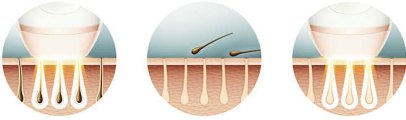

Philips Lumea tüy köklerine yumuşak ışık atışları uygular. Bunun sonucunda uzayan tüy miktarı zaman içerisinde azalır. Bu işlemin düzenli olarak tekrar edilmesiyle tüylerden arınmış, yumuşak ve pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarabilirsiniz.

Zahmetsiz ve etkili

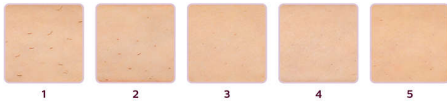

Klinik çalışmalarımız, iki haftada bir gerçekleştirilen dört uygulamadan sonra tüylerin önemli ölçüde azaldığını ve ipeksi, pürüzsüz bir cilde ulaşıldığını göstermiştir. Bu sonuçları korumak için gerektiğinde işlemi tekrarlamanız yeter. İşlemler arasındaki süre, tüylerinizin tekrar çıkma süresine göre değişir. - Resmi büyütmek için lütfen sayfanın en üstündeki resim galerisinde yer alan resme tıklayın

Uygun tüy ve cilt tipleri



Philips Lumea, doğal rengi kumral, kahverengi ve siyah olan tüylerde kullanım için uygundur. Diğer ışık bazlı uygulamalar gibi Philips Lumea da kızıl, açık sarışın veya beyaz/gri tüylerde kullanım için uygun DEĞİLDİR. Bu ürün koyu ciltler için de uygun DEĞİLDİR.

Uygulama alanları



Yüzünüzdeki (dudak üstü, çene) ve bacaklar, koltuk altı, bikini bölgesi, karn ve kol gibi vücut bölgelerindeki tüylerden kurtulmak için güvenle kullanın.

Cilt Tonu Sensörü



Entegre cilt tonu sensörü, her seansın başında ve zaman zaman seans sırasında uygulama yapılan cildin tonunu kontrol eder. Bu ürünün kullanılamayacağı kadar koyu bir cilt tonu algırsa sensör uygulamayı otomatik olarak durdurur.

5 ışık enerjisi ayarı



Philips Lumea nazik, ancak etkili bir uygulama için ayarlanabilir beş ışık enerji seviyesine sahiptir. Philips Lumea'nın IPL işlemi doğru kullanıldığında hassas ciltler ve hassas bölgeler için bile güvenli ve naziktir.

%25 daha hızlı*



Daha hızlı uygulama ve daha iyi görüş açısı için optimize edilmiş tasarıma sahip daha büyük pencere

Hassas uygulama



Cildinize karşı hassas.

Kaydırarak Uygulama modu



Daha rahat ve kesintisiz uygulama için kaydırarak ürünü kullanma rahatlığı sağlar.

Teknik Özellikler

Uygulama alanları

Vücut alanları: Kollar, Bacaklar, Karın, Bikini bölgesi, Koltuk altları

Yüz alanları: Çene, Favoriler, Dudak üstü

Güvenlik ve değiştirilebilir ayarlar

Entegre UV filtresi: Cildi UV ışınlarına karşı korur

5 ışık enerjisi ayarı: Cilt tipinize göre ayarlanabilir

Entegre güvenlik sistemi: İstenmeyen atışları önler

Cilt Tonu sensörü: Cilt tonunuzu algılar

Uygulama modu

Slayt ve Flash: Kolay hareket etmek için

Kablolu / kablosuz kullanım: Kablolu

Damga ve Flaş: Kıvrımlı bölgelerde uygulama için

Güç

Gerilim: 100-240 V

Teknik özellikler

High performance lamp: 200.000'den fazla ışık atışı gönderir

Servis

Garanti: Dünya çapında 2 yıl garanti

Dahil olan ürünler

Kullanım için talimatlar: Kullanım kılavuzu

Adaptör: 12 V/550 mA, 400 V/60 W

Uygulama süresi

Alt bacak: 8 dk

Armpit: 1,5 dk

Bikini line: 1,5 dk

Yüz alanları: 2 dk

