

PHILIPS

Sistem za odstranjevanje dlak IPL

Lumea Comfort

Za depilacijo telesa in obraza

22 minut za depilacijo spod. dela nog

Za do 100.000 svetlobnih impulzov

Kompaktna žična zasnova

SC1981/00



Kompaktna rešitev z intenzivno pulzno svetlobo, ki preprečuje ponovno rast dlak za gladko kožo

Sistem za odstranjevanje dlak Philips Lumea Comfort IPL čudežno preprečuje ponovno rast dlak po obrazu in vsem telesu. Nežni svetlobni impulzi, pri redni uporabi, ohranjajo svileno gladko kožo.

Dolgotrajna gladkost

- Enostavno in učinkovito
- Uživate v gladki koži vsak dan

Odstranjevanje dlak s tehnologijo IPL

- Prilagojeno za varno in udobno domačo uporabo

Najkompaktnejša zasnova aparata Lumea

- Brez nadomestnih delov, brez skritih stroškov
- Najmanjši in najlažji aparat serije Lumea

Varno in učinkovito na obrazu in telesu

- Pet prilagodljivih nastavitev svetlobne energije
- Varno in učinkovito tudi na občutljivih predelih
- Senzor barve kože
- Način pomika in osvetlitve za priročajšo uporabo
- Primeren za različne vrste dlak in kože

Značilnosti

Uživajte v gladki koži vsak dan



Philips Lumea korenino dlake osvetli z nežnim svetlobnim impulzom. Dlaka zato spontano odpade in ponovna rast dlake se ustavi. Redno izvajanje tega postopka zagotavlja, da boste vsak dan imeli gladko kožo.

Enostavno in učinkovito

Clinical results after treatment: example 1 (leg)



Clinical results after treatment: example 2 (bikini line)



Naše klinične raziskave so pokazale znatno zmanjšanje števila dlak že po štirih dvotedenskih postopkih, ko je bila koža gladka in neporaščena. Te rezultate ohranjajte tako, da po potrebi ponavljate postopek. Čas med postopki se lahko razlikuje glede na ponovno rast dlak. – Sliko povečajte tako, da jo kliknete v galeriji slik na vrhu te strani

Tehnologija IPL



Philips Lumea Comfort uporablja inovativno svetlobno tehnologijo, imenovano "intenzivna pulzna svetloba" (IPL), ki temelji na tehnologiji uporabljeni v profesionalnih lepotnih salonih. Philips je to tehnologijo prilagodil tako, da omogoča varno, udobno in učinkovito domačo uporabo. Philips je to tehnologijo razvil v tesnem sodelovanju s strokovnjaki s področja

dermatologije. Več kot 10 let smo izvajali obsežne raziskave IPL tehnologije z več kot 2000 ženskami

Primerne vrste dlak in kože

Haarfarbe Haarkleur Hair color Couleur de poils	Hautton / Huidskleur / Skin tone / Couleur de la peau	1	2	3	4	5	6
Black	Light	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Dark brown	Light	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Light brown	Light	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Dark blonde	Light	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Light blonde	Light	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Dark blonde	Light	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Dark blonde	Medium	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Light blonde	Medium	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Dark blonde	Medium	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Light blonde	Dark	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Dark blonde	Dark	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Philips Lumea Comfort je učinkovit na (naravno) temno blond, rjavih in črnih dlakah. Kot ostali načini svetlobnega odstranjevanja dlak tudi Lumea Comfort NI učinkovit na rdečih, svetlo blond in belih/sivih dlakah. – Sliko povečajte tako, da jo kliknete v galeriji slik na vrhu te strani

Območja uporabe



Zanesljivo odstranjujete dlake na obrazu (zgornja ustnica, brada) ter delih telesa, kot so noge, pazduhe, predel bikinija, trebuh in roke.

5 nastavitve svetlobne energije




Philips Lumea Comfort ima pet nastavitve svetlobne energije za nežno in učinkovito odstranjevanje dlak. Če aparat Philips Lumea uporabljate pravilno, je odstranjevanje dlak z intenzivno pulzno svetlobo varno in nežno tudi na občutljivi koži in občutljivih predelih telesa.

Senzor barve kože



Edinstveni senzor barve kože izmeri barvo obdelovane kože na začetku vsakega britja in občasno med britjem. Če zazna, da je barva kože pretemna za uporabo sistema Lumea Comfort, bo samodejno zaustavil oddajanje impulzov.

Način pomika in osvetlitve

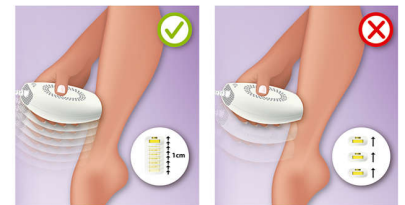

Lumea Comfort omogoča drsenje za priročajšo in neprekinjeno uporabo.

Najmanjši in najlažji aparat Lumea

Philips Lumea Comfort je najmanjši in najlažji v liniji Lumea. Z lahkoto ga držite in dosežete vse zelene predele britja.

Nadomestni deli niso potrebni



Philips Lumea Comfort je popolna rešitev, ki jo lahko začnete uporabljati takoj. Kar je še pomembnejše, ne potrebujete nadomestnih sijalk in gelov.

Specifikacije

Območja uporabe

Predeli telesa: Roke, Noge, Trebuh, Predel bikinija, Pazduhe

Deli obraza: Brada, Zalizci, Zgornja ustnica

Varnost in prilagodljive nastavitve

Vgrajen UV-filter: Kožo varuje pred UV-svetlobo

5 nastavitev svetlobne energije: Prilagodljivo glede na vrsto kože

Vgrajeni varnostni sistem: Preprečuje nenamerno osvetljevanje

Senzor barve kože: Zazna barvo kože.

Način uporabe

Pomik in osvetlitev: Za nezahtevne predele

Korak in osvetlitev: Za odstranjevanje dlak na neravnih predelih

Žična/brezžična uporaba: Žično

Napajanje

Napetost: 100–240 V

Tehnične specifikacije

Visokozmogljiva sijalka: Zagotavlja do 100.000 osvetlitev

Servis

Garancija: 2-letna globalna garancija

Priloženi predmeti

Navodila za uporabo: Vodnik za hiter začetek,

Uporabniški priročnik

Napajalnik: 12 V/1500 mA

Čas uporabe

Spodnji del noge: 11 min

Pazduha: 1,5 min

Predel bikinija: 1,5 min

Deli obraza: 2,5 min

