

PHILIPS

IPL - långvarig
hårborttagning

Lumea IPL 7000
Series

12 månader med hårfri, len hud

Undvik stickig utväxt och irriterad
hud

Extra säkerhetsfilter för ansiktet

Hudtonssensor

SC1997/00



Fantastiska resultat, fantastiskt värde

Få tolv månader hårfri och len hud*

Philips Lumea IPL Advanced är en snabb och effektiv IPL-modell för dig som vill ta bort oönskad hårväxt på kroppen samt i ansiktet. IPL (Intense Pulsed Light) reducerar hårväxten upp till 75 % redan efter 4 behandlingar. För långvarigt resultat bör behandlingen upprepas var fjärde till var åttonde vecka. Denna modell har ett extra tillbehör som är speciellt anpassat för behandling av oönskad hårväxt i ansiktet.

Skonsam och effektiv för len hud som varar länge

- Snabba resultat med behandlingar endast varannan vecka
- Utvecklad i samarbete med dermatologer för att vara enkel och effektiv
- Extra lång sladd för ökad flexibilitet under behandlingen

Komplett lösning för ansikte och kropp

- Komplett lösning för ansikte och kropp med två tillbehör
- Passar en mängd olika hudtoner och hårfärger

Anpassad IPL-hårborttagningsbehandling

- Hudtonssensor och fem intensitetsinställningar
- Optimera din rutin med Philips Lumea IPL-appen


Lumea IPL 7000 Series

IPL - långvarig hårborttagning

SC1997/00


Funktioner

Två gånger i månaden för snabba resultat

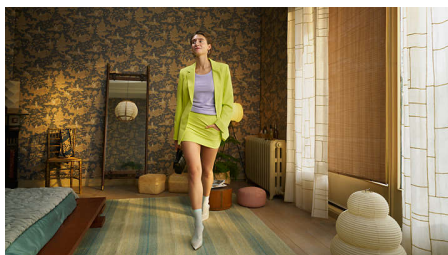


Kom igång med den inledande fasen med endast fyra behandlingar varannan vecka – det är hälften så många behandlingar som med andra varumärken. Gör sedan uppfryschningar varje månad för att bibehålla resultaten.

Hudtonssensor

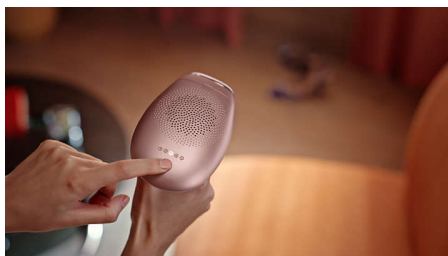

Välj bland fem intensitetsinställningar för en behaglig upplevelse: Hudtonssensorn förhindrar att du behandlar hudområden som är för mörka för IPL-behandling.

Extra lång sladd

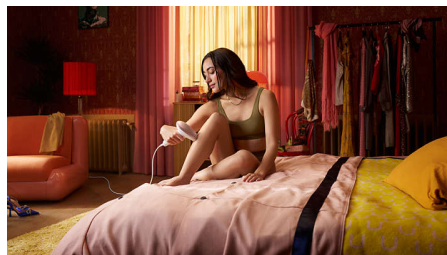


Smidig att använda tack vare en extra lång sladd för enkel åtkomst och bättre manövrering.

Två olika tillbehör



Olika huvuden för kropp och ansikte arbetar snabbt och precist för skonsam användning, även i känsliga områden. Ansiktstillbehöret har ett inbyggt ljusfilter för precis behandling.

Utvecklad i samarbete med dermatologer

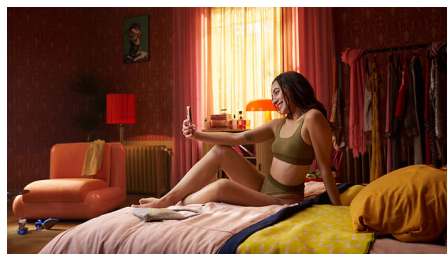

Som ledare inom medicinsk teknik har Philips utvecklat Lumea IPL tillsammans med dermatologer för enkel och effektiv användning

hemma. Lumea IPL har utvecklats utifrån teknik som används på professionella skönhetsalonger och ger en skonsam behandling, även i känsliga områden.

Philips Lumea IPL-appen



Vår kostnadsfria instruktionsapp hjälper dig att planera och hålla dig till ditt behandlingsschema och vägleder dig sedan genom varje session steg för steg. Har laddats ned av fler än 2,1 miljoner användare.

För många hud- och hårtyper

Suitable skin tones



Suitable body hair colors



IPL behöver ha kontrast mellan pigmentet i hårfärgen och pigmentet i hudtonen, och därför fungerar det på naturligt mörkblont, brunt och svart hår och på hudtoner som sträcker sig från ljus till medelbrun (I–IV).

Specifikationer

Tekniska specifikationer, tillbehör

Kroppsbehandling: Fönsterstorlek: 4,0 cm²,
Behandling för kroppen: ben, armar, mage och
armhålor

Ansiktsbehandling: Fönsterstorlek: 2 cm², extra
filter, Behandling för ansiktet: överläpp, haka och
käklinje

Säkerhet och justerbara inställningar

Integrerat UV-filter: Skyddar din hud från UV-ljus
5 ljusenergiinställningar: Justerbar för din
hudtyp

Integrerat säkerhetssystem: Förhindrar
oavsiktliga ljuspulser

Programläge

Dra och skicka ljuspuls: För snabb användning

Tryck och skicka ljuspuls: För behandling på små
områden

Användning med eller utan sladd: Användning
med sladd

Effekt

Användning med sladd

Tekniska specifikationer

Lampa med höga prestanda: Gjord för att hålla,
250 000 ljuspulser, vilket motsvarar en
lampslifslängd på 20 år**

Spänning: 100–240 V

Tillbehör

Precisionstillbehör (2 cm²): För säker
användning på ansiktet

Tillbehör för kroppsbehandling (4cm²): För
användning nedanför halsen

Service

Garanti: 2 års global garanti + 1 extra års garanti
vid produktregistrering inom 90 dagar

Artiklar som ingår

Bruksanvisning: Användarhandbok

Förvaring: Skönhetsfodral

Adapter: 24 V/1500 mA

Tillbehör: Rengöringsduk

Applimeringstid

Underben: 15 min

Armhålor: 2,5 min.

Bikiniinje: 4 min.

Områden i ansiktet: 2 min

