

PHILIPS

Sistema de depilación IPL

Lumea Comfort

Para uso en cuerpo y rostro

22 minutos para las 2 medias piernas

Vida útil >100.000 pulsos de luz

Diseño compacto con cable

SC1981/30



Solución IPL compacta

para evitar la reaparición del vello y tener una piel suave

El sistema de depilación IPL Philips Lumea Comfort hace maravillas para evitar la reaparición del vello facial y corporal. Las ligeras pulsaciones de luz, aplicadas de manera regular, mantendrán tu piel suave como la seda todos los días.

Suavidad duradera

- Eficacia sin esfuerzo
- Disfruta de una piel suave a diario

Sistema de depilación con tecnología IPL

- Adaptada para usarla con seguridad en la comodidad de tu propio hogar

El diseño de Lumea más compacto


- Sin piezas de repuesto ni costes adicionales
- El dispositivo más pequeño y ligero de la gama Lumea

Seguro y eficaz en la cara y el cuerpo

- Cinco posiciones de energía de luz ajustables
- Seguro y efectivo, incluso en las zonas sensibles
- Sensor de color de la piel
- Modo de deslizamiento y flash para una aplicación más cómoda
- Adecuado para todo tipo de vellos y pieles


Destacados

Disfruta de una piel suave a diario

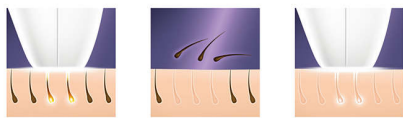

El sistema Philips Lumea aplica sutiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello, por lo que se inhibe su crecimiento desapareciendo de forma natural. Si repites el tratamiento de forma regular, mantendrás una piel suave todos los días.

Eficacia sin esfuerzo

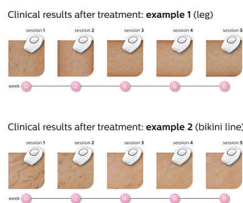

Nuestros estudios clínicos han demostrado una reducción notable del vello con tan solo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente repite el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu pauta de crecimiento del vello personal. - Para aumentar esta imagen, haz clic en la imagen de la galería en la parte superior de esta página

Tecnología IPL



Philips Lumea Comfort utiliza una innovadora tecnología basada en la luz, llamada IPL (del inglés, Intensed Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips ha adaptado esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de forma segura y con resultados eficaces. Philips ha colaborado con expertos del cuidado de la piel para desarrollar esta tecnología. Durante más de 10

años hemos realizado una investigación exhaustiva sobre los consumidores de la tecnología IPL con más de 2000 mujeres.

Vello y tipos de piel adecuados

Haarfarbe Haarkleur Hair color Couleur de poils	Hautton / Huidskleur / Skin tone / Couleur de la peau	1	2	3	4	5	6
Black	1	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Dark brown	1	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Light brown	1	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Dark blonde	1	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Light blonde	1	✗	✗	✗	✗	✗	✗
White	1	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Grey	1	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Philips Lumea Comfort funciona de forma eficaz en el vello rubio oscuro, castaño y moreno (naturales). Como con otros tratamientos basados en la luz, Lumea Comfort NO es efectivo cuando se utiliza sobre vello pelirrojo, rubio claro y blanco o gris. - Para aumentar esta imagen, haz clic en la imagen de la galería en la parte superior de esta página

Zonas de aplicación



Puedes utilizar el dispositivo con seguridad para eliminar el vello facial (labio superior y barbilla) y corporal, incluidas las piernas, axilas, ingles, vientre y brazos.

Cinco posiciones de energía de luz




Philips Lumea Comfort dispone de cinco posiciones de energía de luz ajustables para garantizar un tratamiento suave pero eficaz. Y si las utilizas correctamente, el tratamiento IPL de Philips Lumea es seguro y suave incluso en pieles y zonas sensibles.

Sensor de color de la piel



El exclusivo sensor de color de la piel mide la complejión de la piel tratada al principio de cada sesión y de vez en cuando durante la sesión. Si detecta que el tono de piel es demasiado oscuro para Lumea Comfort, detiene automáticamente la emisión de pulsos.

Modo de deslizamiento y flash

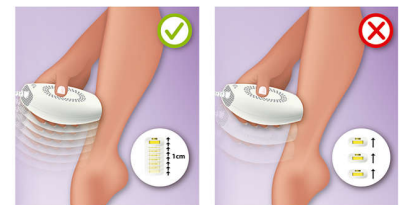

Lumea Comfort permite realizar un movimiento deslizante para que su aplicación resulte más cómoda y continua.

El sistema Lumea más pequeño y ligero

El sistema Philips Lumea Comfort es el más pequeño y ligero de la gama Lumea. Es fácil de sujetar y llega fácilmente a todas las zonas que deseas tratar.

No necesita piezas de repuesto



Philips Lumea Comfort es una solución completa que se vende preparada para funcionar directamente. Y lo que es más importante, no necesita ninguna bombilla de repuesto ni geles.

Especificaciones

Zonas de aplicación

Cuerpo: Brazos, Piernas, Vientre, Bikini, Axilas
Cara: Barbilla, Patillas, Labio superior

Seguridad y posiciones ajustables

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV

Cinco posiciones de energía de luz: Se adapta a tu tipo de piel

Sistema de seguridad integrado: Evita que se produzcan pulsos de luz accidentales

Sensor de tono de piel: Detecta tu tono de piel

Modo de aplicación

Deslizamiento y flash: Para una aplicación con un movimiento sencillo

Paso y flash: Para el tratamiento de zonas curvas

Uso con/sin cable: Con cable

Potencia

Tensión: 100-240 V

Especificaciones técnicas

Lámpara de alto rendimiento: Proporciona <gt/> 100 000 pulsos

Servicios

Garantía: 2 años de garantía completa

Elementos incluidos

Instrucciones de uso: Guía de inicio rápido, Manual del usuario

Adaptador: 24 V/1500 mA

Tiempo de aplicación

Media pierna: 11 minutos

Axilas: 1,5 minutos

Zona del bikini: 1,5 minutos

Cara: 2,5 minutos

