

PHILIPS

IPL-
hårfjerningsenhed

Lumea Prestige

Til brug på kroppen og i ansigtet

15 minutter for at behandle
underbenene

>250.000 lysimpulser

Ledningsfrit design

SC2007/00



Slip for hår, hele tiden*

Philips Lumea Prestige er den mest effektive, ledningsfrie IPL-løsning, der gør underværker for at forhindre ny hårvækst i ansigtet og på kroppen. Skånsomme lysimpulser holder huden silkeblød hver dag ved regelmæssig anvendelse.

Langvarig hårfjerning med IPL-teknologi

- Nyd glat hud hver dag
- Effektiv uden besvær
- Tilpasset til sikker og effektiv brug i hjemmet
- Velegnede til en lang række hår- og hudtyper

Nænsom og effektiv anvendelse i ansigtet og på kroppen

- Sikker og effektiv selv på følsomme steder
- Præcisionstilbehør til sikker ansigtsbehandling
- Stort behandlingsvindue giver hurtig anvendelse
- Skånsom behandling

Maksimal frihed, minimalt besvær

- Trådløs komfort
- Fem justerbare lysenergiindstillinger
- Ingen udskiftelige dele, ingen skjulte udgifter
- Slide and Flash-tilstand for nemmere anvendelse


Vigtigste nyheder

IPL-teknologi



Philips Lumea anvender en innovativ lysbaseret teknologi, der kaldes IPL (Intense Pulsed Light) og stammer fra den teknologi, der anvendes i professionelle skønhedssaloner. Philips har tilpasset denne teknologi og gjort den sikker og effektiv til privat brug. Philips har arbejdet tæt sammen med førende hudspecialister for at udvikle vores banebrydende hårfjerningssystem. I mere end 10 år har vi gennemført omfattende forbrugerundersøgelser med hjælp fra over 2000 frivillige.

Nyd glat hud hver dag

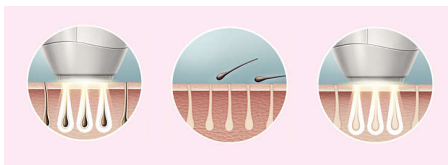

Philips Lumea anvender skånsomme lysimpulser mod hårroden. Som følge heraf reduceres mængden af hår, der vokser på kroppen, gradvist. Ved gentagne behandlinger bliver din hud smukt fri for hår og blød at røre ved.

Effektiv uden besvær



Vores kliniske undersøgelser har vist en markant hårreduktion på helt ned til fire behandlinger med 14 dages mellemrum, som resulterer i glat hud uden hår. For at bevare disse resultater skal du blot gentage

behandlingen, når det er nødvendigt. Tiden mellem behandlingerne kan variere afhængigt af din individuelle hårvækst. - Klik på billedet i billedgalleriet øverst på denne side for at forstørre det.

Velegnede hår- og hudtyper



Philips Lumea er effektiv mod (naturligt) mørkblond, brun og sort hårvækst. Ligesom andre lysbaserede behandlinger virker Philips Lumea IKKE på rødt, lysblond og hvidt/gråt hår. Philips Lumea egner sig heller IKKE til meget mørk hud.

Anvendelsesområder

Hurtig behandling på ben



Stort behandlingsvindue giver hurtig anvendelse på store områder som f.eks. ben.

Ekstra sikkerhed til ansigtet




Præcisionstilbehøret er udstyret med et ekstra integreret lysfilter og giver mulighed for sikker og komfortabel anvendelse på overlæben, hagen og bakkenbarter. Det kan også anvendes på andre følsomme områder på kroppen, f.eks. i armhulerne, ved bikiniområdet og på steder, som er svære at nå.

Skånsom behandling



Skånsom mod din hud.

Trådløs komfort

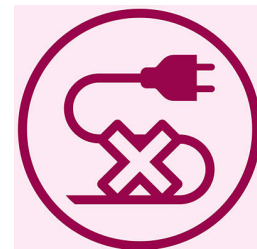

Lumeas unikke ledningsfri design er perfekt til maksimal rækkevidde og brugervenlighed.

Specifikationer

Anvendelsesområder

Body areas: Arme, Ben, Mave, Bikinilinje, Armhuler

Face areas: Hage, Bakkenbarter, Overlæbe

Sikkerhed og justerbare indstillinger

Integreret UV-filer: Beskytter huden mod UV-lys

5 lysenergiindstillinger: Justerbar i forhold til din hudtype

Integreret sikkerhedssystem: Undgå utilsigtede blink

Programtilstand

Slide and Flash: Til praktisk anvendelse

Ledningsbaseret/ledningsfri brug: Ledningsfri

Stamp and Flash: Til behandling på ujævne områder

Strøm

Voltage: 100-240 V

Opladningstid: 100 min.

Driftstid: Minimum 370 blink

Tekniske specifikationer

High performance lamp: Giver <gt/> 250.000 blink

Tilbehør

Præcisionstilbehør (2 cm²): For sikker anvendelse i ansigtet

Kropstilbehør (4 cm²): Til brug fra halsen og nedefter

Service

Garanti: 2 års global reklamationsret

Medfølgende dele

Oplader: Oplader til brug ved forskellige netspændinger

Instructions for use: Brugervejledning

Opbevaring: Luksusetui

Tilbehør: Renseklud

Anvendelsestid

Underben: 8 min.

Armhule: 1 min.

Bikini line: 1 min.

Face areas: 1 min.

