

PHILIPS

IPL-
hårfjerningssystem

Lumea Comfort

Til brug på kroppen og i ansigtet

22 minutter for at behandle
underbenene

Klinisk dokumenteret resultat

120 dages garanti med pengene
tilbage

SC1981/00



Kompakt IPL-løsning

for at forhindre ny hårvækst på glat hud

Philips Lumea Comfort IPL-hårfjerningssystem gør underværker for at forhindre ny hårvækst i ansigtet og på kroppen. Blide lysimpulser holder huden silkeblød hver dag ved regelmæssig anvendelse. Test i 120 dage!

Glathed, der holder længe

- Problemfri og effektiv
- Nyd glat hud hver dag

Hårfjernelse med IPL-teknologi

- Tilpasset til sikker brug hjemme hos dig selv

Mest kompakt Lumea-design

- Ingen udskiftelige dele, ingen skjulte udgifter
- Den mindste og letteste enhed i Lumea-serien

Sikker og effektiv på ansigt og krop

- 5 justerbare lysenergi-indstillinger
- Sikker og effektiv selv på følsomme steder
- Hudfarvesensor
- Slide and Flash-tilstand for nemmere anvendelse
- Velegnet til forskellige hår- og hudtyper

Vigtigste nyheder

Nyd glat hud hver dag



Philips Lumea påvirker håroden med blide lysimpulser, så håret falder af naturligt, og den nye hårvækst hæmmes. Hvis behandlingen gentages med jævne mellemrum, holder du huden glat hver dag.

Problemfri og effektiv

Clinical results after treatment: example 1 (leg)



Clinical results after treatment: example 2 (bikini line)



Vores kliniske test har vist en betydelig reduktion af hårvækst efter kun fire behandlinger med to ugers mellemrum, der resulterer i glat hud uden hår. Disse resultater kan vedligeholdes ved blot at gentage behandlingen efter behov. Tiden mellem behandlinger afhænger af individuel hårvækst. - Forstør dette billede ved at klikke på billedet i billedgalleriet øverst på siden

IPL-teknologi



Philips Lumea Comfort anvender en innovativ lysbaseret teknologi kaldet IPL (Intense Pulsed Light), som stammer fra teknologien, der anvendes i professionelle skønhedssaloner. Philips har tilpasset denne teknologi til effektiv brug inden for dit eget hjemssikre og komfortable rammer. Philips arbejder tæt sammen med hudplejeksperter for at udvikle denne teknologi. I mere end 10 år har Philips

foretaget omfattende forbrugerundersøgelser vedrørende IPL-teknologi med mere end 2000 kvinder.

Velegnede hår- og hudtyper

Haarfarbe Haarkleur Hair color Couleur de poils	Hautton / Huidskleur / Skin tone / Couleur de la peau	1	2	3	4	5	6
Black	1	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Dark brown	2	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Light brown	3	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Dark blonde	4	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Light blonde	5	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Red	6	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Philips Lumea Comfort er effektiv mod (naturligt) mørkblond, brun og sort hårvækst. Som med andre lysbaserede behandlinger fungerer Lumea Comfort IKKE på rødt, lysblondt eller hvidt/gråt hår. - Forstør dette billede ved at klikke på billedet i billedgalleriet øverst på siden

Anvendelsesområder



Du kan trygt bruge den til hårfjerning i ansigtet (overlæbe, hage) og fra forskellige kropszoner som ben, armhuler, bikiniområde, mave og arme.

5 lysenergiindstillinger




Philips Lumea har 5 justerbare lysenergiindstillinger, der sikrer nænsom, men effektiv behandling. Ved korrekt anvendelse af er Philips Lumeas IPL-behandlingen også sikker og skånsom mod huden og følsomme kropszoner.

Hudfarvesensor



Den unikke hudfarvesensor måler den behandlede hudfarve ved begyndelsen af hver behandling og af og til under behandlingen. Hvis den registrerer en hudfarve, som er for mørk Lumea Comfort, hører den automatisk op med at udsende impulser.

Slide and Flash-tilstand

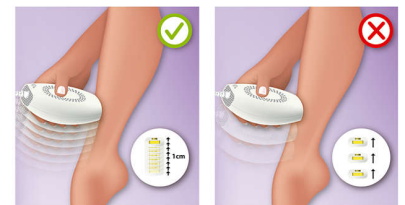

Lumea Comfort gør en glidende bevægelse mulig for at opnå en mere bekvem og konstant anvendelse.

Mindste og letteste Lumea

Philips Lumea Comfort er det mindste og letteste i Lumea-serien. Den er nem at holde, og det er let at nå alle de områder, du vil behandle.

Ingen udskiftelige dele



Philips Lumea Comfort er en komplet løsning, der leveres klar til brug med det samme. Og mere vigtigt: Du skal hverken bruge udskiftningspærer eller gel.

Specifikationer

Anvendelsesområder

Body areas: Arme, Ben, Mave, Bikinilinje, Armhuler

Face areas: Hage, Bakkenbarter, Overlæbe

Sikkerhed og justerbare indstillinger

Integreret UV-filer: Beskytter huden mod UV-lys

5 lysenergiindstillinger: Justerbar i forhold til din hudtype

Integreret sikkerhedssystem: Undgå utilsigtede blink

Hudfarvesensor: Registrerer din hudfarve

Programtilstand

Slide and Flash: For nem bevægelseanvendelse

Step and Flash: Til behandling på ujævne områder

Ledningsbaseret/ledningsfri brug: Med ledning

Strøm

Voltage: 100-240 V

Tekniske specifikationer

High performance lamp: Giver > 100.000 blink

Service

Garanti: 2 års global reklamationsret

Medfølgende dele

Instructions for use: Lynhåndbog,

Brugervejledning

Adapter: 12V/1500mA

Anvendelsestid

Underben: 11 min.

Armhule: 1,5 min.

Bikini line: 1,5 min.

Face areas: 2,5 min.

