

PHILIPS

IPL szőrtelenítő
rendszer

Lumea Comfort

A testen és az arcon való
használathoz

22 perc a lábszárak kezelésére

Élettartam <gt/>100 000
fényimpulzus

Kompakt, vezetékes kivitel

SC1981/00



Kompakt megoldás IPL-technológiával

a szőrszálak újránövekedése ellen, a sima bőrért

A Philips Lumea Comfort IPL szőrtelenítő rendszer lenyűgöző módon megakadályozza a szőrszálak újránövekedését az arcon és a test teljes felületén. A rendszeresen alkalmazott gyengéd fényimpulzusoknak köszönhetően mindennap élvezheti bőre simaságát.

Hosszan tartó selymesség

- Egyszerűen hatékony
- Élvezze mindennap bőre simaságát!

Szőrtelenítés IPL technológiával

- Biztonságos használatra tervezve, otthona kényelmében

A legkisebb méretű Lumea kialakítás

- Nincs szükség cserealkatrészekre, nincsenek rejtett költségek
- A Lumea termékcsalád legkisebb és legkönnyebb készüléke

Biztonságos és hatékony az arcon és a testen

- Öt állítható fényenergia-beállítás
- Biztonságos és hatékony az érzékenyebb területeken is
- Bőrszínérzékkelő
- „Slide and flash” mód a még kényelmesebb alkalmazhatóság érdekében
- Különböző haj- és bőrtípusokhoz


Fénypontok

Élvezze mindennap bőre simaságát!



A Philips Lumea gyengéd fényimpulzusokat bocsát ki a szőrszál gyökeréhez. Ennek hatására a szőr természetes módon kihullik és az újranövekedés gátolva van. Ha rendszeresen megismétli a kezelést, a bőre mindennap sima lesz.

Egyszerűen hatékony

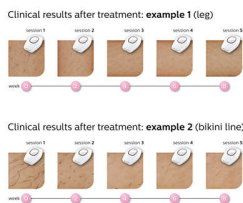

Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy alig négy, kéthetente végzett kezelés hatására jelentősen csökkent a szőrzet, sima bőrfelületet eredményezve. Az eredmények fenntartása érdekében egyszerűen ismétlje meg a kezelést, ha szükséges. A kezelések között eltelt idő változhat a szőrszálak egyéni újranövekedése szerint. – A kép nagyításához kattintson a képre az oldal tetején található képgalériában

IPL technológia



A Philips Lumea Comfort egy innovatív fényalapú technológiát, az IPL-t (intenzív pulzáló fény) alkalmazza, amelyet professzionális szépségszalonokban használt technológiából fejlesztettek ki. A Philips módosította ezt a technológiát, hogy Ön azt otthona biztonságában és kényelmében is hatékonyan használhassa. A Philips bőrápolási szakemberekkel szorosan együttműködve fejlesztette ki ezt a technológiát. Több mint 10

éven keresztül átfogó fogyasztói kutatást végeztünk az IPL technológián több mint 2000 nő segítségével.

Megfelelő szőrzet- és bőrtípusok

Haarfarbe Haarkleur Hair color Couleur de poils	Hautton / Huidskleur / Skin tone / Couleur de la peau					
Light blonde	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Golden blonde	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Dark blonde	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Light brown	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Dark brown	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Black	✗	✗	✗	✗	✗	✗

A Philips Lumea Comfort hatékony eredményeket ér el (természetes) sötét szőke, barna és fekete szőrzettípusokon. Ahogyan más fényalapú kezelések esetében is tapasztalható, a Lumea Comfort NEM hatékony vörös, világos szőke és fehér/ősz szőrzeten alkalmazva. – A kép nagyításához kattintson a képre az oldal tetején található képgalériában

Alkalmazási területek



Nyugodtan használhatja az arc (felső ajak, áll) és a test szőrtelenítésére (lábak, hónalj, bikinivonal, has és karok).

5 fényenergia-beállítás




A Philips Lumea Comfort öt állítható fényenergia-beállításának köszönhetően biztosított a gyengéd, ugyanakkor hatékony kezelést. Megfelelően alkalmazva a Philips Lumea IP-kezelése biztonságos és gyengéd, még érzékeny bőrön és kényes területeken is.

Bőrszínérzékelő



Az egyedülálló bőrszínérzékelő minden egyes munkamenet előtt – alkalmanként munkamenet közben – feltérképezi a kezelt bőrszínét. Ha olyan bőrszínét fedez fel, mely túl sötét a Lumea Comfort számára, automatikusan felhagy az impulzuskibocsátással.

„Slide and flash” mód

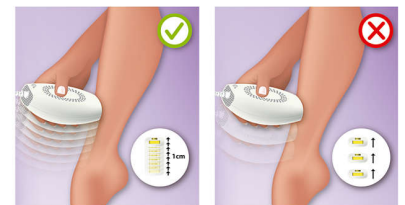

A kényelmesebb és folyamatos alkalmazás érdekében a Lumea Comfort csúsztatott mozgást tesz lehetővé.

A legkisebb és legkönnyebb Lumea

A Philips Lumea Comfort a Lumea termékcsalád legkisebb és legkönnyebb készüléke. Könnyű tartani és könnyen elérhető vele minden kezelni kívánt terület.

Nincs szükség cserealkatrészekre



A Philips Lumea Comfort egy teljes körű megoldás, és a dobozból kivéve azonnal üzemkész. Ami még ennél is fontosabb, nincs szükség cserelámpára vagy gélekre.

Műszaki adatok

Alkalmazási területek

Testterületek: Kar, Láb, Has, Bikinivonal, Hónalj
Arc: Áll, Pajesz, Felső ajak

Biztonság és állítható beállítások

Beépített UV-szűrő: Védelmet nyújt a bőr számára az UV-sugaraktól

5 fényenergia-beállítás: Bőrtípushoz állítható

Beépített biztonsági rendszer: Véletlen villanás megakadályozása

Bőrtónus-érzékelő: Érzékeli a bőrtónusát

Alkalmazás módja

Csúsztat és villant: A könnyedebb mozdulatokért

Lép és villant: A hajlatok kezeléséhez

Vezetékes/vezeték nélküli használat:

Vezetékes

Energiaellátás

Feszültség: 100–240 V

Műszaki adatok

Nagy teljesítményű lámpa: Több mint 100 000 villanást biztosít

Szerviz

Jótállás: Kétéves globális garancia

Tartozékok

Használati útmutató: Gyors üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv

Adapter: 12 V / 1500 mA

Alkalmazási idő

Alsó lábszár: 11 min

Hónalj: 1,5 min

Bikinvonal: 1,5 min

Arc: 2,5 min

