

# PHILIPS

Systém na odstraňovanie  
chlípkov IPL

Lumea Comfort

Pre použitie na tele a tvári

Ošetrovanie nôh od kolien dolu za  
22 min.

Životnosť > 100 000  
svetelných impulzov

SC1981/00



## Kompaktné riešenie IPL

zabraňuje dorastaniu chlípok pre ešte hladšiu pokožku

Systém na odstraňovanie chlípok Philips Lumea Comfort IPL je naozaj zázračné riešenie, ktoré zabraňuje dorastaniu chlípok na tvári aj na celom tele. Pravidelné pôsobenie jemných svetelných impulzov zaručí hodvábne hladkú pokožku každý deň.

### Dlhotrvajúca hladkosť

- Skvelé výsledky bez veľkej námahy
- Vychutnajte si jemnú pokožku každý deň

### Odstraňovanie chlípok pomocou technológie IPL

- Prispôsobená na bezpečné používanie v pohodlí vašej domácnosti

### Najkompaktnejší dizajn Lumea


- Žiadne náhradné diely, žiadne skryté náklady
- Najmenšie a najľahšie zariadenie v sortimente modelov Lumea

### Bezpečná a účinná na tvári aj na tele

- Päť nastaviteľných úrovní intenzity svetla
- Bezpečné a účinné použitie aj v citlivých oblastiach
- Snímač farby pokožky
- Režim zábleskov pri klzaní pre jednoduchšie používanie
- Vhodné pre rôzne typy chlípok a pokožky


# Hlavné prvky

## Vychutnajte si jemnú pokožku každý deň

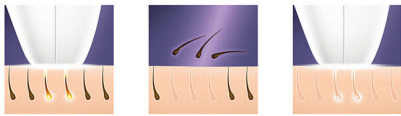

Zariadenie Philips Lumea aplikuje na koreňky chlčkov jemné pulzujúce svetlo. V dôsledku tohto procesu chlčky prirodzene vypadnú a ich opätovný rast sa spomalí. Pravidelným používaním dosiahnete hladkú pokožku každý deň.

## Skvelé výsledky bez veľkej námahy

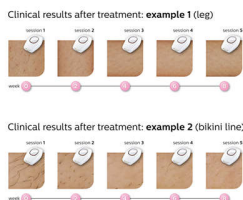

Naše klinické štúdie preukázali výrazné zníženie množstva chlčkov už po štyroch použitíach raz za dva týždne, výsledkom čoho je hladká pokožka bez chlčkov. Na zachovanie týchto výsledkov stačí zopakovať použitie podľa potreby. Čas medzi jednotlivými použitíami sa môže líšiť v závislosti od individuálneho tempa rastu chlčkov. - Na zväčšenie tohto obrázka kliknite na obrázok v galérii v homej časti tejto stránky

## Technológia IPL



System Philips Lumea Comfort používa inovačnú svetelnú technológiu IPL (Intense Pulsed Light, intenzívne pulzujúce svetlo), ktorá je založená na technológii používanej v profesionálnych salónoch krásy. Spoločnosť Philips prispôbila túto technológiu na bezpečné a efektívne používanie v pohodlí vašej domácnosti. Spoločnosť Philips pri vývoji tejto technológii úzko spolupracovala s odborníkmi na starostlivosť o pokožku.

Súčasťou tohto procesu bol aj rozsiahly spotrebiteľský výskum technológii IPL, ktorý trval viac než 10 rokov a zúčastnilo sa ho vyše 2000 žien.

## Vhodné typy chlčkov a pokožky

Haarfarbe Haarfarbe Hair color Couleur de poils	Hautton / Huidskleur / Skin tone / Couleur de la peau	Light	Light-Medium	Medium	Dark-Medium	Dark	Very Dark
Light	Light	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Light-Medium	Light	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Light-Medium	Light-Medium	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Light-Medium	Medium	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Light-Medium	Dark-Medium	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Light-Medium	Dark	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Light-Medium	Very Dark	✗	✗	✗	✗	✗	✗

System Philips Lumea Comfort účinne funguje pri (prirodzene) tmavších blond chlčkoch, hnedých a čiernych chlčkoch. Podobne ako v prípade iných svetelných zákrokov system Lumea Comfort NIE JE účinný pri ryšavých, svetlých blond chlčkoch ani bielych či sivých chlčkoch. - Na zväčšenie tohto obrázka kliknite na obrázok v galérii v homej časti tejto stránky

## Oblasti aplikácie



Môžete bezpečne používať na odstraňovanie chlčkov na tvári (horná pera, brada) a rôznych oblastiach tela vrátane nôh, podpazušia, oblasti bikín, brucha a rúk.

## 5 nastavení intenzity svetelnej energie




System Philips Lumea Comfort ponúka päť nastaviteľných úrovni intenzity svetla pre jemné a účinné ošetrenie. Ak sa system Philips Lumea používa správne, ošetrenie svetlom pomocou technológii IPL je bezpečné a šetrné aj v prípade citlivej pokožky alebo v citlivých oblastiach tela.

## Snímač farby pokožky



Jedinečný snímač farby pokožky meria typ pokožky pred začiatkom každého ošetrenia a niekedy aj počas neho. Ak rozpozná odtieň pokožky, ktorý je na použitie systému Lumea Comfort príliš tmavý, automaticky zastaví aplikáciu impulzov.

## Režim zábleskov pri kĺzaní

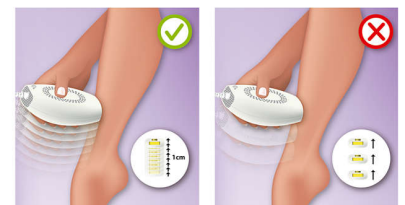

System Lumea Comfort umožňuje kĺzanie zariadenia pre jednoduchšie a súvislé používanie.

## Najmenší a najlahší dizajn zariadenia Lumea

Zariadenie Philips Lumea Comfort je najmenší a najlahší model v sortimente produktov Lumea. Jednoducho sa drží a ľahko ním dosiahnete do všetkých ošetrovaných oblastí.

## Nie sú potrebné žiadne náhradné diely



Philips Lumea Comfort predstavuje kompletne riešenie, ktoré bude fungovať ihneď po vybalení. Navyše nie sú potrebné ani žiadne náhradné lampy či gély.

# Technické údaje

## Príkon

Napätie: 100 - 240 V

## Servis

Záruka: 2-ročná celosvetová záruka

## Technical specifications

**High performance lamp:** Výstup <gt/>  
100 000 zábleskov

## Application areas

**Body areas:** Ruky, Nohy, Brucho, Oblasť bikín,  
Podpazušia

**Face areas:** Brada, Kotlety, Horná pera

## Items included

**Instructions for use:** Stručná príručka  
spustenia, Návod na použitie

**Adapter:** 12 V/1500 mA

## Safety and adjustable settings

**Integrated UV filter:** Chrání pokožku pred UV  
žiarením

**5 light energy settings:** Prispôsobiteľné typu  
pokožky

**Integrated safety system:** Zabraňuje  
neúmyselnej aktivácii zábleskov

**Skin Tone sensor:** Rozpoznáva odtieň vašej  
pokožky

## Application time

**Lower leg:** 11 min.

**Armpit:** 1,5 min.

**Bikini line:** 1,5 min.

**Face areas:** 2,5 min.

## Application mode

**Slide and Flash:** Pre jednoduché používanie  
súvislým pohybom

**Záblesky pri postupnom posúvaní:** Na  
ošetrovanie zakrivených oblastí

**Corded / cordless use:** Káblové

