

PHILIPS

IPL – fotoepilaator

Lumea IPL 7000 Series

5 intensiivsus taset

2 tarvikut: keha, nägu

Lumea IPL rakendus

Juhtmega kasutamine



SC1997/00



Suurepäraseid tulemusi, suur väärtus

Nautige karvavaba siledat nahka 12 kuud*

Meie Lumea IPL 7000 seeriaga saate karvadeta sileda naha. Erinevate kehapiirkondade jaoks mõeldud tarvikute abil on hooldused õrnad ja tõhusad.

Õrn ja tõhus naha kauakestva sileduse tagamiseks

- Lihtne ja tõhus, töötatud välja koos dermatoloogidega
- Kiired tulemused ainult kaks korda kuus kasutamisel
- Eriti pikk kaabel tagab kasutamise ajal suurema paindlikkuse

Täielik lahendus näole ja kehale

- Täielik lahendus näole ja kehale koos 2 tarvikuga
- Sobib väga erinevatele nahatoonidele ja juuksevärvidele

Isikupärastatud IPL karvaemaldus

- Isikupärane toiming rakenduse Philips Lumea IPL abil
- Nahatooni andur ja 5 tugevuseaset


Esiletõstetud tooted

2 eritarvikut




Erinevad keha- ja näopead töötavad kiiresti, täpselt ja õrnalt, nii et neid saab kasutada ka tundlikes piirkondades. Näotarvikul on täpseks töötlemiseks sisseehitatud valgusfilter.

Philips Lumea IPL rakendus

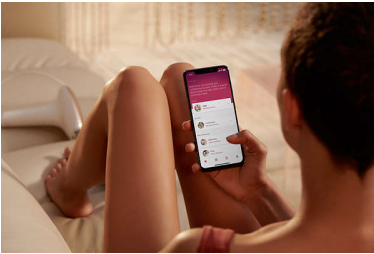

Meie tasuta juhendamiskrakendus aitab teil kavandada ja järgida oma hoolduskavasid, seejärel juhatab teid samm-sammult läbi iga seansi. Selle on alla laadinud rohkem kui 2,1 miljonit kasutajat.

Töötatud välja koos dermatoloogidega

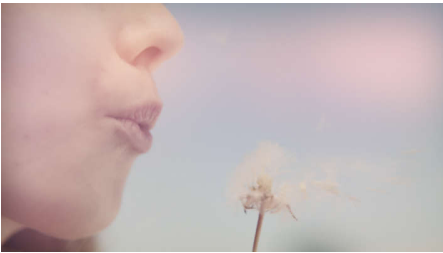

Juhtiva tervishoiutehnoloogia ettevõttena töötas Philips koos dermatoloogidega välja Lumea IPL-i, et saaksite seda lihtsalt ja

tõhusalt kodus kasutada. Professionaalsete ilusalongide tehnoloogiat järgiv Lumea IPL tagab õrna hoolduse ka tundlikes piirkondades.

Kaks korda kuus tagab kiired tulemused



Algul kasutada iga kahe nädala tagant – poole vähem hoolduskordi kui teiste kaubamärkide puhul. Sellele järgneb hooldus üks kord kuus. Mõlema sääre hoolduseks kulub 15 minutit.

Nahatooni andur



Mugava kasutuskogemuse saamiseks saate leida sobiva 5 tugevuseastme seast. Nahatooni andur ei lase teil töödelda nahapiirkondi, mis on IPL-hoolduse jaoks tumedad.

Eriti pikk kaabel



Lihtne kasutada tänu eriti pikale juhtmele, mis tagab mugava juurdepääsu ja parema liikumise.

Paljude naha- ja juuksetüüpide jaoks

Suitable skin tones



Suitable body hair colors



IPL vajab kontrasti juuksevärvi pigmendi ja nahatooni pigmendi vahel, seetõttu toimib loomulikult tumedblondidel, pruunidel ja mustadel juustel ning nahatoonidel heledast kuni keskmiselt pruunini (I-IV).

Spetsifikatsioon

Ohutus ja kohandatavad sätted

Integreeritud UV-filter: Kaitseb nahka UV-valguse eest

Viis valgusenergia sätet: Reguleeritav vastavalt nahatüübile

Integreeritud ohutussüsteem: Vältib tahtmatut välgutamist

Kasutusrežiim

Libista ja välguta: Kiireks kasutamiseks

Juhtmega / juhtmeta kasutamine: Juhtmega kasutamine

Markeeri ja välguta: Väikeste piirkondade hooldamiseks

Võimsus

Juhtmega kasutamine

Tehnilised andmed

Suure jõudlusega lamp: Vastupidav, 250 000 välgutust, mis vastab lambi 20-aastasele tööeale**

Pinge: 100–240 V

Lisatarvikud

Täppisotsak (2 cm²): Ohutuks kasutamiseks näol

Kehakarvade eemaldamise tarvik (4 cm²): Kasutamiseks allpool kaela

Teenindus

Garantii: 2-aastane üldgarantii + 1 lisa-aasta garantiid toote registreerimisel 90 päeva jooksul

Komplektis olevad esemed

Kasutusjuhend: Kasutusjuhend

Hoiundamine: Kosmeetikakott

Adapter: 24 V / 1500 mA

Tarvik: Puhastuslapp

Kasutusaeg

Sääreosa: 15 minutit

Kaenlaalused: 2,5 min

Bikiiniijoon: 4 min

Näopiirkonnad: 2 minutit

Tarvikute tehnilised andmed

Tarvik kehal kasutamiseks: Töötlusala suurus: 4,0 cm², Kehahooldus: jalad, käed, kõht ja kaenlaalused

Otsak näol kasutamiseks: Töötlusala suurus: 2 cm², lisafilter, Näohooldus: ülakuul, lõuaosa ja lõualuu

