

# PHILIPS

Débitmètre de  
pointe


PersonalBest

Paramèt. de trois couleurs  
différentes

Gardez le contrôle

Adapté aux enfants et aux  
adultes

HH1309

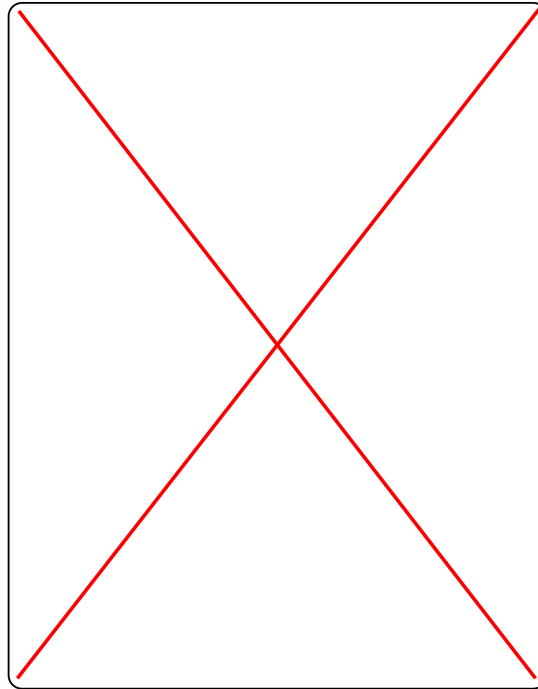

## Gardez un œil sur votre asthme

### Surveillance simplifiée de votre débit de pointe

Grâce à son design portable, compact et léger, le Philips PersonalBest vous permet de surveiller très facilement votre débit de pointe, tout au long de la journée. La mesure de ce paramètre est un élément essentiel de la gestion de vos symptômes de l'asthme.

#### Fonctionnalités intuitives

- Technique simple
- Les valeurs rapides et simples accompagnent votre traitement anti-asthmatique
- Mallette de protection pour le garder à l'abri

#### Mesures précises

- Configurez l'appareil afin de mesurer votre plage personnelle

#### Entretien facile

- Utilisez simplement du savon et de l'eau

# Points forts

## Surveillance facile du débit de pointe

La poignée extensible vous permet de tenir votre main éloignée des indicateurs, vous pouvez ainsi les visualiser sans difficulté.

## Trois couleurs

Les indicateurs de trois couleurs différentes permettent de définir trois zones de mesures. Il vous est ainsi plus facile de voir si votre état ou celui de votre enfant est stable ou s'il se dégrade.

## Mesures réglables

Les indicateurs de couleurs différentes peuvent être définis par votre professionnel de santé afin de représenter votre meilleur débit de pointe, selon les pourcentages suivants : vert :

80 – 100 % de votre meilleur débit de pointe ;  
jaune 50 – 80 % de votre meilleur débit de pointe ;  
rouge : 50 % ou moins de votre meilleur débit de pointe

## Stockage et protection

La poignée extensible se transforme en compartiment de stockage solide afin que votre débitmètre reste protégé.

## Nettoyage simple

PersonalBest peut être lavé avec de l'eau chaude et du savon doux liquide ou sur le panier supérieur d'un lave-vaisselle puis séché à l'air libre.

# Caractéristiques

## Design

**Indicateurs à code couleur:** 3-zone asthma management

## Product details

**Appareil:** ABS plastic

**Couvercle et poignée:** Polypropylene

**Compteur:** Hot-stamped, alcohol-resistant

## Performance data

**Précision:** +/- 10% or 10 L/min

**Répétabilité:** Inférieure ou égale à 5 % ou 10 l/min

**Linéarité:** Inférieure ou égale à 5 % ou 10 l/min

**Résistance au flux:** Inférieure ou égale à 0,35 kPa/l/min

**Fréquence de réponse:** Inférieure ou égale à 12 % ou 15 l/min

## Calibration data

**Plage de mesure:** 60–800 L/min

## Scale resolution

**10 L/min:** from 60 – 700 L/min

**20 L/min:** from 700 – 800 L/min

