

PHILIPS

Forstøverkompressorsystem
til barn

Sami the Seal

Bordstativehet for
hjemmebruk

Behandling i 6–8 minutter*

*Bruk av en dose Salbutamol på
2,5 ml

Utformet for barn

HH1304



Gjør behandling moro

Forstøverkompressorsystemet Selen Sami er utformet som en sel for å motivere barn til å gjennomføre forstøverbehandlingen.

Utprøvd SideStream-teknologi

- Effektiv levering av legemidler
- Produserer aerosol med gjennomført høy kvalitet

Laget spesielt for barn

- Effektiv, pålitelig og vennlig
- Søt og effektiv

Korte behandlingstider

- Behandling i 6–8 minutter*

For vanlige medisiner

- Kompatibel med vanlige reseptbelagte medisiner

Høydepunkter

Gjør behandling moro



Selen Sami, et kompressorsystem for forstøvning, kombinerer kraft og pålitelighet med en barnevennlig og søt utforming for å gi deg og barnet en mer brukervennlig behandling. Kompressorens bunn er vektbelastet for å gi ekstra stabilitet.

Tucker-barnemaske



Den søte skilpaddemasken vår heter Tucker. Masken er laget av et mykt og fleksibelt materiale som tilpasser seg konturene i barnets ansikt. Den har også en ventilutforming som hjelper til med å styre medisiner vekk fra barnets øyne.


Rask og effektiv behandling



Vår SideStream-forstøver er spesielt utformet for å holde barnets behandlingstider så korte som mulig. Når selen Sami skyver luft gjennom røret, trekkes ekstra luft inn gjennom toppen av finfordeleren for å skape rask

gjennomstrømning av aerosolmedisiner som barnet skal inhalere. Behandlinger kan ta så lite som 6 minutter*

Utprøvd forstøverteknologi

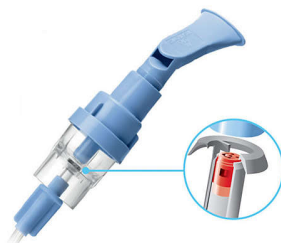

Barnet får hver gang den samme høye kvaliteten på aerosolbehandlingen. SideStream er laget for å tåle hyppig bruk, og den vil ha den samme gode effektiviteten helt til det er tid for å bytte.

Flere konfigurasjoner



Den mørkeblå SideStream-forstøveren til engangsbruk kan brukes i to uker før den må skiftes ut. Engangsforstøverposen gir stabil levering av legemidler gang på gang, og kan brukes med de fleste vanlige reseptbelagte medisiner.

Allsidighet



Selen Sami er utformet for bruk med de fleste aerosolmedikamenter som skrives ut for vanlige lungesykdommer.

Spesifikasjoner

Design

Reliable and appealing: Child-friendly

Operating parameters

Operating mode: Continuous

Performance average flow rate: 6 LPM @ 10 psig

Thermal fuse: Functioning temp 130 degrees C

Driftsparametere

Maximum pressure: 29–43.5 psi

Produktdetaljer

Size: 226mm x 155mm x 267mm

Warranty: 5 years

Treatment time (6–8 minutes*): * 2.5ml Salbutamol dose

Product details

Electrical requirements: 120VAC–60 Hz

Power: 120 VA

Produktdetaljer

Vekt: 3.5 lbs

