

PHILIPS

 Product Picture

Umidificador
aquecido

DreamStation Go

O umidificador portátil mais fino¹

Usa água da torneira ou mineral³

Tecnologia de economia de
água

Funciona com qualquer
máscara²

HH1531/04

Umidificação inteligente. A noite toda.

Não desista do conforto da umidificação aquecida quando estiver em trânsito. Com sua tecnologia de economia de água, a conveniência de usar água da torneira e um design compacto, você pode desfrutar da umidificação aquecida em qualquer lugar.

Umidificador aquecido


- Use qualquer máscara que quiser
- Liberdade para usar água da torneira³
- Gerencia o uso da água uniformemente para maior conforto durante a noite
- Umidificação inteligente. A noite toda.
- Design leve e compacto facilita o acondicionamento e o transporte

Destques

Design leve

O umidificador aquecido DreamStation Go foi projetado para facilitar o acondicionamento. É o umidificador aquecido portátil mais fino entre as principais marcas de PAP⁵, por isso é fácil levar em viagens por terra, mar ou ar.

Liberdade para usar água da torneira³

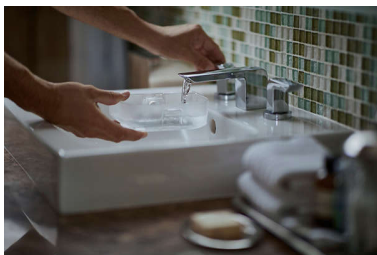

Com a liberdade de poder usar água da torneira, água mineral ou destilada³, o umidificador aquecido DreamStation Go reduz o inconveniente de ter de carregar recipientes pesados e volumosos ou precisar de água destilada em seu destino. Isso significa que você pode optar por viajar com pouco peso e ainda desfrutar do mesmo conforto da umidificação aquecida que a que tem acesso em sua casa.

Monitora e ajusta o tratamento

O DreamStation Go apresenta a tecnologia de economia de água projetada para proporcionar uma noite inteira de umidificação aquecida,⁴ monitorando ativamente as condições ambientais e as configurações do tratamento e ajustando automaticamente a entrega de umidade quando o tempo alvo do umidificador estiver ativado. Além disso, no caso de você encher de menos ou esquecer de encher o umidificador, nosso recurso de desligamento da placa do aquecedor será


acionado para impedir que o ar seco e desconfortável chegue até você pelo restante da noite.

Tecnologia de economia de água



A tecnologia de economia de água do umidificador aquecido DreamStation Go se adapta a variadas condições ambientais para proporcionar umidificação uniforme durante uma noite inteira de sono.⁴ Você pode desfrutar do mesmo conforto que de uma noite em sua casa, independentemente de onde estiver.

Funciona com qualquer máscara

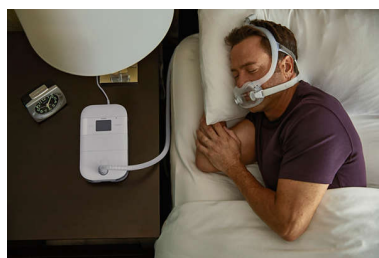

Quando você encontra uma máscara com a qual se sente confortável, a última coisa que você quer é ser forçado a ter de trocá-la durante a viagem. O umidificador aquecido DreamStation Go foi projetado para funcionar com qualquer máscara, para que você possa desfrutar da umidificação aquecida em situações de trânsito, com o conforto de sua própria máscara.²

Especificações

Detalhes do umidificador

Size: 14,7 cm x 5,9 cm x 15,1 cm

Weight: 344,7 g

Humidifier Capacity: 240 ml

Tubing compatibility: Tubulação padrão flexível de 12 mm, 15 mm e 22 mm

Water compatibility: Destilada, da torneira, mineral*

Humidifier usage while on Battery power: Não

Warranty: 2 anos



* 1. Quando comparado com Transcend, HDM Z1, AirMini (não oferece umidificador aquecido), Devilbiss

* 2. DreamStation Go é equipado com um adaptador universal, projetado para ajustar-se a todas as conexões OD padrão de 22mm.

* 3. Em áreas de água muito dura, recomenda-se o uso de água destilada ou mineral.

* 4. Ajusta a saída de umidificação quando o tempo alvo de economia de água está ativado. Consulte o Manual do Usuário para mais informações.

* 5. Quando comparado com ResMed AirSense, AirStart; Devilbiss IntelliPAP 1 e IntelliPAP 2; Fisher e Paykel – SleepStyle, Icon