

# PHILIPS

 Product Picture

Umidificador  
aquecido

DreamStation Go

O umidificador portátil mais  
fino<sup>1</sup>

Aceita água da torneira ou  
mineral<sup>3</sup>

Tecnologia de economia de  
água

Funciona com qualquer  
máscara<sup>2</sup>

HH1531/08

## Umidificação inteligente. A noite toda.

Não desista do conforto da umidificação aquecida quando estiver em movimento. Graças à tecnologia de economia de água, à comodidade de usar água da torneira e a um design compacto, você pode usar a umidificação aquecida em qualquer lugar.

### **Umidificador aquecido**


- Use qualquer máscara que quiser
- Liberdade para usar água da torneira<sup>3</sup>
- Gerencia o uso da água uniformemente para maior conforto durante a noite
- Umidificação inteligente. A noite toda.
- Design leve e compacto facilita o acondicionamento e o transporte

# Destques

## Design leve

O umidificador aquecido DreamStation Go foi projetado para facilitar o acondicionamento. É o umidificador aquecido portátil mais fino entre as principais marcas de PAP<sup>5</sup>, por isso é fácil levar em viagens por terra, mar ou ar.

## Liberdade para usar água da torneira<sup>3</sup>

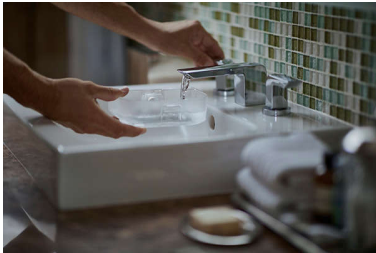

Com a liberdade de poder usar água da torneira, água mineral ou destilada<sup>3</sup>, o umidificador aquecido DreamStation Go reduz o inconveniente de ter de carregar recipientes pesados e volumosos ou precisar de água destilada em seu destino. Isso significa que você pode optar por viajar com pouco peso e ainda desfrutar do mesmo conforto da umidificação aquecida que a que tem acesso em sua casa.

## Monitora e ajusta o tratamento

O DreamStation Go apresenta a tecnologia de economia de água projetada para proporcionar uma noite inteira de umidificação aquecida,<sup>4</sup> monitorando ativamente as condições ambientais e as configurações do tratamento e ajustando automaticamente a entrega de umidade quando o tempo alvo do umidificador estiver ativado. Além disso, no caso de você encher de menos ou esquecer de encher o umidificador, nosso recurso de desligamento

da placa do aquecedor será acionado para impedir que o ar seco e desconfortável chegue até você pelo restante da noite.

## Tecnologia de economia de água



A tecnologia de economia de água do umidificador aquecido DreamStation Go se adapta a variadas condições ambientais para proporcionar umidificação uniforme durante uma noite inteira de sono.<sup>4</sup> Você pode desfrutar do mesmo conforto que de uma noite em sua casa, independentemente de onde estiver.

## Funciona com qualquer máscara



Quando você encontra uma máscara com a qual se sente confortável, a última coisa que você quer é ser forçado a ter de trocá-la durante a viagem. O umidificador aquecido DreamStation Go foi projetado para funcionar com qualquer máscara, para que você possa desfrutar da umidificação aquecida em situações de trânsito, com o conforto de sua própria máscara.<sup>2</sup>

# Especificações

## Detalhes do umidificador

**Size:** 14,7cm x 5,9 cm x 15,1 cm

**Weight:** 344,7 g

**Humidifier Capacity:** 240 ml

**Tubing compatibility:** Tubulação padrão flexível de 12 mm, 15 mm e 22 mm

**Water compatibility:** Destilada, da torneira, mineral\*

**Humidifier usage while on Battery power:** Não

**Warranty:** 2 anos



\* 1. Quando comparado com Transcend, HDM Z1, AirMini (não oferece umidificador aquecido), Devilbiss  
\* 2. O DreamStation Go vem equipado com um adaptador universal, projetado para ajustar-se a todas as conexões OD padrão de 22 mm.  
\* 3. Em áreas com grande presença de depósitos minerais na água, recomenda-se o uso de água destilada ou engarrafada.  
\* 4. Ajusta a saída de umidificação quando a meta de tempo de economia de água está ativada. Consulte o Manual de Instruções para mais informações.  
\* 5. Quando comparado com ResMed AirSense, AirStart; Devilbiss IntelliPAP 1 e IntelliPAP 2; Fisher e Paykel – SleepStyle, Icon