

PHILIPS

AVENT

Smart øretermometer

uGrow-tilsluttet

Hurtigt og nøjagtigt

Behageligt og letanvendeligt



SCH740/21



Måler og gemmer dit barns temperatur

Nøjagtigt, hurtigt, uGrow-tilsluttet øretermometer

Det smarte Philips Avent-øretermometer gør det muligt at aflæse temperaturer hurtigt og præcist samt at gemme dem direkte på din smartenhed ved hjælp af uGrow-appen.

uGrow-tilsluttet

- En del af uGrow-familien med tilsluttede produkter
- Spor og få en bedre forståelse af dit barns temperatur
- Opretter forbindelse til uGrow-appen via Bluetooth® Smart

Hurtigt og nøjagtigt

- Med ét enkelt tryk har du på to sekunder en nøjagtig aflæsning
- Nøjagtige resultater $\pm 0,2^{\circ}\text{C}/\pm 0,4^{\circ}\text{F}$
- Rødt LED-display til hurtig angivelse af høj temperatur
- Viser resultater i celsius og fahrenheit

Behageligt og letanvendeligt

- Designet til nem og komfortabel måling i øret*



asimpleswitch.com

Vigtigste nyheder

Et uGrow-tilsluttet produkt



Det smarte Philips Avent-øretermometer har forbindelse med uGrow-appen. Verdens første medicinske babyapp med tilsluttede enheder giver dig vigtig personlig rådgivning. Lad uGrow hjælpe dig med at opdage mønstre og understøtte dit barns sunde udvikling.

Spør og registrer




Det smarte Philips Avent-øretermometer tager hurtigt og nøjagtigt temperaturmålinger og etablerer en historik over kropstemperatur i uGrow-appen, som du nemt kan dele med din læge.

Hurtig



Det kan være vanskeligt at holde dit barn i ro længe nok til at få en nøjagtig aflæsning. Det smarte Philips Avent-øretermometer løser dette problem, fordi det er specielt udviklet til at være hurtigt og nemt. Med blot ét tryk på knappen får du en aflæsning på to sekunder.

Nøjagtig

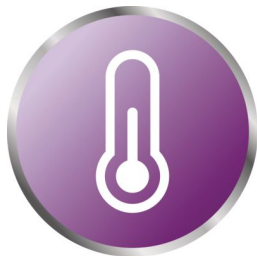


Kropstemperaturen kan måles fem steder: Munden, øret, armhulen, panden og endetarmen. Måling i øret (kaldes også tympanisk måling) er, sammen med endetarmen, den mest nøjagtige metode.* Det smarte Philips Avent-øretermometer bruger måling i øret til at give præcise aflæsninger, som du kan stole på. Vores undersøgelser har vist, at dette termometer giver en måling i medicinsk kvalitet med en nøjagtighed på $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ eller $\pm 0,4^{\circ}\text{F}$ inden for området mellem $32,4^{\circ}\text{C}$ og $42,9^{\circ}\text{C}$ ($90,3^{\circ}\text{F}$ og $109,2^{\circ}\text{F}$). Afspejler kroppens kerntemperatur.*

Angivelse af høj temperatur



Det smarte Philips Avent-øretermometer har et tydeligt LCD-display, hvor du med det samme kan se, om temperaturmålingen ligger på normalt niveau* eller på et højt niveau. Lysringen lyser rødt ved temperaturer på $38,0^{\circ}\text{C}$ ($100,4^{\circ}\text{F}$) eller højere*.

Behageligt og letanvendeligt

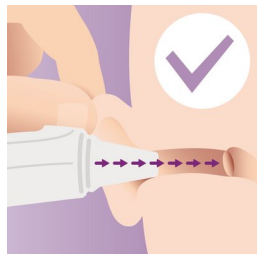

Det smarte Philips Avent-øretermometer tager barnets temperatur i nogle få enkle og hurtige trin. Først skal det kontrolleres, at sensoren er ren og tør. Tryk derefter på tænd/sluk-knappen, og træk forsigtigt barnets øre bagud så

øregangen er lige. Sæt termometeret ind i øret med spidsen pegende mod trommehinden, og tryk på knappen igen. Termometeret er kompakt og strømledet og har en sondespids, der passer til alle aldre.

Celsius og fahrenheit



Uanset om du benytter celsius eller fahrenheit, giver det smarte Philips Avent-øretermometer dig de resultater, du har brug for, i den skala, du forstår.

uGrow-tilsluttet



Det smarte Philips Avent-øretermometer opretter forbindelse til din mobilenhed via Bluetooth® Smart. Fungerer med: iPhone®: Version iOS8.1 / iPhone® 5s og nyere; Android™: Android™ 4.4 KitKat og nyere.



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO₂-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder - energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.

Specifikationer

Synkronisering

Dataoverførsel: via Bluetooth® Smart

Telefonkompatibilitet: iPhone 5s+ | iOS 8.1+ |
Android 4.4 +

Design

Farve: Hvid

Mål: 136 (L) x 34,5 (B) x 57 (D) mm

Nettovægt: Ca. 54,6 g

Brugervenlig

Hurtig: Måling på 2 sekunder

Skift til celsius og fahrenheit

Tydeligt LCD-display

Prøvespids velegnet til alle aldersgrupper

Enkeltstående enhed: Ja, øretermometeret kan
bruges som enkeltstående enhed

Tekniske

Nøjagtighed: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,4^{\circ}\text{F}$) inden for
området mellem $32,4^{\circ}\text{C}$ og $42,9^{\circ}\text{C}$ ($90,3^{\circ}\text{F}$ og
 $109,2^{\circ}\text{F}$)

Måleinterval: $32,4^{\circ}\text{C}$ - $42,9^{\circ}\text{C}$ / $90,3^{\circ}\text{F}$

-109,2°F

Driftsmiljø: $10,0^{\circ}\text{C}$ - $40,0^{\circ}\text{C}$ ($50,0^{\circ}\text{F}$ - $104,0^{\circ}\text{F}$)
med en relativ luftfugtighed på 20 % - 85 %

Strøm

Strømkilde: 2 x AAA ikke-genopladelige
batterier

Tilbehør

2 x AAA-batterier: ikke-genopladelige

Service

To års garanti



* Reflekterer kroppens kernetemperatur

* Kilder: Herzog, L., & Phillips, S. G. (2011). Addressing concerns about fever. Clinical Pediatrics, 50(5), 383–390.

* McCallum, L., & Higgins, D. (2011). Measuring body temperature. Nursing Times, 108(45), 20–2.

* Normale temperaturområder varierer efter aldersgruppe. $38,0^{\circ}\text{C}$ ($100,4^{\circ}\text{F}$) er inden for det normale temperaturområde for babyer.

* Chamberlain, J.M., et al., Determination of Normal Ear Temperature with an Infrared Emission Detection Thermometer, Annals of Emergency Medicine, January 1995, Vol. 25, pp. 15–20.