

PHILIPS

AVENT

Älykorvakuumemittari

uGrow-yhteensopiva

Nopea ja tarkka

Miellyttävä ja helppokäyttöinen



SCH740/21



Mittaa ja tallentaa lapsesi ruumiinlämmön

Tarkka ja nopea uGrow-yhteensopiva korvakuumemittari

Philipsin älykäs Avent-korvakuumemittari tekee ruumiinlämmön mittaamisesta nopeaa ja tarkkaa. uGrow-sovelluksen ansiosta voit tallentaa mittaustuloksen suoraan älylaitteeseesi.

uGrow-yhteensopiva

- Osa uGrow-sovellukseen yhdistettävää tuoteperhettä
- Seuraamalla lapsesi ruumiinlämpöä tiedät paremmin, kuinka lapsesi voi
- Yhdistettävissä uGrow-sovellukseen Bluetooth® Smart -yhteydellä

Nopea ja tarkka

- Saat tarkan mittaustuloksen kahdessa sekunnissa yhdellä painalluksella
- Mittaustuloksen tarkkuus $\pm 0,2$ °C
- Punainen LED-näyttörengas osoittaa kuumeen nopeasti
- Saat tulokset joko Celcius- tai Fahrenheit-asteina

Miellyttävä ja helppokäyttöinen

- Helppo ja miellyttävä tapa mitata kuume korvasta*



asimpleswitch.com

Kohokohdat

uGrow-yhteensopiva tuote



Philips Avent -älykorvakuumemittarin voi yhdistää uGrow-sovellukseen. Maailman ensimmäinen vauvojen terveyssovellus antaa liitettävien laitteiden tietojen perusteella tärkeitä henkilökohtaisia neuvoja. uGrow auttaa sinua tukemaan lapsesi tervettä kehitystä.

Seuraa ja tallenna




Philips Avent -älykorvakuumemittari mittaa kehon lämpötilan nopeasti ja tarkasti ja tallentaa kaikki mitatut lukemat uGrow-sovellukseen, josta ne voi helposti näyttää lääkärille.

Nopea



Kuumeen luotettava mittaaminen voi olla haastavaa, sillä lasta voi olla vaikea saada pysymään paikallaan riittävän kauan. Philips Avent -älykorvakuumemittari on suunniteltu helpottamaan ja nopeuttamaan kuumeen mittaamista. Yksi painallus riittää, ja saat lukeman kahdessa sekunnissa.

Tarkka

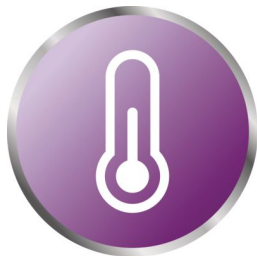


Kehon lämpötilan voi mitata viidestä kohdasta: suusta, korvasta, kainalosta, otsalta tai peräaukosta. Luotettavimmat tulokset saa korvan tärykalvolta sekä peräaukosta.* Philips Avent -älykorvakuumemittari mittaa lämmön tärykalvolta luotettavasti ja tarkasti. Tutkimuksemme mukaan tämä kuumemittari on yhtä luotettava kuin sairaalassa käytetyt. Sen tarkkuus on $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$, kun mitattava lämpötila on $32,4^{\circ}\text{C} - 42,9^{\circ}\text{C}$. Lukema vastaa kehon peruslämpötilaa.*

Kuumeen ilmaisin



Philips Avent -älykorvakuumemittarissa on selkeä LCD-näyttö, josta näet välittömästi, onko lämpötila normaali* vai koholla. Valorengas muuttuu punaiseksi, jos mittaustulos on vähintään $38,0^{\circ}\text{C}$.*


Miellyttävä ja helppokäyttöinen

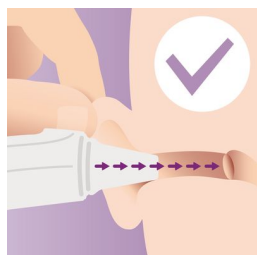

Philips Avent -korvakuumemittarilla pienen potilaan lämmön mittaaminen on nopeaa ja vaivatonta. Tarkista ensin, että mittauskärki on puhdas ja kuiva. Paina virtapainiketta ja venytä potilaan korvalehteä niin, että voit asettaa mittauskärjen korvakäytävään. Paina

uudelleen virtapainiketta. Pienikokoisen ja virtaviivaisen lämpömittarin mittauskärki soveltuu kaikenikäisille potilaille.

Celsius ja Fahrenheit

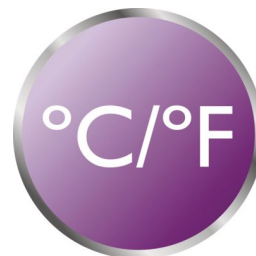

Philips Avent -älykorvakuumemittari ilmoittaa kehon lämpötilan joko Celsius- tai Fahrenheit-asteina.

uGrow-yhteensopiva



Philips Avent -älykorvakuumemittarin voi yhdistää mobiililaitteeseen Bluetooth® Smart -yhteydellä. Yhteensopivuus: iPhone®: versio iOS 8.1 / iPhone® 5s ja uudemmat; Android™: Android™ 4.4 KitKat ja uudemmat.



asimpleswitch.com

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää kustannuksia, energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden ympäristöystävällisyyttä on parannettu merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella: energiansäästö, pakkausmateriaalit, ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä luotettavuus.

Tekniset tiedot

Synkronointi

Tiedonsiirto: Bluetooth® Smart -yhteydellä
Yhteensopivat puhelimet: iPhone 5s+ | iOS 8.1+ | Android 4.4 +

Muotoilu

Väri: Valkoinen
Mitat: 136 (P) x 34,5 (L) x 57 (S) mm
Nettopaino: Noin 54,6 g

Helppokäyttöinen

Nopea: 2 sekunnin mittaus
Valittavissa Celsius- ja Fahrenheit-asteet
Selkeä LCD-näyttö

Kaikenikäisille sopiva mittauskärki

Itsenäinen laite: Kyllä, korvakuumemittaria voi käyttää ilman muita laitteita

Tekniset

Tarkkuus: $\pm 0,2$ °C mittausalueella 32,4 °C – 42,9 °C
Mittausalue: 32,4 °C – 42,9 °C
Käyttöympäristö: 10,0 °C – 40,0 °C, suhteellinen ilmankosteus 20 % – 85 %

Virta

Virtalähde: 2 x AAA-paristo (ei ladattava)

Lisätarvikkeet

2 x AAA-paristo: ei ladattava

Huolto

2 vuoden takuu

