

PHILIPS

AVENT

Elektronik buharlı
sterilizör

220-240V



SCF276/02



Siz hazırsanız, o da hazır

IQ teknolojisi, içindekileri 24 saat steril tutar

Philips AVENT IQ24 Elektronik Buharlı Sterilizör hızlı ve sürekli çalışarak, içindekileri steril tutar ve size zaman kazandırır.

Avantajlar ve özellikler:

- IQ Teknolojisi- Akıllı çözümler sunar
- 24 saat sterilizasyon
- Dijital ekran sizi bilgilendirir
- Parçaları istediğiniz zaman çıkarır
- 6 biberon için sadece 6 dakika
- Etkili sterilizasyon


Özellikler

24 saat sterilizasyon



Bu döngüyü sürekli tekrarlayarak, içindekileri 24 saat süreyle steril tutar. Duraklatma özelliği, bu döngüyü yanda bırakmadan parçaları çıkarmanıza olanak verir.

Dijital ekran sizi bilgilendirir

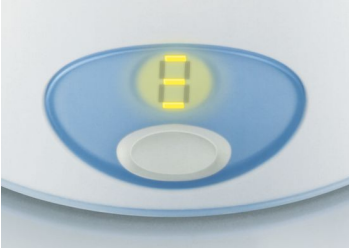

Gelişmiş dijital ekran ve sesli uyanlar, sterilizasyon döngüsü boyunca sizi bilgilendirir.

6 biberon için sadece 6 dakika



En fazla 6 adet 260ml Biberon veya 2 Philips AVENT Göğüs Pompası ve aksesuarlarını alır. 6 dakikada sterilize eder ve açılmadığı sürece içindekiler, 6 saate kadar steril kalır.

Etkili sterilizasyon



Hastane ilkesine dayanan yoğun buhar ısı, zararlı bakterileri yok eder.

Teknik Özellikler

Güç

Gerilim: 220 - 240 V

Ağırlık ve boyutlar

Boyutlar: 320 (Y), 235 (G), 235 (U) mm

Ağırlık: 1,609 kg

Menşei

İngiltere

Paket içeriği

iQ24 Elektronik Buharlı Sterilizasyon Cihazı:

1 adet

Maşa: 1 adet

Ölçme kabı: 1 adet

Gelişim aşamaları

Aşamalar: 0 - 6 ay

