




# PHILIPS

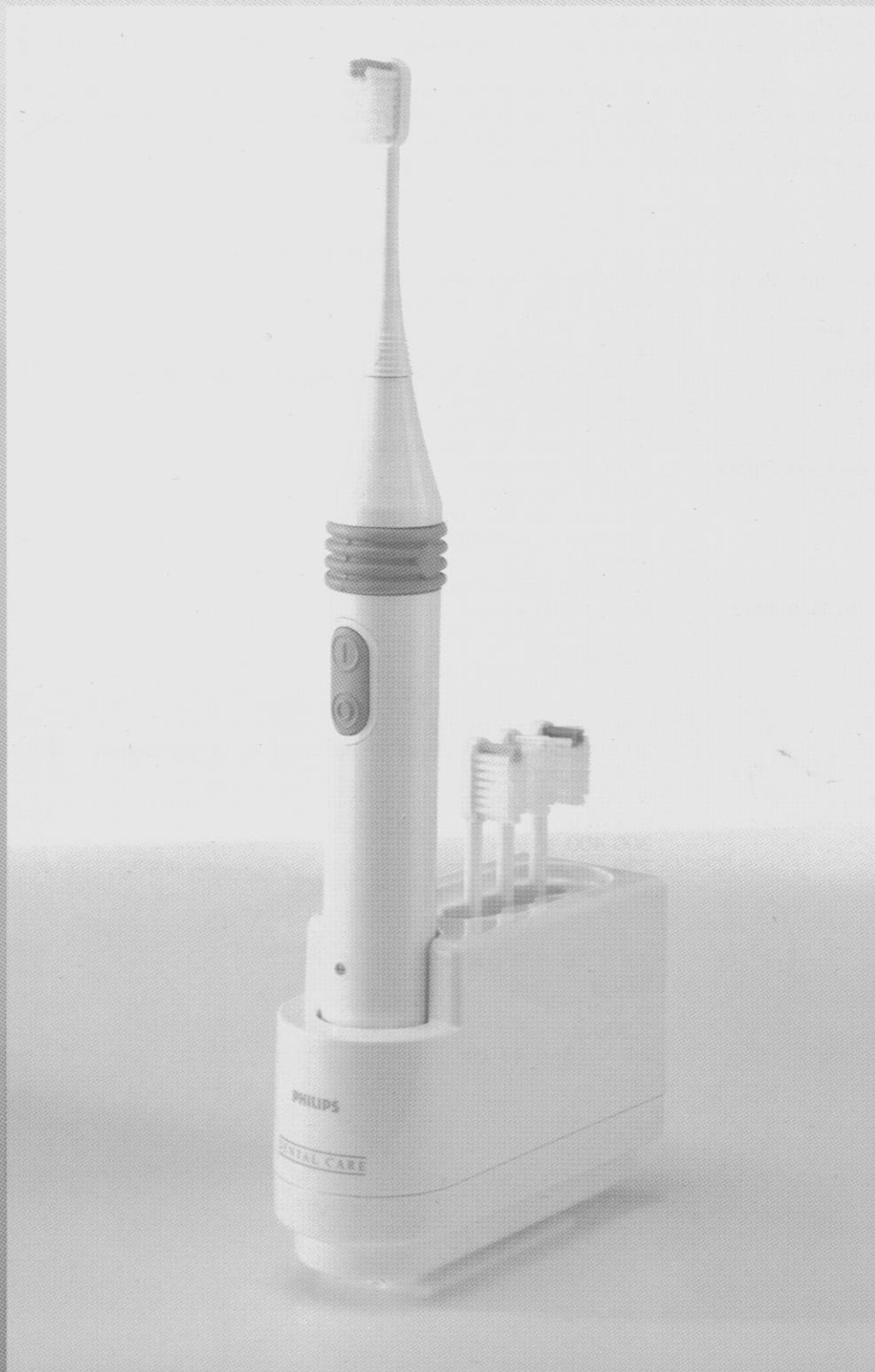

**HP 5211**  
*Cepillo de dientes  
con protección  
de "presión suave"  
para las encías*

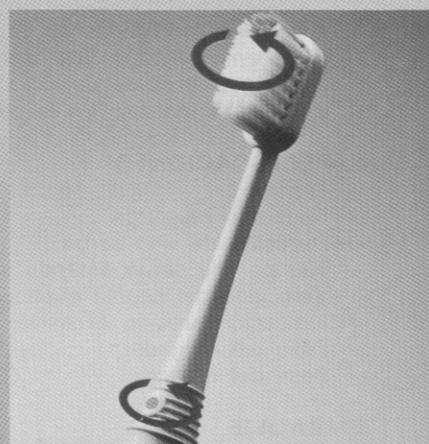

ACCION ELIPTICA DE CEPILLADO PARA UNA MAYOR  
EFICACIA EN LA ELIMINACION DE LA PLACA DENTAL

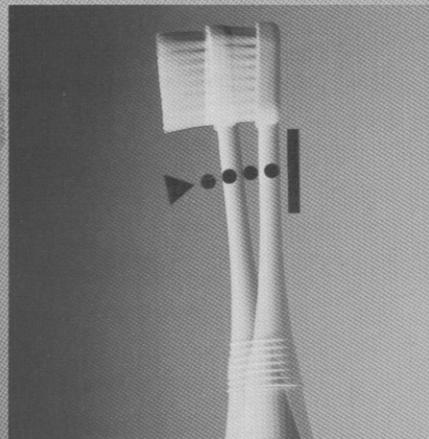

"PRESION SUAVE" PARA PROTECCION  
DE ENCÍAS



# PHILIPS

# HP 5211

## Cepillo de dientes con protección de presión suave para las encías

Este nuevo cepillo de dientes Philips, recargable, se ha proyectado para que proporcione un cuidado óptimo a los dientes y a las encías.

Gracias a la acción elíptica del cepillado se consigue una eliminación más eficaz de la placa, de acuerdo con el método "Bass", el cual ha sido reconocido y recomendado en todo el ámbito odontológico como el más efectivo para el cepillado manual y la eliminación de las placas dentales. No obstante, su realización a mano resulta bastante difícil. El HP 5211 de Philips lo hará por ustedes, y con mayor rapidez.

Para conseguir una seguridad óptima para dientes y encías, el cepillo de dientes Philips no sólo va equipado con cerdas más suaves y finales redondeados, sino que al mismo tiempo incluye el sistema de "presión suave", que señala cuándo se aplica una presión excesiva al cepillarse (superior a 350 g). Este exceso de presión puede perjudicar a las encías y tener un efecto abrasivo en los dientes, todo lo cual, a la larga, podría traducirse en una retracción de las primeras y un rayado de los segundos.

### CARACTERÍSTICAS

- Acción elíptica del cepillo según el método Bass
- Control de presión suave
- Cabeza del cepillo colocada en ángulo
- Cabeza pequeña
- Cerdas suaves con final redondeado
- Sin cordón/recargable
- Tensión universal
- Carga inductiva sin contacto
- Puede cargarse en un enchufe para afeitadora
- Luz indicadora de carga en el mango
- Mango impermeable
- Cargador impermeable
  
- 4 cepillos codificados en color
- Almacenamiento de los cepillos en la unidad de carga, libres de polvo
- Brida para montaje en la pared

### BENEFICIOS

- : Eliminación más eficaz de la placa dental.
- : Mejor protección de dientes y encías.
- : Mejor cobertura.
- : Mejor cobertura.
- : Mejor eliminación de la placa dental y mejor protección.
- : Libertad de empleo.
- : Libertad de empleo.
- : Sin corrosión en los contactos.
- : Libertad de empleo.
- : Control de carga más seguro.
- : Puede emplearse en la ducha.
- : Seguridad y facilidad de empleo y de limpieza (sacar la calveja del enchufe).
- : Uno para cada miembro de la familia.
- : Mejor higiene.
  
- : Comodidad.

### ESPECIFICACIONES

- Tensión : 100-220 V, 50-60 Hz.
- Consumo en carga : 20 W (puede enchufarse en la toma de la afeitadora).
- Duración de una carga : ± 40 minutos.
- Tiempo cde carga estando vacía : ± 10 horas.
- Velocidad del cepillo elíptico : ± 2.500 r.p.m.
- Indicación presión excesiva : 300-400 g.
- Peso del cargador : 230 g.
- Peso del mango : 160 g.

### EMBALAJE

- Dimensiones caja presentación : 23 × 18 × 7 cm.
- Peso caja presentación : 570 g.
- Embalaje múltiple : 6 aparatos.
- Peso embalaje múltiple : 3.900 g.
- Dimensiones embalaje múltiple : 24 × 19 × 43 cm.