

# PHILIPS

## AVENT

Termometro Auricolare  
Intelligente



SCH740/01



## Misura e registra la temperatura del tuo bambino

Termometro auricolare veloce, connesso a uGrow

Il Termometro Auricolare Intelligente Philips Avent ti consente di rilevare in modo veloce la temperatura del tuo bambino e di memorizzarla direttamente nel tuo dispositivo smart utilizzando l'app uGrow.

### Connesso a uGrow

- Fa parte della famiglia di prodotti connessi a uGrow
- Monitora la temperatura del tuo bambino per una buona comprensione della sua salute
- Si connette all'applicazione uGrow tramite Bluetooth® Smart

### Veloce

- Premi un pulsante e in 2 secondi otterrai la rilevazione
- Risultati di  $\pm 0,2$  °C/ $\pm 0,4$  °F
- Anello luminoso con LED rosso per una rapida indicazione della temperatura
- Mostra risultati in gradi Celsius e Fahrenheit

### Comodo e facile da usare

- Progettato per una misurazione auricolare facile e comoda\*



asimpleswitch.com

# In evidenza

## Un prodotto connesso a uGrow



Il Termometro Auricolare Intelligente Philips Avent si connette alla nostra applicazione uGrow, di carattere medico per l'infanzia che ti offre consigli personali preziosi. Lascia che uGrow ti aiuti a scoprire i tratti ricorrenti per sostenere uno sviluppo sano del tuo bambino.

## Monitora e registra



Il Termometro Auricolare Intelligente Philips Avent rileva in modo veloce la temperatura del tuo bambino e realizza una cronologia della temperatura nell'applicazione uGrow al fine di condividerla facilmente con il tuo medico.

## Veloce



Tenere il tuo bambino fermo per misurare la sua temperatura può risultare difficile. Il Termometro Auricolare Intelligente Philips Avent risolve questo problema, poiché è appositamente progettato per un uso rapido e facile. Basta premere un pulsante e in 2 secondi otterrai la rilevazione.

## Veloce




È possibile misurare la temperatura corporea in cinque parti del corpo: bocca, orecchie, ascelle, fronte e retto. Il Termometro Auricolare Intelligente Philips Avent sfrutta la misurazione auricolare. Questo termometro offre misurazioni con intervallo di  $\pm 0,2$  °C o  $\pm 0,4$  °C nell'intervallo compreso tra 32,4 °C e 42,9 °C (90,3 °F - 109,2 °F).

## Indicazione di temperatura alta



Il Termometro Auricolare Intelligente Philips Avent possiede un display LCD, così puoi vedere in modo chiaro se la temperatura del tuo bambino è normale\* o è aumentata. L'anello luminoso diventa rosso con una temperatura di 38,0 °C (100,4 °F) e superiori\*.

## Comodo e facile da usare

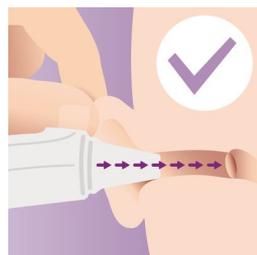

Il Termometro Auricolare Intelligente Philips Avent Smart è progettato per un uso rapido, facile e comodo. Compatto ed essenziale, il termometro possiede un semplice pulsante e una punta della sonda adatta per tutte le età.

## Celsius e Fahrenheit



Celsius o Fahrenheit? Il Termometro Auricolare Intelligente Philips Avent ti mostra i risultati di cui hai bisogno nella scala che preferisci.

## Connesso a uGrow



Il Termometro Auricolare Intelligente Philips Avent si connette al tuo dispositivo mobile tramite Bluetooth® Smart. Compatibile con: iPhone®: versione iOS 8.1/iPhone® 5S e versioni successive; Android™: Android™ 4.4 KitKat e versioni successive.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logo Philips Green

I prodotti Philips Green possono ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO<sub>2</sub>. Come? Offrono miglioramenti significativi per l'ambiente in una o più delle seguenti categorie principali Philips Green: efficienza energetica, confezionamento, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.

# Specifiche

## Sincronizzazione

**Trasferimento dati:** tramite Bluetooth® a basso consumo energetico

**Compatibilità con telefono cellulare:** iPhone 5S e versioni successive | iOS 8.1 e versioni successive | Android 4.4 e versioni successive

## Design

**Colore:** White

**Dimensioni (l x p x a):** 136 (lung.) x 34,5 (larg.) x 57 (prof.) mm

**Peso netto:** Circa 54,6 g

## Facilità d'uso

**Veloce:** Misurazione di 2 secondi

**Passaggio da Celsius a Fahrenheit e viceversa**

**Display LCD nitido**

**Punta della sonda per tutte le età**

**Dispositivo indipendente:** Sì, il Termometro Auricolare può essere usato come dispositivo indipendente

## Specifiche

**Risultati:**  $\pm 0,2$  °C ( $\pm 0,4$  °F) nell'intervallo tra 32,4 °C e 42,9 °C (90,3 °F e 109,2 °F)

**Intervallo di misurazione:** 32,4 °C - 42,9 °C / 90,3 °F - 109,2 °F

**Condizioni di utilizzo:** 10,0 °C - 40,0 °C (50,0 °F - 104,0 °F) con un'umidità relativa tra il 20% e l'85%

## Assorbimento

**Alimentazione:** 2 batterie AAA non ricaricabili

## Accessori

**2 batterie AAA:** non ricaricabili

## Assistenza

**Garanzia di due anni**

