


PHILIPS

BlueTouch
pijnverlichtende patch

BlueTouch

Pijnverzachting met innovatieve
LED

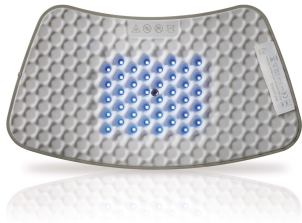

PR3082/00



Natuurlijke verlichting van rugpijn

Innovatieve pijntherapie met blauw LED-licht

Met de Philips BlueTouch kunt u rugpijn op een natuurlijke manier verlichten. De blauwe LED-lamp stimuleert het zelfherstellende vermogen van het lichaam en de pijn zal merkbaar afnemen. De Philips BlueTouch is zonder recept verkrijgbaar in apotheken.

Primeur tegen rugpijn

- Unieke pijntherapie met blauw LED-licht
- Nieuwe benaderingen van therapie met alternatief voor medicijnen
- Kalmerend effect: warmte en lichaamseigen processen

Gebruik: snel, eenvoudig en discreet

- Rugbanden voor een hoog comfort
- Korte behandelzeiten, drie intensiteitsniveaus
- Mobiel en discreet - past in uw dagelijkse routine
- Eerste resultaten van pijnverlichting ervaren na 5 behandelingen

Voor het dagelijks leven: veilig en duurzaam

- Veilig in gebruik
- Eenvoudig reinigen

Verkrijgbaar in apotheken in heel Duitsland

- Zonder recept verkrijgbaar in apotheken
- Probeer het nu: 30 dagen geld-teruggarantie

Kenmerken

Primeur



Het gebruik van blauw LED-licht voor de behandeling van rugpijn is een ongekende nieuwe benadering van therapie. Met de Philips BlueTouch wordt pijn op een volledig natuurlijke manier verlicht: het blauwe LED-licht stimuleert de lichaamseigen processen voor de verzachting van pijn. De BlueTouch is speciaal ontwikkeld voor gebruik op de boven- en onderrug. Dankzij de natuurlijke manier van werken is deze oplossing een prima alternatief voor medicijnen. Philips is BlueTouch zonder recept verkrijgbaar in apotheken.

30 dagen geld-teruggarantie

Ervaar het zelf en probeer de Philips BlueTouch! Als u niet tevreden bent, ontvangt u het geld binnen 30 dagen na de aankoopdatum terug.


Alternatief voor medicijnen



Het belangrijke voordeel van therapie met blauw LED-licht is de natuurlijke aard. Het blauwe licht stimuleert de lichaamseigen processen. Wanneer het blauwe LED-licht op de huid komt, komen de lichaamseigen stikstofmonoxidemoleculen (NO) vrij en worden ze getransporteerd naar de spier die de pijn veroorzaakt. Deze kleine molecule heeft een geweldig effect: de rugpijn wordt op een

natuurlijke manier verlicht. Bijwerkingen, die kunnen optreden bij behandelingen met medicijnen, zijn er daarom niet.

Warmte en stikstofmonoxide

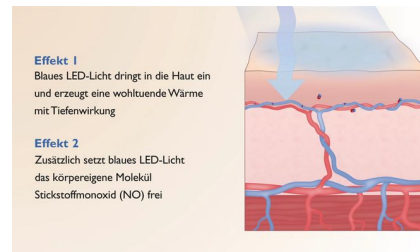

Naast de merkbaar kalmerende warmte stimuleert het blauwe LED-licht ook de productie van stikstofmonoxide (NO) in het lichaam, dat de circulatie bevordert. Dit verhoogt de voorraad zuurstof en voedingsmiddelen naar de spier en vermindert tegelijkertijd de pijntransmissie. De spieren kunnen zich ontspannen en de pijn wordt verlicht. NO zou beschikken over antioxiderende, celbeschermende en ontstekingswerende eigenschappen. Het kan dus spieren en zenuwen beschermen tegen schade en verder letsel voorkomen. De Philips BlueTouch verzacht dus niet alleen de pijn, maar werkt ook preventief.

Rugbanden



Dankzij de aangename, afzonderlijk verstelbare rugbanden kunt u de Philips BlueTouch discreet onder uw kleren dragen. De banden zijn gemaakt van hoogwaardig textiel en zijn speciaal ontwikkeld voor de boven- en onderrug. Schuif de BlueTouch in de opening van de rugband. Plaats dan de rugband tegen

het lichaam en bevestig de band met het klittenband. Hierdoor zit de BlueTouch altijd en overall comfortabel.

Duur van behandeling

Stufe	Behandlungs-dauer	Max. Anwendungen pro Tag
1 Sanft	30 Min.	2
2 Medium	20 Min.	2
3 Stark	15 Min.	2

De Philips BlueTouch kan tweemaal per dag worden opgebruikt. De duur van elke behandeling hangt af van het geselecteerde intensiteitsniveau. In stand 1 (laag) kunt u het apparaat maximaal 30 minuten gebruiken, in stand 2 (medium) maximaal 20 minuten en in stand 3 (hoog) maximaal 15 minuten. U selecteert zelf het gewenste intensiteitsniveau. De lichtintensiteit en temperatuur verschillen per niveau. Door de manier waarop het blauwe LED-licht werkt, draagt de BlueTouch bij dagelijks gebruik effectief bij aan pijnverlichting.

Mobiel en discreet



Dagelijkse rugpijntherapie met de Philips BlueTouch kan gemakkelijk worden opgenomen in uw dagelijkse routine. Het apparaat werkt op batterijen, zodat kabels niet nodig zijn. U kunt daarom vrij bewegen tijdens de behandeling. Dankzij het compacte formaat kunt u de BlueTouch ook discreet onder uw kleding dragen. Tijdens de behandeling kunt u gewoon werken, het huishouden doen of de boodschappen halen.

Specificaties

Natuurlijke pijntherapie

BlueTouch tegen rugpijn: Merkbare verzachting van pijn

Innovatieve LED-patch: 40 geavanceerde blauwe LED's

Volkomen natuurlijk: Geen medicijnen

Toepassing

Voor rugpijn: matig, chronisch, spieren

Onderrug: Ruggengraat en lenden

Bovenrug: Nek en schouders

Gebruiksvriendelijk

Korte behandeltime: 15 tot 30 min. twee keer per dag

Stand 1 (laag): 30 min. twee keer per dag

Stand 2 (medium): 20 min. twee keer per dag

Stand 3 (hoog): 15 min. twee keer per dag

Specificaties

Gemiddeld voltage: 100 - 240 V

Nominale frequentie: 50 - 60 Hz

Gemiddeld ingangsvermogen: 15W

Klasse: Medische hulpmiddel klasse IIa

Classificatie: Risicogroep 1

Waterbestendigheid: IP22

Maximale dagelijkse hoeveelheid: < 90 J/cm²

Batterijtype: Lithium-Ion

Golflengte blauw LED-licht: 453 nm

Aansluitingen

Adapter voor stopcontact: 100 - 240 V

Stopcontacten

Micro USB: Opladen met 12 volt adapter en

Micro-USB-kabel (meegeleverd)

Bediening

Relatieve vochtigheid: 30% tot 90%

Temperatuur: van +10 °C tot +35 °C

Opbergen

Relatieve vochtigheid: 30% tot 90% (geen condens)

Temperatuur: van -20 °C tot +35 °C

Gewicht en afmetingen

Gewicht BlueTouch: 0,168 kg

Afmetingen patch (B x H x D): 353 x 229 x 66 mm

Afmetingen banden (B x H x D): 229 x 179 x 30 mm

Veiligheid

BlueTouch: CE-gecertificeerd en veilig

Energiezuinige modus: Bij contact met lucht

Oververhittingssensor: Automatische uitschakeling

Uitschakelen na behandeling: Automatisch

