

PHILIPS

Pain Relief Patch met
bediening via de app


BlueTouch

Innovatieve blauwe LED-
technologie

Voor spierpijn in de rug

Compatibel met iOS en Android

Met een draagband voor de
bovenrug

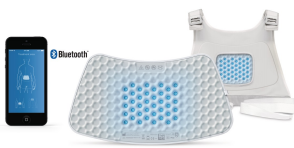

PR3741/00



Natuurlijk spierpijn in de rug verlichten zonder medicijnen

Klinisch bewezen* pijnverlichtende therapie met blauw licht

De Philips BlueTouch gebruikt innovatieve therapie met blauw licht met een dubbel effect. Het geeft rustgevende warmte af en stimuleert de afgifte van stikstofmonoxide van het lichaam om plaatselijk de bloedsomloop te verhogen, waarbij de natuurlijke herstelprocessen van het lichaam worden ondersteund.

Innovatieve blauwe LED-technologie

- Maakt op een unieke manier gebruik van blauw LED-licht om de bloedsomloop lokaal te stimuleren
- Ontspannende warmte voor verlichting van rugpijn
- Informatie over contra-indicaties in de gebruiksaanwijzing

Verbeterd lokaal de bloedsomloop voor pijnverlichting

- Maakt gebruik van warmte en natuurlijke genezende werking van blauw licht
- Behandeling zonder gebruik van medicijnen

Regel uw behandeling met een iOS-/Android-apparaat

- Volg voortgang van uw behandelingen in dagboekoverzicht
- Gebruik de Treatment app voor volledige bediening met een mobiel apparaat.

Gebruik max. 30 min., 2x per dag voor verlichting in 1-2 weken

- Binnen één tot twee weken kunt u resultaat merken
- Korte behandel tijden, drie intensiteitsniveaus
- Probeer het nu: 30 dagen geld-teruggarantie



asimpleswitch.com

Kenmerken

40 geoptimaliseerde blauwe LED's



40x

BlueTouch-patch bevat 40 blauwe LED's die therapeutisch licht uitstralen. Blauw licht zorgt voor warmte en stimuleert de natuurlijke aanmaak van NO door het lichaam, waardoor de bloedsomloop wordt gestimuleerd. Dit zorgt weer voor toevoer van voedingsstoffen en zuurstof en afvoer van metaboliëten om het herstelproces van de spieren in de te behandelen gebieden te ondersteunen.

Aangename warmte



BlueTouch produceert ook heilzame warmte die de spieren ontspant ter verlichting van rugpijn en geeft de gebruiker een gevoel van welzijn.

Contra-indicaties

Gebruik geen BlueTouch als u een van de contra-indicaties hebt die zijn vermeld in de gebruiksaanwijzing. U vindt het volledige overzicht in de gebruiksaanwijzing. Enkele voorbeelden zijn: - Als u een bekende zonneallergie hebt - Als u steroïden gebruikt. Deze geneesmiddelen maken de huid ontvankelijker voor irritatie - als u een geïmplanteed medisch apparaat hebt (schroef, enz.) in of in de buurt van het te behandelen gebied of een actief implanteerbaar medisch hulpmiddel, zoals hartpacemaker, defibrillator, neurostimulator, cochleair implantaat, actief implantaat voor de toediening van medicijnen waar dan ook in het lichaam - als u zwanger bent

Verlichting van rugpijn zonder medicijnen

Philips BlueTouch maakt gebruik van de warmte en activeert natuurlijke genezingsprocessen met blauw licht om rugpijn te verlichten zonder het gebruik van medicijnen.

Natuurlijke verlichting van rugpijn

Het belangrijke voordeel van therapie met blauw LED-licht is de natuurlijke aard. Het blauwe licht stimuleert de lichaamseigen processen. Wanneer het blauwe LED-licht op de huid komt, komen de lichaamseigen stikstofmonoxidemoleculen (NO) vrij en worden ze getransporteerd naar de spier die de rugpijn veroorzaakt. Deze kleine molecuule heeft een geweldig effect: de rugpijn wordt op een natuurlijke manier verlicht.

Gebruik met gratis Treatment app



Philips BlueTouch wordt bediend met onze speciaal ontworpen app die het eenvoudig maakt uw pijnverlichtende behandeling te kiezen en zelf uit te voeren. De Behandeling-app is beschikbaar voor smartphones en tablets, en is compatibel met iOS 7 tot en met iOS 10 en met Android 4.4 KitKat tot en met Android 7.

Behandelingsoverzicht in dagboek

Het behandelingsdagboek maakt deel uit van de Treatment app. Met één druk op de dagboekknop krijgt u een volledig beeld van uw behandelingsgeschiedenis. U kunt dit overzicht gebruiken om uw rugpijnbehandeling te optimaliseren.

Duur van behandeling



3x

De Philips BlueTouch kan tweemaal per dag worden opgebruikt. De duur van elke behandeling hangt af van het geselecteerde intensiteitsniveau. In stand 1 (laag) kunt u het apparaat maximaal 30 minuten gebruiken, in stand 2 (medium) maximaal 20 minuten en in stand 3 (hoog) maximaal 15 minuten per behandeling. U selecteert zelf het gewenste intensiteitsniveau. De lichtintensiteit en temperatuur verschillen per niveau. Door de manier waarop het blauwe LED-licht werkt, draagt de BlueTouch bij dagelijks gebruik effectief bij aan pijnverlichting.

30 dagen geld-teruggarantie

Ervaar het zelf en probeer de Philips BlueTouch! Probeer het apparaat ten minste twee weken voor een optimaal effect. Als u niet tevreden bent, ontvangt u het geld binnen 30 dagen na de aankoopdatum terug.

Aanbevolen gebruik

Aanbevolen gebruik is twee keer per dag maximaal 30 minuten. Binnen één tot twee weken kunt u resultaat merken.



Philips Green-Logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Inclusief

BlueTouch pijnverlichtende patch
Draagband voor bovenrug
Adapter

Toepassing

Voor spierpijn in de rug
Bovenrug

Gebruik

Tot twee keer per dag
Stand 1 (laag): 30 min. twee keer per dag
Stand 2 (medium): 20 min. twee keer per dag
Stand 3 (hoog): 15 min. twee keer per dag

Specificaties

Gemiddeld voltage: 100 - 240 V
Gemiddeld ingangsvermogen: 15 W
Nominale frequentie: 50 - 60 Hz
Klasse: Medische hulpmiddel klasse IIa
Classificatie: Risicogroep 1
Waterbestendigheid: IP22
Maximale dagelijkse hoeveelheid: < 108,5 J/cm²
Batterijtype: Li-ion
Golflengte blauw LED-licht: 453 nm

Gewicht en afmetingen

Gewicht BlueTouch: 0,168 kg
Afmetingen patch (B x H x D): 280 x 155 x 12,5 mm

Software

Compatibiliteit met iPhone®: Versie iOS 7 tot iOS 10, iPhone® 4S en nieuwer
Compatibiliteit met iPad®: Versie iOS 7 tot iOS 10, iPad® 3e generatie, iPad Air™, iPad mini™ en nieuwer
Compatibiliteit met iPod®: Versie iOS 7 tot iOS 10, iPod touch® 5e generatie en nieuwer
Compatibiliteit met Android: Android 4.4 KitKat tot en met Android 7

