

PHILIPS

sonicare

ソニックケア プレミアムガム
ケア ブラシヘッドレギュラー

Premium Gum Care

1 本入り

レギュラーサイズ

簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ブラシヘッド認識機能対応

HX9051/24



わずか2週間で歯ぐきの健康を推進* 歯ぐきをケアするブラシヘッド

歯ぐきの健康を推進するには、プレミアムガムケアブラシヘッドを取り付けましょう。丸いカットで歯列にフィットし歯ぐきにやさしく、やわらかな毛先で歯肉縁の歯垢を除去します。

優れた歯ぐきのケア

- ・ 歯ぐきにやさしく歯垢除去

しっかり磨ける

- ・ 歯や歯ぐきの形状にフィットしてしっかり歯垢を除去

新機能


- ・ ブラシヘッド認識機能対応
- ・ 音波水流

理想的な性能を実現するデザイン

- ・ ブラシヘッド交換お知らせ機能
- ・ 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- ・ 純正ブラシヘッドをお使いください

特長

歯ぐきにやさしく歯垢除去

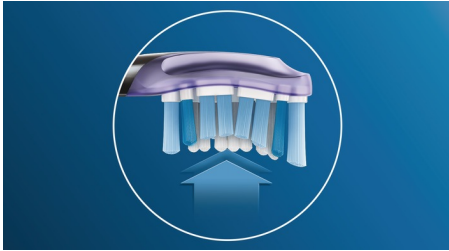


プレミアムガムケアブラシヘッドは、丸いカットで歯列にフィットし歯ぐきに優しく、やわらかな毛先で歯肉縁上の歯垢を除去します。

歯や歯ぐきの形状にフィットしてしっかり歯垢を除去



プレミアムガムケア ブラシヘッドは、1人1人の歯と歯ぐきの形に合わせて変形するブラシヘッドです。ゴム製の柔軟なヘッド部分が歯の表面のカーブにぴったりとフィットし、届きにくい部分も歯ぐきにやさしくしっかり磨けます。過剰なブラッシング圧を吸収するので、力を入れすぎてしまった場合も歯ぐきを傷つけることを防ぎます。

ブラシヘッド認識機能対応

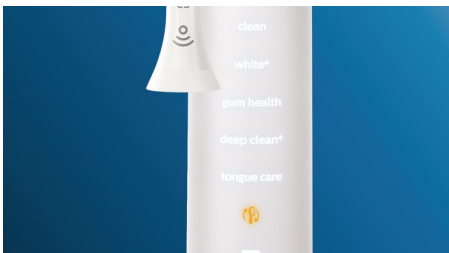

ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強


さレベルを自動で設定**（ダイヤモンドクリーン スマート、プロテクトクリーン対応、モード・強さはお好みで変更可能）

音波水流



毎分約 31,000 回の振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしくしっかり歯垢を除去します。

ブラシヘッド交換お知らせ機能

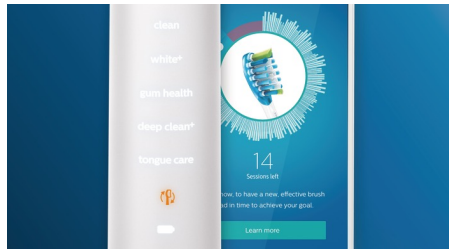

ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラッシング圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします（ダイヤモンドクリーン スマート、プロテクトクリーン対応）。

簡単にはめ込みできるブラシヘッド



ソニックケアのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。（ソニックケアキッズ、e シリーズを除く）

純正ブラシヘッドをお使いください



ソニックケアのハンドルは、ソニックケアの純正ブラシヘッドとお使いいただくことで、最良の結果を出すようにデザインされています。ソニックケアの純正ブラシヘッドは、歯と歯ぐきを優しくケアします。ブラシヘッドは厳しい動作テストに合格済み。優れた使用感と耐久性をお届けします。

仕様

内容

ブラシヘッド: プレミアムガムケア レギュラー
(ホホワイト) 1本

仕様

ブラシヘッド認識機能対応: ○

毛の硬さ: やわらかめ

色: ホホワイト

ブラシヘッドの素材: やわらかく柔軟性の高いゴ

ム製のヘッド

交換時期をお知らせ: 青い毛先の色が白くなっ
たら交換のサインです。

サイズ: レギュラー

互換性

ブラシヘッド装着方式: はめ込み式

使用できるモデル: ソニックアーキッズ、e シリ
ーズ以外すべてのモデル

交換時期

交換: 約3ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛
が白くなったときに交換してください。

